


beurer

TB 50




- CZ** Elektrický zubní kartáček
Návod k použití 4
- SK** Elektrická zubná kefka
Návod na použitie 13


CE

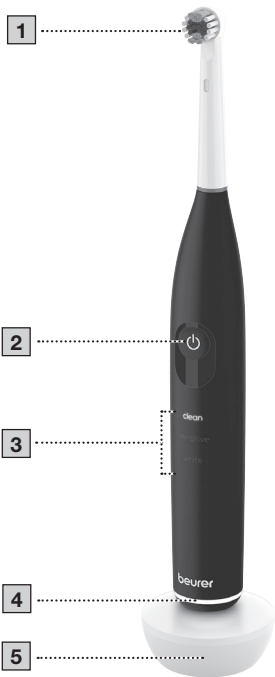


A

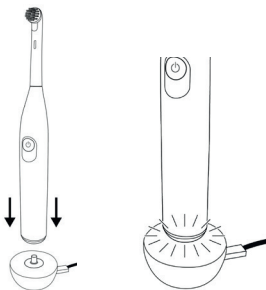


B

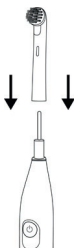


C

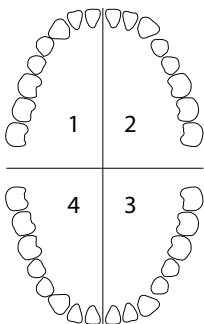


D

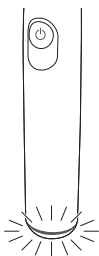

E

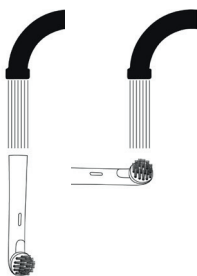

F

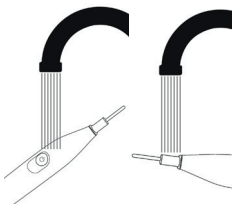



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

OBSAH

1. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	4
2. Obsah balení	6
3. Vysvětlení symbolů.....	7
4. Použití v souladu s určením.....	9
5. Popis přístroje.....	9
6. Použití.....	9
6.1 Příprava použití.....	9
6.2 První použití.....	10
7. Čištění a údržba	10
8. Příslušenství a náhradní díly	11
9. Likvidace	11
10. Technické údaje.....	12
11. Záruka	12

1. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

- Nabíjecí stanici a síťový adaptér chraňte před vodou a jinými kapalinami.
- Nabíjecí stanici a síťový adaptér nenabíjejte v blízkosti umyvadla nebo vany naplněné vodou.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.
- Pokud je síťový kabel poškozen, nabíjecí stanici zlikvidujte.
- Používejte pouze nabíjecí USB kabel se síťovým adaptérem dodaný s vaším přístrojem a příslušnou nabíjecí stanicí.
- Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér můžete používat jen se síťovým napětím, které je na něm uvedeno.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

▲ POZOR

- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Baterie se musí před použitím správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte baterii (viz kapitola „Příprava použití“).
- Pro dosažení co nejdelší životnosti nabíjejte baterii plně minimálně 2 krát za rok.

2. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 elektrický zubní kartáček
- 1 kartáčková hlavice
- 1 nabíjecí stanice
- 1 nabíjecí USB kabel se síťovým adaptérem
- 1 úložné pouzdro
- 1 návod k použití

3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku

Upozornění na důležité informace



Přečtěte si pokyny



Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU



Součásti obalu roztrídíte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.



Označení CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Produkt a součásti obalu rozřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka



Značka posuzování shody pro Velkou Británii



Přístroj třídy III



Symbol dovozce



Výrobce



Ochrana proti stříkající vodě

ta=40°C

Jmenovitá teplota okolí



Napájecí zdroj, impulzně řízený; impulzně řízený napájecí zdroj; SMPS



Bezpečnostní oddělovací transformátor.



USB / Přípojka micro USB



Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.



Energetická účinnost 6



Přístroj třídy ochrany II

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2



Pouze pro použití v interiéru

4. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj používejte výhradně k čištění zubů u lidí. Přístroj nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let! Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Kartáčková hlavice

2 Vypínač / tlačítko režimu

Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí přístroje

Dlouhé stisknutí: Změna režimu

3 Indikátor režimu

4 Světelný kroužek

Kontrola tlaku

Světelný kroužek červený: Příliš vysoký tlak

Světelný kroužek bílý: Tlak ok

Indikátor stavu nabití

Světelný kroužek bliká bíle: Baterie je téměř vybitá

Světelný kroužek pulzuje bíle: Baterie se nabíjí

Světelný kroužek trvale bílý: Baterie nabitá

5 Nabíjecí stojánek

6. POUŽITÍ

6.1 Příprava použití

Nabíjení elektrického zubního kartáčku

Před prvním použitím elektrický zubní kartáček plně nabijte. Postupujte takto:

1. Připojte nabíjecí USB kabel do nabíjecí stanice **5**. Zapojte nabíjecí USB kabel do USB portu nebo s dodaným adaptérem do vhodné zásuvky.
2. Nasadte elektrický zubní kartáček na nabíjecí stojánek **5**. Během nabíjení pulzuje světelný kroužek **4** bíle (viz obrázek **A**). Jakmile je elektrický zubní kartáček plně nabitý, svítí světelný kroužek **4** trvale bíle.

Nasazení kartáčkové hlavice

Nasadte kartáčkovou hlavici **1** shora na přístroj tak, aby pevně zaklapla **B**. Dbejte na to, aby kartáčková

hlavice **1** ukazovala stejným směrem jako vypínač / tlačítko režimu **2**.



Doporučujeme vyměnit kartáčkovou hlavici **1** po 3 měsících. Pokud jsou štětiny kartáčkové hlavice opotřebené nebo roztržené, může být nutné měnit je častěji.

6.2 První použití

1. Pro zapnutí elektrického zubního kartáčku, stiskněte krátce vypínač / tlačítko režimu **2**. Každých 30 sekund elektrický zubní kartáček krátce zavibruje, aby vám připomněl, že stejně dlouho se musí čistit všechny 4 zubní kvadranty **C**. Elektrický zubní kartáček je vybaven automatickým časovačem a po 2 minutách třikrát zavibruje. Zubní kartáček se po 6 minutách automaticky vypne.



Elektrický zubní kartáček je vybaven senzorem tlaku. Jakmile během aplikace kartáčkovou hlavici **1** příliš silně tlačíte na zuby nebo dásně, rozsvítí se světelný kroužek **4** červeně (viz obrázek **D**).

2. Dlouhým stisknutím vypínače / tlačítka režimu zvolte **2** požadovaný režim. Aktuálně zvolený režim se rozsvítí na indikátoru režimu **3**. K dispozici jsou tyto režimy:

„clean“	Pro důkladné a kompletní vyčištění
„sensitive“	Pro jemné čištění šetrné k dásním
„white“	Čištění pro přirozené bělení zubů

3. Pro předčasné přerušování aplikace stiskněte krátce vypínač / tlačítko režimu **2**.
4. Vyčistěte přístroj podle popisu v kapitole „Čištění a údržba“.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj a hlavici kartáče vyčistěte **1** po každém použití. Postupujte takto:

1. Vytáhněte kartáčkovou hlavici **1** směrem nahoru.
2. Očistěte kartáčkovou hlavici **1** pod tekoucí vodou **E**. Dbejte na to, abyste vyčistili také vnitřek kartáčkové hlavice **1**.
3. Přístroj čistěte pod tekoucí vodou **F**. Nenamáčejte ovšem přístroj pod vodu. Do přístroje by se mohla dostat voda a poškodit ho.
4. Nabíjecí stanici **5** pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a jemným mýdlovým roztokem. Ne-

používejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Udržujte nabíjecí stanici **5** a nabíjecí USB kabel v dostatečné vzdálenosti od vody.

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	Číslo výrobku nebo objednací číslo
Kartáčkové hlavice Clean 4 ks	101.56
Kartáčkové hlavice Clean 8 ks	101.54
Kartáčkové hlavice Sensitive 4 ks	101.58
Kartáčkové hlavice Sensitive 8 ks	101.39

9. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.



Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách zvláštního odpadu nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



Vyjmutí baterie

1. Odstraňte gumové těsnění na spodní části zubního kartáčku ostrým předmětem.
2. Membránu odstraňte ostrým předmětem.
3. Nyní vhodným šroubovákem odstraňte viditelný šroub.
4. Sejměte spodní část zubního kartáčku.
5. Vytáhněte vnitřní kryt zubního kartáčku.
6. Vyjměte baterii z vnitřního krytu.
7. Baterii zlikvidujte zvlášť ve speciálně označených sběrných nádobách, ve sběrných zvláštního odpadu nebo u prodejců elektrotechniky.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	TB 50
Rozměry	Přístroj: 205 x 29 mm Úložný box: 213 x 57 x 34 mm
Hmotnost	Přístroj: 214 g (zubní kartáček + kartáčková hlavice + nabíjecí stanice) Úložný box vč. příslušenství: 224 g
Baterie: Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	1 500 mAh 3,7 V Lithium-iontová baterie
Napájení	vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A výstup: 5,0 V === 1,0 A, 5,0 W

Technické změny vyhrazeny

11. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	13
2. Obsah balenia	16
3. Vysvetlenie symbolov	16
4. Účel použitia.....	18
5. Popis prístroja.....	18
6. Použitie	19
6.1 Príprava na použitie.....	19
6.2 Začiatok používania.....	19
7. Čistenie a starostlivosť	20
8. Príslušenstvo a náhradné diely.....	20
9. Likvidácia.....	21
10. Technické údaje.....	21
11. Záruka	22

1. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

▲ VÝSTRAHA

- Nabíjaciu stanicu a sieťový zdroj uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
- Nabíjaciu stanicu a sieťový zdroj nedávajte do blízkosti umývadla alebo vane s vodou.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo ak nefunguje správne. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
- Ak je sieťový prívodný kábel poškodený, musí sa nabíjacia stanica zlikvidovať.
- Používajte len USB nabíjací kábel so sieťovým adaptérom a príslušnú nabíjaciú stanicu, ktoré boli dodané s vaším zariadením.

- Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky.
- Síťový adaptér můžete používat jen se síťovým napětím, které je na něm uvedeno.
- Přístroj nesmíte v žádnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

▲ VÝSTRAHA

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Keď akumulátor vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedr-
vte.

▲ UPOZORNENIE

- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačky uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu „Príprava na použitie“).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora ho úplne nabite aspoň 2-krát do roka.

2. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 elektrická zubná kefka
- 1 kefková hlavica
- 1 nabíjacia stanica
- 1 USB nabíjací kábel so sieťovým adaptérom
- 1 úložný box
- 1 návod na použitie

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

VÝSTRAHA

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

UPOZORNENIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

OZNÁMENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.



Informácia o produkte

Upozornenie na dôležité informácie



Prečítajte si pokyny

	<p>Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>
	<p>Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu</p>
	<p>Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU</p>
	<p>Oddel'te obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.</p>
	<p>Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.</p>
	<p>Oddel'te výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.</p>
	<p>Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón</p>
	<p>Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu</p>
	<p>Prístroj triedy III</p>
	<p>Symbol importéra</p>
	<p>Výrobca</p>
	<p>Ochrana proti striekajúcej vode</p>
<p>ta=40°C</p>	<p>Menovitá teplota okolia</p>
	<p>Napájacia jednotka, prepínací režim; napájacia jednotka spínacieho režimu; SMPS</p>



Bezpečnostný izolačný transformátor,
odolný proti skratu



PIN1+ PIN4-
 PIN1+
PIN4-

USB / Mikro-USB prípojka



Nepoužívajte sieťový adaptér,
ak je zástrčka poškodená.



Energetická účinnosť úroveň 6



Prístroj triedy ochrany II

Prístroj je vybavený dvojitou ochranou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2



Nur zum Gebrauch in geschlossenen
Räumen

4. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj používajte výlučne na čistenie zubov u ľudí. Prístroj nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre osoby do 8 rokov! Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Kefková hlavica

2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu

Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie prístroja

Dlhé stlačenie: prepnutie režimu

3 Indikátor režimu

4 Svietiaci krúžok

Kontrola prítlaku

Červený svietiaci krúžok: príliš vysoký prítlak

Biely svietiaci krúžok: prítlak ok

Indikátor stavu nabitia

Svietiaci krúžok bliká nabiele: nízka kapacita akumulátora

Svietiaci krúžok pulzuje nabiele: akumulátor sa nabíja

Svietiaci krúžok trvalo biely: akumulátor je nabitý

5 Stojan nabíjacej stanice

6. POUŽITIE

6.1 Príprava na použitie

Nabíjanie elektrickej zubnej kefky

Pred prvým použitím elektrickú zubnú kefku úplne nabite. Postupujte pritom nasledovne:

1. Spojte USB nabíjací kábel so stojanom nabíjacej stanice **5**. USB nabíjací kábel zasuňte do USB portu alebo s dodaným adaptérom do vhodnej zásuvky.
2. Elektrickú zubnú kefku nasadte na stojan nabíjacej stanice **5**. Počas nabíjania svietiaci krúžok **4** pulzuje nabiele (pozri obrázok **A**). Keď je elektrická zubná kefka úplne nabitá, svietiaci krúžok **4** svieti trvalo nabiele.

Nasadenie kefkovej hlavice

Kefkovú hlavicu nasadte **1** zhora na prístroj, kým pevne nezapadne **B**. Dbajte na to, aby kefková hlavica **1** smerovala rovnakým smerom ako tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**.



Odporúčame, aby ste kefkovú hlavicu vymieňali **1** po 3 mesiacoch. Ak sú štetiny kefkovej hlavice opotrebované alebo rozstrapkané, pravdepodobne sa musia vymieňať častejšie.

6.2 Začiatok používania

1. Na zapnutie elektrickej zubnej kefky krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**. Elektrická zubná kefka krátko zavibruje každých 30 sekúnd, aby vám pripomenula, aby ste rovnako dlho čistili všetky 4 štvrtiny čeluste **C**. Elektrická zubná kefka má automatický časovač a po 2 minútach zavibruje trikrát. Po 6 minútach sa zubná kefka automaticky vypne.



Elektrická zubná kefka má snímačom prítlaku. Keď počas používania zatlačíte kefkovú hlavicu **1** príliš pevne na zuby alebo ďasná, svietiaci krúžok začne svietiť **4** načerveno (pozri obrázok **D**).

2. Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/režimu **2** vyberte požadovaný režim. Aktuálne zvolený režim sa rozsvieti na indikátore režimu **3**. K dispozícii máte nasledujúce režimy:

„clean“	Na dôkladné a úplné čistenie
„sensitive“	Na jemné čistenie šetrné k ďasnám
„white“	Čistenie na prirodzené zosvetlenie zubov

3. Na predčasné prerušenie použitia krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**.
4. Vyčistite prístroj podľa popisu v kapitole „Čistenie a starostlivosť“.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Po každom použití vyčistite prístroj a kefkovú hlavicu **1**. Postupujte pritom nasledovne:

1. Vytiahnite kefkovú hlavicu **1** smerom nahor.
2. Kefkovú hlavicu vyčistite **1** pod tečúcou vodou **E**. Dbajte na to, aby ste vyčistili aj vnútornú časť kefkovej hlavice **1**.
3. Prístroj čistite pod tečúcou vodou **F**. Prístroj neponárajte do vody. Do prístroja môže vniknúť voda a poškodiť ho.
4. Stojan nabíjacej stanice **5** pravidelne čistite vlhkou handričkou a jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Stojan nabíjacej stanice **5** a USB nabíjací kábel so sieťovým adaptérom chráňte pred vodou.

8. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Kefkové hlavice Clean 4 ks	101.56
Kefkové hlavice Clean 8 ks	101.54

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Kefkové hlavice Sensitive 4 ks	101.58
Kefkové hlavice Sensitive 8 ks	101.39

9. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinní akumulátory zlikvidovať.

Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



Odstránenie akumulátora

1. Gumové tesnenie na dne zubnej kefky odstráňte špicatým predmetom.
2. Membránu odstráňte špicatým predmetom.
3. Teraz vhodným skrutkovačom odstráňte viditeľnú skrutku.
4. Odoberte dno zubnej kefky.
5. Vytiahnite vnútorné teleso zubnej kefky.
6. Vyberte akumulátor z vnútorného telesa.
7. Akumulátor zlikvidujte prostredníctvom špeciálne určených zberných nádob, zberných miest na špeciálny odpad alebo predajcov elektroniky.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	TB 50
Rozmery	Prístroj: 205 x 29 mm Úložný box: 213 x 57 x 34 mm
Hmotnosť	Prístroj: 214 g (zubná kefka + kefková hlavica + nabíjacia stanica) Úložný box vrát. príslušenstva: 224 g
Akumulátor: Kapacita Menovité napätie Typové označenie	1500 mAh 3,7 V Lítium-iónová batéria
Napájanie	Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A Výstup: 5,0 V $\overline{=}$ 1,0 A, 5,0 W

Technické zmeny vyhradené

11. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com



100.78_TB50_2023-03-27_03_IM2_BEU_CS_SK