


beurer CM 51



CS	Masáž proti celulitidě	
	Návod k použití	3
SK	Cellulite Massage	
	Návod na obsluhu	10



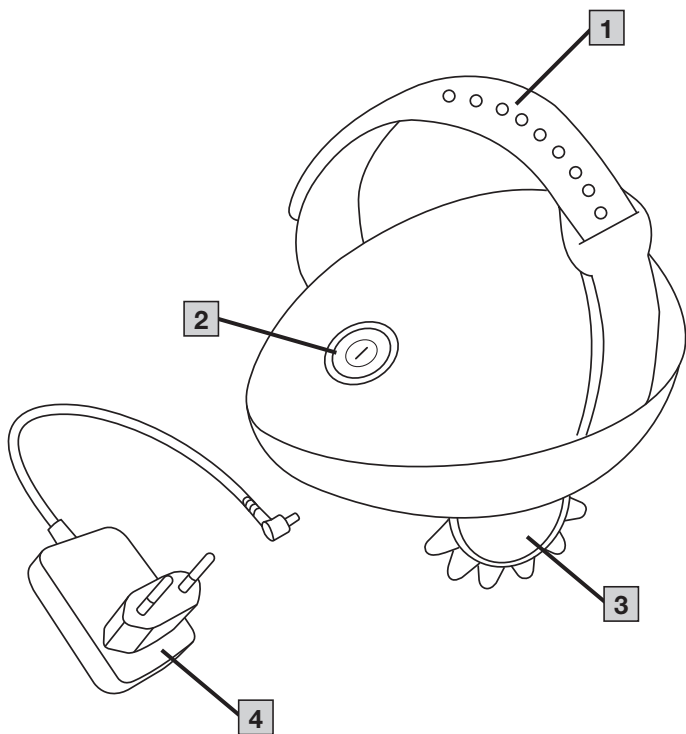



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Rozsah dodávky	3	7. Použití	7
2. Vysvětlení symbolů	3	8. Čištění a údržba	8
3. Použití k určenému účelu	4	9. Příslušenství a náhradní díly	8
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	6	10. Likvidace	8
5. Popis přístroje	7	11. Tehniční podatki	8
6. Uvedení do provozu	7	12. Záruka / servis	9

1. ROZSAH DODÁVKY

Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska.

- Masáž proti celulitidě
- Síťový zdroj
- Tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.



Oddělte obalové komponenty a zlikvidujte ich v souladu s komunálními předpisy.

	Štítek pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobce
	Značka CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Prečítajte si pokyn
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Stejnoseměrný proud
	Polarita
	Síťový adaptér
	Třída energetické účinnosti 6
	Bezpečnostní oddělovací transformátor.
	Označení posouzení shody pro Spojené království
ta=40°C	Menovitá teplota okolia Maximálna prevádzková teplota
	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.
	Zariadenie triedy III
	Oddelte výrobek a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro lékařské nebo komerční používání. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících

výstražných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás masážní přístroj vhodný, dotážete se svého lékaře.

▲ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

▲ VAROVÁNÍ

Masážní přístroj nepoužívejte

- u zvířat,
- při patologických změnách nebo poranění v masírované oblasti těla (např. výhrěz meziobratlové ploténky, otevřená rána),
- v žádném případě pro masáže v oblasti srdce, jestliže máte kardiostimulátor, a dotážete se nejprve svého lékaře i ohledně ostatních částí těla,
- nikdy na oteklých, popálených, zanícených nebo poraněných částech kůže a těla,
- při tržných ranách, kapilárach, křčových žilách, akne, kuperóze, herpese alebo iných kožných ochoreniach,
- během těhotenství,
- v obličeji (oči), na hrtanu nebo jiných obzvláště citlivých částech těla,
- přístroj nepoužívejte pro masáž nohou,
- nikdy během spánku,
- po požití léčiv nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
- ve vozidle.

Před použitím masážního přístroje se dotážete svého lékaře

- pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci na horní části těla,
- pokud nosíte kardiostimulátor, implantáty nebo jiná pomocná zařízení,
- při trombózách,
- při cukrovce,
- při bolestech nejasné příčiny.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě předejte současně i tento návod.

Zásah elektrickým proudem

VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte pouze se síťovým zdrojem, který je součástí dodávky, a připojte pouze k napětí uvedenému na síťovém zdroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouři.

V případě vad nebo poruchách provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování síťového zdroje ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem. Kabel neskřípejte, nepřehýbejte ani jím nekrúťte. Nezapichujte žádné špendlíky nebo ostré předměty.

Zajistěte, aby masážní přístroj, spínač, síťový napáječ a kabel nebyly v kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. Přístroj proto používejte pouze v suchých vnitřních prostorech (např. nikdy ve vaně, sauně).

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku. Nepoužívejte přístroj, pokud přístroj nebo příslušenství vykazuje viditelné poškození. Přístroj nevystavujte žádným otřesům a nenechte jej spadnout.

Oprava

VAROVÁNÍ

- Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Masážní přístroj proto nepoužívejte

- zakrytý, např. pod dekou, polštářem, ...
- v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

Zacházení s přístrojem

POZOR

Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Do otvorů přístroje a rotujících částí nestrkejte žádné předměty. Dbejte na to, aby se pohyblivé části mohly pohybovat vždy volně.
- Dbejte na to, aby se vám při používání přístroje nezachytily vlasy do rotujících nástavců. Pro jistotu si upevněte vlasy gumičkou.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1** Nastavitelná rukojeť s okem
- 2** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti
- 3** Masážní válečky
- 4** Síťový zdroj

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

- Sejměte obal.
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka a kabel poškozen.
- Zasuňte připojovací konektor do zdířky na masážním přístroji.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.

7. POUŽITÍ

Masážní přístroj opatrně přitlačte k místu, které chcete namasírovat.

Pocítujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušte ji či změňte polohu nebo tlak. Nevkládejte nebo nevlačujte žádnou část těla, zejména prsty, mezi rotující masážní válečky.

Ovládání stisknutím vypínače/tlačítka rychlosti **2**:

1. stisknutí: Přístroj se zapne, masážní válečky se začnou otáčet
2. stisknutí: Přístroj přepne na vyšší rychlostní stupeň
3. stisknutí: Přístroj se vypne, použití se ukončí.

Upozornění

- Masážní přístroj používejte max. 15 minut. Při delší době masáže může vést nadměrná stimulace svalů k přetažení namísto uvolnění.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky a odpojte jej od přístroje.
- Přístroj čistěte pouze popsáním způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Masážní válečky sundáte tak, že za ně pevně zatáhnete. Nástavec s válečky lze čistit jemným kartáčkem pod tekoucí vodou, můžete přidat trochu mycího prostředku.
- Přístroj můžete čistit jemným, lehce navlhčeným kouskem tkaniny.
- Přístroj znovu použijte, pokud je zcela suchý.

Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžkání.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách..

Síťový adaptér (EU) Č. výrobku 110.167

Síťový adaptér (UK) Č. výrobku 110.166

10. LIKVIDACE

POZOR

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



11. TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: Vhodna moč Izhodna moč	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 10,0 V — — 1,2 A, 12 W
Priemerná efektivita v prevádzke	≥ 83,59 %
Učinkovitost pri majhni obremenitvi (10 %)	≥ 78,47 %
Príkon pri nulovom zaťažení	≤ 0,072 W
Mere	pribl. 9,5 x 12,5 x 8 cm

Teža	Hlavní přístroj: 172,5g Masážní válečky: 51,0g Adaptér: 103,0g
------	--

12. ZÁRUKA / SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Obsah balenia	10	7. Používanie	14
2. Vysvetlenie symbolov	10	8. Čistenie a starostlivosť	15
3. Účel použitia	12	9. Príslušenstvo a náhradné diely	15
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia..	13	10. Likvidácia	15
5. Popis prístroja	14	11. Technické údaje	15
6. Uvedenie do prevádzky	14	12. Záruka a servis	16

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu.

- 1x prístroj proti celulitíde
- 1x sieťový zdroj
- 1x návod na obsluhu

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

V návode na použitie a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

UPOZORNENIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.



Upozornenie

Upozornenie na dôležité informácie.



Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2.



Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.

	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EG o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Prečítajte si pokyn
	Výrobky preukázateľne vyhovujú požiadavkám technických predpisov EAHU
	Jednosmerný prúd
	Polarita
	Spínací zdroj
	Energetická účinnosť úroveň 6
	Bezpečnostný oddeľovací transformátor, bezpečný proti skratu
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Menovitá teplota okolia Maximálna prevádzková teplota
	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.
	Zariadenie triedy III
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

3. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený na masáž jednotlivých častí ľudského tela. Prístroj je určený len na **osobné použitie**, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj nemôže nahradiť liečbu lekárom. Masážny prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré výstražné upozornenia. Ak si nie ste istý, či je pre vás masážny prístroj vhodný, poraďte sa so svojim lekárom.

VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí sieťové prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

VÝSTRAHA

Masážny prístroj nepoužívajte

- na zvieratách,
- pri chorobných zmenách alebo zraneniach masírovanej oblasti tela (napr. prolaps medzistavcovej platničky, otvorené rany),
- v žiadnom prípade na masáže v oblasti srdca, ak máte implantovaný kardiostimulátor a aj o iných častiach tela sa najprv poraďte so svojim lekárom,
- nikdy na opuchnutých, popálených, zapálených alebo poranených častiach kože a tela,
- pri tržných ranách, kapilárach, kŕčových žilách, akné, kuperóze, herpese alebo inom kožnom ochorení,
- počas tehotenstva,
- na tvári (očiach), na hrtane alebo inej obzvlášť citlivej časti tela,
- na masáž chodidiel,
- nikdy počas spánku,
- po užití liekov alebo alkoholu (obmedzená schopnosť vnímania!),
- v motorovom vozidle.

Pred použitím masážneho prístroja sa poraďte so svojim lekárom, a to predovšetkým

- ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu na hornej časti tela,
- ak používate kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky,
- pri trombózach,
- pri diabete,
- pri bolestiach neznámeho pôvodu.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uchovajte tento návod na použitie a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

Zásah elektrickým prúdom

▲ VÝSTRAHA

S týmto masážnym prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto prístroj

- prístroj používajte len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom zdroji,
- nikdy nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenia,
- nepoužívajte počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania. Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj uchopením za sieťový kábel. Udržiavajte odstup medzi káblami a teplými povrchmi. Kábel neprichytávajte, nelámte alebo nepretáčajte. Nezapichujte ihly alebo ostré predmety.

Uistite sa, že masážny prístroj, vypínač, sieťový zdroj a kábel neprichádzajú do styku s vodou, parou alebo inými tekutinami. Prístroj používajte len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, saune).

V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo viditeľne poškodené. Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.

Oprava

▲ VÝSTRAHA

- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru

▲ VÝSTRAHA

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto návodu na použitie hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto masážny prístroj nikdy

- nezakrývajte, napr. dekou, vankúšom a pod.,
- nepoužívajte v blízkosti benzínu ani iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia

⚠ POZOR

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.

- Do otvorov prístroja nezasúvajte žiadne predmety a nič nekladajte do rotujúcich častí. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
- Dbajte na to, aby sa vám pri používaní do rotačných nastavcov nezachytili vlasy. Pre vlastnú bezpečnosť si vlasy uchyťte gumičkou.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Nastaviteľné pútko na ruku
- 2 Tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť
- 3 Masážne valčeky
- 4 Sieťový zdroj

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Odstráňte obal.
- Skontrolujte, či prístroj, sieťový zdroj so zástrčkou alebo kábel nie sú poškodené.
- Zasuňte pripojovací konektor do zdierky v masážnom prístroji.
- Kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.

7. POUŽÍVANIE

Masážny prístroj opatrne pritlačte na časť tela, ktorú chcete masírovať.

Masáž prerušte alebo zmeníte polohu alebo prítlak, ak je pre vás bolestivá alebo nepríjemná.

Nedávajte ani nepricvikujte žiadnu časť vášho tela, predovšetkým prsty, medzi rotujúce masážne valčeky.

Ovládanie stlačením tlačidla ZAP./VYP./ tlačidla rýchlosti **2**:

- 1.-krát: Prístroj sa zapne, masážne valčeky sa začnú otáčať
- 2.-krát: Prístroj sa prepne na rýchlejší rýchlostný stupeň
- 3.-krát: Prístroj sa vypne, použitie sa ukončí.

i Upozornenie

- Masážny prístroj používajte max. 15 minút. Pri dlhšej masáži môže priveľká stimulácia svalov viesť k preťaženiu namiesto uvoľnenia.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

⚠ VÝSTRAHA

- Pred každým čistením vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky a odpojte ho od prístroja.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Masážne valčeky môžete odobrať tak, že za ne silno potiahnete. Masážny nadstavec je možné čistiť jemnou kefkou pod tečúcou vodou a trochou prostriedku na umývanie riadu. Prístroj môžete čistiť mäkkou a mierne navlhčenou utierkou.
- Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

Uskladnenie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zafarbenia.

9. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Sieťový adaptér (EÚ) Č. výr. 110.167

Sieťový adaptér (UK) Č. výr. 110.166

10. LIKVIDÁCIA

⚠ POZOR

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie zo siete: Vstup Výstup	100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A 10,0 V === 1,2 A, 12 W
Priemerná efektivita v prevádzke	≥ 83,59 %
Stupeň účinnosti pri nízkom zaťažení (10 %)	≥ 78,47 %
Príkon pri nulovom zaťažení	≤ 0,072 W
Rozmery	cca

Hmotnosť	Hlavní přístroj: 172,5 g Masážne valčeky: 51,0 g Adaptér: 103,0 g
----------	---

12. ZÁRUKA A SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené

104.43_CM51_2024-07-16_01_IM2_BEU_CS_SK



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com

