

beurer SC 30

Green Planet




- CS** Elektrický zubní kartáček
Návod k použití 5
- SK** Elektrická zubná kefka
Návod na použitie 11







A

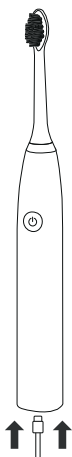


B

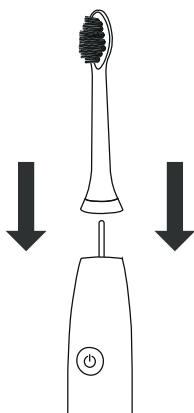


C

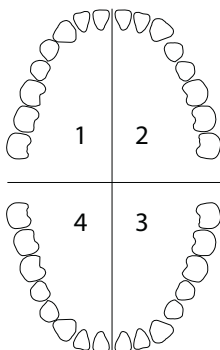

D

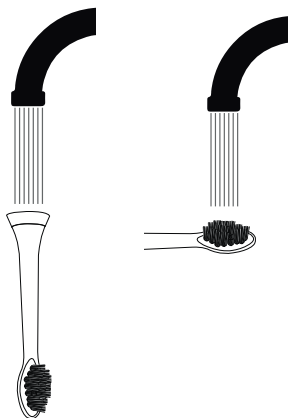

E

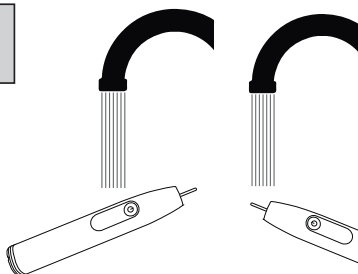



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

OBSAH

1. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5
2. Obsah balení	6
3. Vysvětlení symbolů.....	7
4. Použití v souladu s určením.....	8
5. Popis přístroje.....	8
6. Použití.....	8
6.1 Příprava použití	8
6.2 Zahájení používání	9
6.3 Cestovní pojistka	9
7. Čištění a údržba	9
8. Příslušenství a náhradní díly	9
9. Likvidace	9
10. Technické údaje.....	10
11. Záruka	10

1. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

- Přístroj a nabíjecí kabel chraňte před vodou a jinými kapalinami.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti umyvadla nebo vany naplněné vodou.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

- Příklad nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, musíte nabíjecí kabel zlikvidovat.
- Používejte pouze nabíjecí kabel USB-C dodávaný s přístrojem.
- Příklad se síťovým adaptérem nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy nebo jiných nádob s vodou či jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Příklad se smí nabíjet pouze pomocí síťového adaptéru (není součástí balení) s výstupem bezpečného velmi nízkého napětí 5 V a max. 1 A.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

⚠ POZOR

- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Baterie se musí před použitím správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte baterii (viz kapitola „Příprava použití“).
- Pro dosažení co nejdelší životnosti nabíjejte baterii plně minimálně 2krát za rok.

2. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností

přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 elektrický zubní kartáček
- 2 kartáčkové hlavice
- 1 nabíjecí USB kabel
- Návod k použití

3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

ÚPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o produktu

Upozornění na důležité informace



Čtete pokyny



Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.



Standard nezávislé certifikace recyklovaného materiálu



Značka CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka



Značka posouzení shody pro Velkou Británii



Přístroj třídy ochrany III

	Symbol dovozce
	Výrobce
	Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. Zařízení lze ponořit do hloubky 1 metru až na 30 minut.
	USB-C
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Obal z recyklovaného materiálu

4. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj používejte výhradně k čištění zubů u lidí. Přístroj nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let! Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1** Kartáčková hlavice
- 2** Vypínač/tlačítko režimu
- 3** Kontrolka LED
 - 4 režimů: Clean, White, Polish, Gum Care
 - Stav nabití baterie
- 4** Nabíjecí USB kabel

6. POUŽITÍ

6.1 Příprava použití

Nabíjení elektrického zubního kartáčku **A**

Před prvním použitím elektrický zubní kartáček plně nabijte. Postupujte takto:

1. Připojte nabíjecí kabel USB-C k elektrickému zubnímu kartáčku. Zapojte nabíjecí USB kabel do USB portu nebo vhodného síťového adaptéru a adaptér zapojte do zásuvky.
2. Během procesu nabíjení bliká kontrolka LED červeně. Jakmile je elektrický zubní kartáček plně nabitý, svítí kontrolka LED nepřetržitě zeleně.

Nasazení kartáčkové hlavice **B**

Nasadte kartáčkovou hlavici **1** shora na přístroj tak, aby pevně zaklapla. Dbejte na to, aby kartáčková hlavice **1** ukazovala stejným směrem jako vypínač/tlačítko režimu **2**.



Štětiny s indikátorem

Štětiny s indikátorem časem ztrácejí barvu v závislosti na individuálním používání a ukazují tak optimální okamžik pro výměnu kartáčkové hlavice **1**.

Doporučujeme vyměnit kartáčkovou hlavici **1** po 3 měsících. Pokud jsou štětiny kartáčkové hlavice opotřebené nebo roztřepené, může být nutné měnit je častěji.

6.2 Zahájení používání

1. Pro zapnutí elektrického zubního kartáčku, stiskněte krátce vypínač/tlačítko režimu **2**. Každých 30 sekund **C** se provoz elektrického zubního kartáčku krátce přeruší, aby vám připomněl, že stejně dlouho se musí čistit všechny 4 zubní kvadranty. Elektrický zubní kartáček je vybaven automatickým časovačem a po 2 minutách dvakrát zavibruje. Zubní kartáček se po 6 minutách automaticky vypne.
2. Dlouhým stisknutím vypínače/tlačítka režimu **2** zvolte požadovaný režim. Aktuálně zvolený režim je signalizován příslušnou kontrolkou LED pro příslušný režim. K dispozici jsou tyto režimy:

Clean	Pro každodenní čištění
White	Pro bělejší zuby
Polish	K odstranění povrchového zabarvení
Gum Care	Pro péči o dásně

3. Pro předčasné přerušení aplikace stiskněte krátce vypínač/tlačítko režimu **2**.

6.3 Cestovní pojistka

Cestovní pojistka zabrání nechtěnému zapnutí přístroje (např. v kufru na cestách).

1. Cestovní pojistka se aktivuje stisknutím vypínače/tlačítka režimu **2** na 5 sekund. Během aktivace kontrolka LED 5krát blikne zeleně.
2. Pokud krátce stisknete vypínač / tlačítko režimu **2** v zajištěném stavu, kontrolka LED rovněž blikne zeleně.
3. Cestovní pojistka se deaktivuje stisknutím vypínače/tlačítka režimu **2** opět na 5 sekund. Během deaktivace svítí kontrolka LED stále zeleně. Jakmile je cestovní pojistka deaktivována, kontrolka LED zhasne. Přístroj se spustí.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj a hlavici kartáče vyčistěte **1** po každém použití. Postupujte takto:

1. Vytáhněte kartáčkovou hlavici **1** směrem nahoru.
2. Očistěte kartáčkovou hlavici **1** pod tekoucí vodou. Dbejte na to, abyste vyčistili také vnitřek kartáčkové hlavy **1**. **D**
3. Přístroj čistěte pod tekoucí vodou. Nenamáčejte ovšem přístroj pod vodu. Do přístroje by se mohla dostat voda a poškodit ho. **E**

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	Číslo výrobku nebo objednací číslo
Kartáčkové hlavice Classic Clean 4 ks	105.21
Kartáčkové hlavice Premium Whiten 4 ks	105.31
Kartáčkové hlavice Premium Plaque Eraser 4 ks	105.22
Kartáčkové hlavice Premium Protection Plus 4 ks	105.23

9. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám po-



skytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách zvláštního odpadu nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.



Vyjmutí baterie

1. K otevření elektrického zubního kartáčku použijte šroubovák. Zasuňte šroubovák do otvoru USB-C.
2. Nyní otočte lehkým tlakem proti směru hodinových ručiček. Krytku zubního kartáčku lze nyní sejmut.
3. Odklopte spodní část zubního kartáčku na stranu.
4. Vytáhněte vnitřní kryt zubního kartáčku.
5. Vyjměte baterii z vnitřního krytu.
6. Baterii zlikvidujte zvlášť ve speciálně označených sběrných nádobách, ve sběrných zvláštního odpadu nebo u prodejců elektrotechniky,

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	SC 30
Rozměry	Přístroj: 183 x 29 mm
Hmotnost	Přístroj: 119 g (zubní kartáček + 2 kartáčkové hlavice)
Baterie: Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	600 mAh 3,7 V Lithium-iontová baterie
Napájení	5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

Technické změny vyhrazeny

11. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	11
2. Obsah balenia	13
3. Vysvetlenie symbolov.....	13
4. Účel použitia.....	14
5. Popis prístroja.....	14
6. Použitie	15
6.1 Príprava na použitie	15
6.2 Začiatok používania	15
6.3 Cestovná poistka	15
7. Čistenie a starostlivosť	15
8. Príslušenstvo a náhradné diely	16
9. Likvidácia.....	16
10. Technické údaje.....	16
11. Záruka	17

1. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VAROVANIE

- Prístroj a nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
- Prístroj nedávajte do blízkosti umývadla alebo vane naplnenej vodou.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo ak nefunguje správne. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
- Ak je sieťový prírodný kábel poškodený, musí sa nabíjací kábel zlikvidovať.
- Používajte len nabíjací kábel USB-C dodaný s prístrojom.
- Nikdy nepoužívajte prístroj so sieťovým adaptérom v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
- Prístroj sa smie nabíjať iba pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou obsahu balenia) s výstupom bezpečnostného nízkeho napätia 5 V a max. 1 A.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

⚠ VAROVANIE

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nehádzte do ohňa.
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvtite.

⚠ POZOR

- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačky uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu „Príprava na použitie“).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora ho úplne nabite aspoň 2-krát do roka.

2. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 elektrická zubná kefka
- 2 kefkové hlavice
- 1 USB-C nabíjací kábel
- Návod na použitie

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o výrobku

Odkaz na dôležité informácie



Prečítajte si pokyn



Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.



Štandard na nezávislú certifikáciu recyklácie materiálu



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón

	Značka hodnotenia zhody pre Veľkú Britániu
	Trieda ochrany III
	Symbol importéra
	Výrobca
	Ochrana pred krátkodobým ponorením. Prístroj je možné ponoriť do hĺbky 1 metra až na 30 minút.
	USB-C
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Obal z recyklovaného materiálu

4. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj používajte výlučne na čistenie zubov u ľudí. Prístroj nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre osoby do 8 rokov! Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1** Kefková hlavica
- 2** Tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu
- 3** LCD displej

4 Svetiaci krúžok

Kontrola prítlaku

Červený svetiaci krúžok: príliš vysoký prítlak

Biely svetiaci krúžok: prítlak ok

5 Nabíjacia stanica

- 1** Kefková hlavica
- 2** Tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu
- 3** LED indikátor
 - 4 režimov: Clean, White, Polish, Gum Care
 - Stav akumulátora
- 4** USB-C nabíjací kábel

6. POUŽITIE

6.1 Príprava na použitie

Nabíjanie elektrickej zubnej kefy **A**

Pred prvým použitím elektrickú zubnú kefku úplne nabite. Postupujte pritom nasledovne:

1. Zastrčte USB nabíjací kábel indukčnej nabíjacej stanice **5** do USB portu alebo do vhodného sieťového adaptéra s USB prípojkou  triedy ochrany 2 **□** (nie je súčasťou obsahu balenia) a zapojte ho do zásuvky.
2. Počas nabíjania pulzuje LED načerveno. Keď je elektrická zubná kefka úplne nabitá, svieti LED trvalo nazeleno.

Nasadenie kefkovej hlavice **B**

Kefkovú hlavicu nasadíte **1** zhora na prístroj, kým pevne nezapadne. Dbajte na to, aby kefková hlavica **1** smerovala rovnakým smerom ako tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**.



Indikačné štetiny

Indikačné štetiny časom strácajú svoju farbu v závislosti od individuálneho používania a ukazujú tak optimálny čas na výmenu kefkovej **1** hlavice.

Odporúčame, aby ste kefkovú hlavicu vymieňali **1** po 3 mesiacoch. Ak sú štetiny kefkovej hlavice opotrebované alebo rozstrapkané, pravdepodobne sa musia vymieňať častejšie.

6.2 Začiatok používania

1. Na zapnutie elektrickej zubnej kefy krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**. Elektrická zubná kefka sa nakrátko zastaví každých 30 sekúnd, aby vám pripomenula, aby ste rovnako dlho čistili všetky 4 štvrtiny čeluste **C**. Elektrická zubná kefka má automatický časovač a po 2 minútach dvakrát zavibruje. Po 6 minútach sa zubná kefka automaticky vypne.
2. Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/režimu **2** vyberte požadovaný režim. Aktuálne zvolený režim sa zodpovedajúco zobrazí pomocou LED. K dispozícii máte nasledujúce režimy:

Clean	Na denné čistenie
White	Pre bielejšie zuby
Polish	Na odstránenie povrchových sfarbení
Gum Care	Na starostlivosť o ďasná

3. Na predčasné prerušenie použitia krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2**.

6.3 Cestovná poistka

Cestovná poistka zabráni tomu, aby sa prístroj úmyselne zapol (napr. na ceste v kufri).

1. Na aktivovanie cestovnej poistky podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2** stlačené 5 sekúnd. Počas aktivácie LED 5-krát blikne nazeleno.
2. Ak krátko stlačíte tlačidlo ZAP/VYP/režim **2** v zamknutom stave, LED taktiež zabliká nazeleno.
3. Na deaktivovanie cestovnej poistky znovu podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu **2** stlačené 5 sekúnd. Počas deaktivácie svieti LED nepretržite nazeleno. Po deaktivovaní cestovnej poistky LED zhasne. Prístroj sa spustí.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Po každom použití vyčistite prístroj a kefkovú hlavicu **1**. Postupujte pritom nasledovne:

1. Vytiahnite kefkovú hlavicu **1** smerom nahor.

2. Kefkovú hlavicu vyčistíte **1** pod tečúcou vodou. Dbajte na to, aby ste vyčistili aj vnútornú časť kefkovej hlavice **1**. **D**
3. Prístroj čistíte pod tečúcou vodou. Prístroj neponárajte do vody. Do prístroja môže vniknúť voda a poškodiť ho. **E**

8. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Kefkové hlavice Classic Clean 4 ks	105.21
Kefkové hlavice Premium Whiten 4 ks	105.31
Kefkové hlavice Premium Plaque Eraser 4 ks	105.22
Kefkové hlavice Premium Protection Plus 4 ks	105.23

9. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinní akumulátory zlikvidovať.

Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,

Hg = batéria obsahuje ortuť.



Odstránenie akumulátora

1. Na otvorenie elektrickej zubnej kefy použite skrutkovač. Zasuňte skrutkovač do otvoru USB-C.
2. Teraz otočte miernym tlakom proti smeru hodinových ručičiek. Koncový uzáver zubnej kefy sa teraz dá oddeliť.
3. Vyklopte dno zubnej kefy nabok.
4. Vytiahnite vnútorné teleso zubnej kefy.
5. Vyberte akumulátor z vnútorného telesa.
6. Akumulátor zlikvidujte prostredníctvom špeciálne určených zberných nádob, zberní na špeciálny odpad alebo predajcov elektroniky.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	SC 30
Rozmery	Prístroj: 183 x 29 mm
Hmotnosť	Prístroj: 119 g (zubná kefka + 2 kefkové hlavice)

Akumulátor: Kapacita Menovité napätie Typové označenie	600 mAh 3,7 V Lítiovo-iónová batéria
Napájanie	5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Technické zmeny vyhradené

11. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

