


Kompaktní ústní sprcha

Návod k obsluze

WT 3100

Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

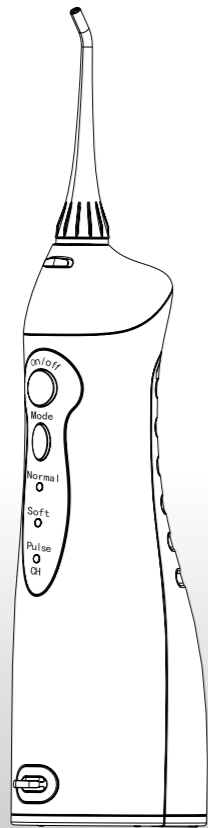

CZ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace v této části jsou určeny pro správné a bezpečné používání přístroje bez nebezpečí zranění uživatele či jiných osob a bez rizika poškození majetku.

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nesmějí používat malé děti a osoby nezpůsobilé k jeho ovládní. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Sami přístroj neupravujte, nerozebírejte, neopravujte.
- Nepokládejte přístroj na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla či vany.
- Spadne-li přístroj při nabíjení do vody, nedotýkejte se ho. Okamžitě ho odpojte.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.

UPOZORNĚNÍ


- Děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí ústní sprchu používat pouze pod dohledem.
- Se zařízením si nesmějí hrát děti. Přístroj se smí používat pouze s napájecí jednotkou dodanou v jeho příslušenství.
- Před likvidací musí být z přístroje odstraněny baterie.
- Při výměně baterie musí být přístroj odpojený od napájení. Baterie likvidujte bezpečně.
- Přístup k baterii je popsán v odstavci Likvidace na straně 4.
- Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Nepoužívejte napáječ s poškozenými šňůrami či konektory.
- Chraňte šňůry před horkými předměty.
- Nepoužívejte přístroj bez trysky.
- Při umývání přístroj nesmíte ponořit.
- Používejte přístroj výhradně k čištění ústní dutiny.
- Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě ji může polknout a hrozí uvíznutí v krku.
- Některé ústní vody mohou poškodit přístroj, zejména zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vody.
- Přístroj nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní a v takových případech je třeba jeho používání konzultovat s lékařem.
- Netlačte trysku na zuby a dásně příliš silně. Může tím dojít k poškození dásní.

Před použitím výrobku si přečtěte celý návod. Návod si dobře uložte.

-2-

TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE

Součásti zařízení

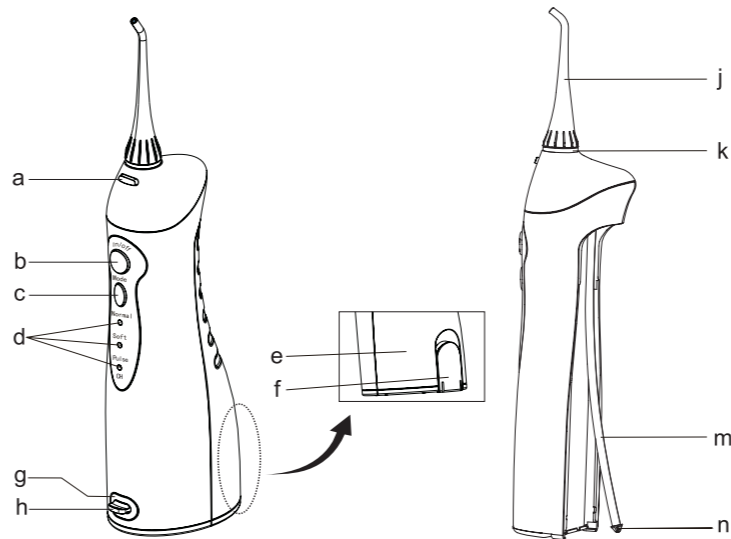

- a. Uvolňovací tlačítko
- b. Vypínač
- c. Volič režimu
- d. Indikátor režimu
- e. Zásobník na vodu
- f. Krytka zásobníku na vodu

- g. Základna
- h. Krytka základny
- j. Tryska
- k. Kroužek spojky
- m. Sací trubička
- n. Filtr

Poznámka:

Při prvním použití můžete v některých částech přístroje (v zásobníku, hadičce aj.) zjistit nepatrné zbytky vody. Jde o destilovanou vodu, která se používá ke kontrole funkčnosti výrobku a není zdraví škodlivá.

-3-


Způsob použití

Nabíjení (obr. 1)

1. Otevřete krytku základny a do přípojky zapojte konektor nabíječky. Pod krytkou nesmí být ani stopa vlhkosti.
2. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky.
3. Indikátor CH během nabíjení bliká. Po nabití nepřerušovaně svítí.
4. Po nabití zavřete krytku základny.

Poznámka:


Během a po dokončení aplikace ústní sprchy indikátor CH bliká. Znamená to, že baterii je třeba dobít. Úplné dobíjení trvá osm hodin.

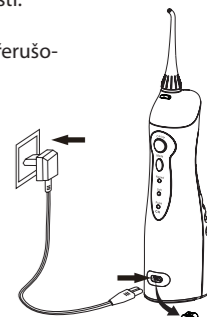


Obr. 1

Použití ústní sprchy

1. Nasadte na přístroj trysku (obr. 2).
2. Otevřete krytku zásobníku, naplňte jej vodou o teplotě do 40 °C a krytku zavřete (obr. 3).
3. Nebo vysuňte z přístroje zásobník, naplňte jej vodou o teplotě do 40 °C a zasuňte (obr. 4).
4. Tlačítkem Mode vyberte potřebný funkční režim. Režim lze měnit i v průběhu ostříkování (obr. 5).
5. **Normal:** normální čištění
Soft: jemné čištění citlivých dásní
Pulse: čištění dásní s masáží
Přístroj držte svisle s tryskou namířenou na zuby.
6. Ústa mějte pootevřená, aby voda mohla vytékat.
7. Vypínačem spusťte ostříkování (obr. 6).

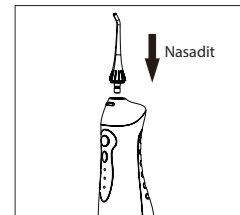


Obr. 2

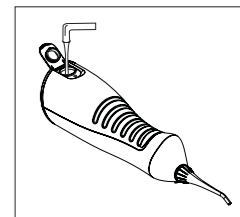


Obr. 3

-4-


- Miřte tryskou kolmo na zuby a dásně.
 - Pomalou přesouvejte proud po zubech.
 - Miřte tryskou kolmo na dásně a ostříkejte linii dásní.
 - Důkladně ostříkejte mezizubní prostory a okolí rovnátek, korunek a můstků.;
- Vypínačem přístroj vypněte, kroužkem spojky uvolněte trysku a podle potřeby ji vyměňte (obr. 7).
 - Po skončení celé aplikace přístroj vypínačem opět vypněte.

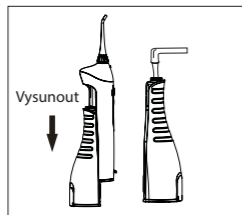


Obr. 4

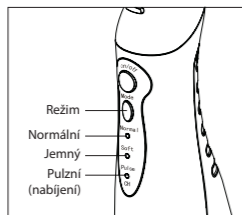

Obr. 5

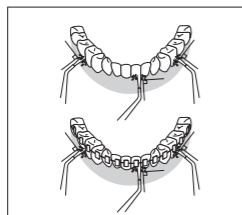


Obr. 6

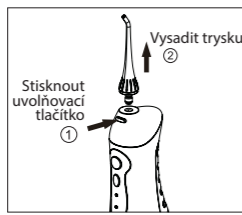

Obr. 7

Po použití (obr. 8)

- Otevřete krytku zásobníku.
- Vypínačem přístroj zapněte a nechte vytéct vodu ze zásobníku.
- Vypínačem přístroj vypněte a zavřete krytku zásobníku.
- Otřete přístroj suchou utěrkou.

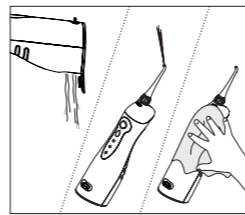

Obr. 8

Poznámka:

Přístroj vždy zbavte veškeré vody, aby se v něm nemohly množit bakterie. Pokud chcete přístroj odložit na delší dobu, důkladně ho vyčistěte a vysušte.

Údržba

K čištění přístroje používejte vodu nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte abrazivní a žíravé prostředky (např. ocet či odvápnovače). Mohou přístroj poškodit. K mytí používejte vodu o teplotě do 50 °C. Chraňte zařízení před horkými předměty a přímým slunečním světlem.

Hlavní jednotka

- Přístroj otřete utěrkou zvlhčenou mýdlovým prostředkem a pak ho suchou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Hlavní jednotka se nesmí umývat ponořená.
- Po omytí přístroj otřete do sucha.

Krytka zásobníku na vodu

Utěrkou otřete z krytky případné nečistoty.

Tryska

- Trysky omyjte vodou a pak je měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Každých šest měsíců trysku vyměňte.

Sací trubička

- Trubičku omyjte vodou a pak ji měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Trubičku neohýbejte, netahejte za ni ani jí nekrtejte.

Nádoba


- Trysky omyjte vodou a pak je měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Před odstavením na delší dobu zásobník osušte.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Koupili jste výrobek, který nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nechte jej alespoň 8 hodin nabíjet.
Přístroj i po dobití funguje jen několik minut.	Končí životnost baterie.	Obraťte se na servisní středisko.
	Doba nabíjení nebyla dostatečná.	Nechte přístroj nabíjet alespoň 8 hodin.
Tlak vody je velmi nízký.	Tryska je zanesená nečistotami.	Vyměňte trysku.
	Tryska je zdeformovaná.	
	Filtr je zanesený nečistotami.	Vyčistěte filtr.
Nestříká voda.	Zásobník je prázdný.	Naplňte zásobník.
	Přístroj je za chodu příliš nakloněný.	Držte přístroj ve svislé poloze.



Likvidace

Dobíjecí baterie z přístroje je recyklovatelná. Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje dále popsaným způsobem. Dbejte přitom na ochranu zraku, rukou, prstů a pracovní plochy.

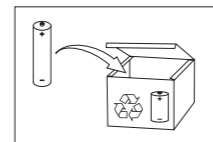


- Vyjměte ze spodku přístroje 2 gumové opěrky – ① na obr. 9.
- Šroubovákem proti směru hodinových ručiček uvolněte spodní kryt – ② na obr. 9.
- Vysuňte z přístroje zásobník a vyšroubujte 2 šrouby vedle sací trubičky (obr. 10).
- Otevřete horní kryt a vyndejte vnitřní část přístroje. Poté z vnitřní části vyšroubujte všechny šrouby (obr. 11).
- Odpojte kabel baterie a vyndejte baterie z vnitřní části (obr. 12).

S případnými dotazy k recyklaci odpadu se obraťte na místní správu.

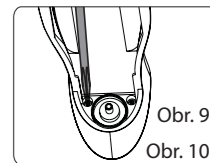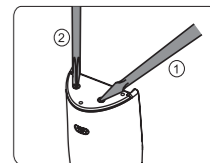


Obr. 9

Obr. 10

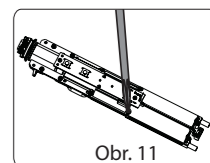

Obr. 11

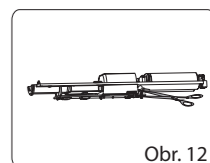

Obr. 12

Kontakty:
Distributor pro ČR a SR:
Best Brands Company, s.r.o.
Karlova 344, Velim 281 01
info@bbcomp.cz
www.doctor-mayer.cz
nebo www.bbcomp.cz

