


NÁVOD K POUŽITÍ

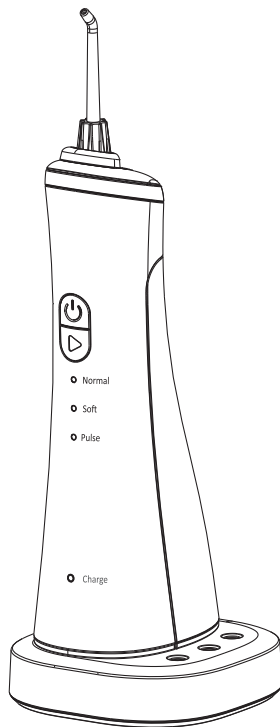

CZ

Ústní sprcha WT3500

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÁ BEZBEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí

1. Nepoužívejte tento výrobek pokud nerozímáte funkci a bezpečnostní pokyny aby jste se vyhnuli nebezpečí úrazu
2. Tento výrobek používejte pouze v souladu s jeho určením tak, jak popisuje tento návod na použití.
3. Nerozebírejte tento přístroj a ne mněte jeho komponenty aby jste se vyhli úrazu elektrickým proudem.
4. Ne nalejvejte do nádrže vodu která je teplejší než 40 ° C pro orální čištění aby jste se vyhli nebezpečí zranění.
5. Odpojte přístroj od el.sítě a vytáhněte ho z vody v případě ž spadl během plnění.
6. Vyměňte nabíječku v případě že je kabel nebo vidlice poškozená.
7. Přístroj je zakázáné ohřevát, používat, nabíjet nebo skladovat na místech s vysokou teplotou.

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek není určen pro používání dětmi. Osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi mohou používat tento výrobek pod dohledem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí riziku souvisejícím s jeho používáním. Dbejte na to, aby děti nepoužívaly přístroj na hraní.

POZOR

1. Tento výrobek používejte pouze v souladu s jeho určením tak, jak popisuje tento návod na použití.


2. V případě že jste měl/a orální operaci za posledních 2 měsíce poradte se se svým lékařem před použitím tohoto přístroje.
3. Netiskněte na dásně nebo na zuby tryskou přílišnou silou, aby nedošlo ke zranění dásní.
4. Neponorujte spotřebič do vody, abyste předešli poruchám nebo požáru, úrazu elektrickým proudem a výbuchu.
5. Nepřipojujte ani neodpojujte mokřýma rukama.
6. Ujistěte se, že výstupní napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku s nominálními charakteristikami.
7. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou nabíječkou, kabelem , zástrčkou , po selhání spotřebiče, pokud byl nějakým způsobem poškozen nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisního střediska pro kontrolu, opravu nebo úpravu.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
9. Nečistěte trysku, páčku, nabíječku, zásobník na vodu a víko v myčce nebo v mikrovlnné troubě.
10. Nepoužívejte jiné příslušenství než doporučené výrobcem.
11. Před údržbou vypněte spotřebič.
12. Nabíječku nepoužívejte venku nebo v blízkosti horkých povrchů.

POZNÁMKA

1. Nepoužívejte přístroj bez připojené trysky.


2. Neplňte zásobník ústní vodou, která může vést k korozi zařízení. Vždy čistěte nádrž čistou vodou po použití ústní vody!
3. Pokud podstupujete léčbu jakéhokoliv onemocnění ústní dutiny, poraďte se před použitím tohoto výrobku se zubním lékařem.
4. Uložte tyto pokyny.

VÁŠE PŘENOSNÁ ÚSTNÍ SPRCHA

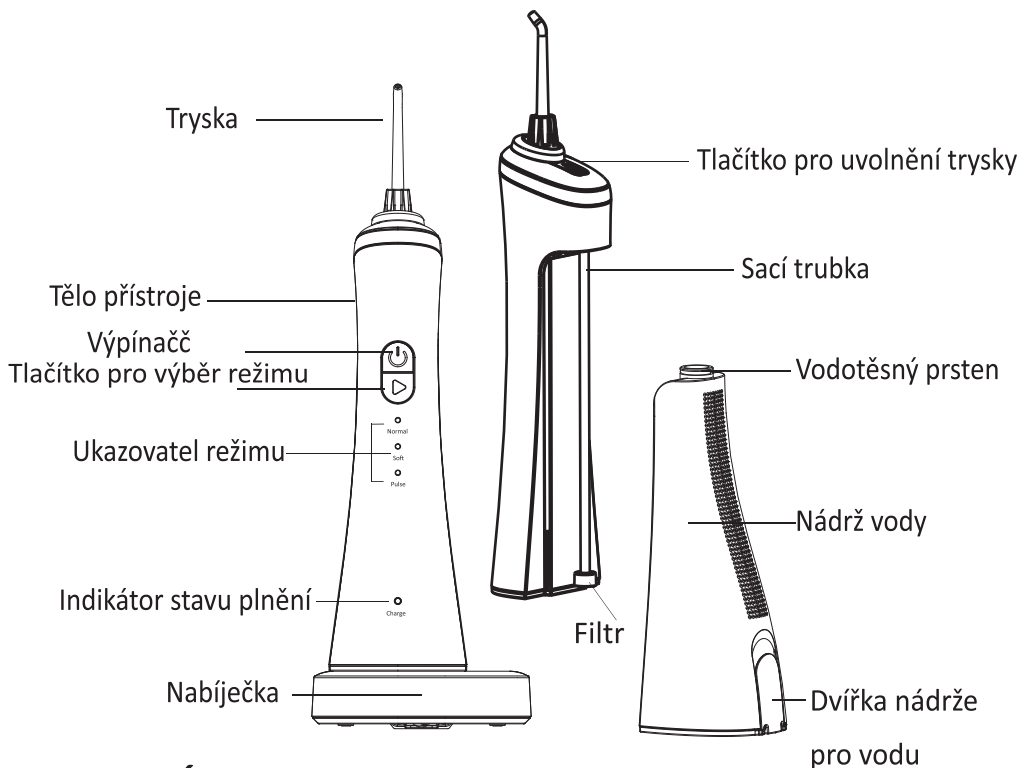


PRACOVNÍ POKYNY

1. Před zahájením práce zkontrolujte a ujistěte se, že jsou vaše ruce suché, a potom připojte spotřebič k napájecímu zdroji.

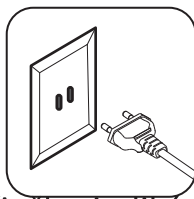



2. 1. Vložte přístroj do nabíječky, indikátor nabíjení během nabíjení bliká. Když je jednotka plně nabitá, svítí indikátor nabíjení nepřetržitě. Spotřebič nabíjejte 24 hodin před prvním

použitím.

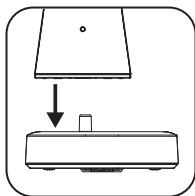


POZNÁMKA: Jednotka musí být nabitá, pokud indikátor nabíjení bliká před nebo po použití

3. Vyměňte jednotku z nabíječky a vložte trysku do přístroje.
Pokud je třeba vyjmout trysku, můžete stisknout uvolňovací tlačítko pro trysku.

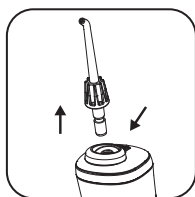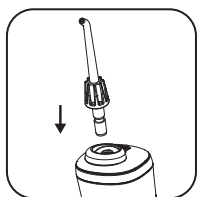

4. Naplňte nádrž vody vodou dvěma způsoby,
jak je znázorněno níže:

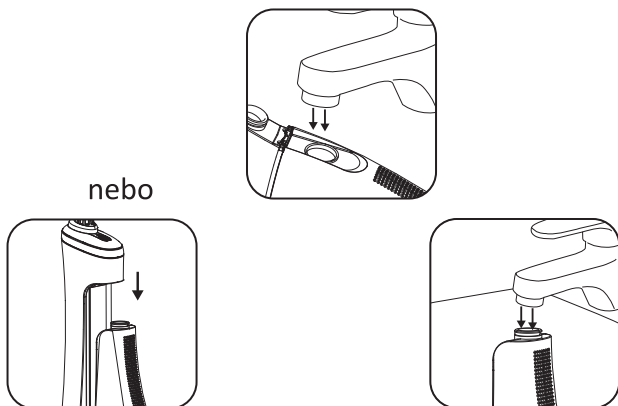

1. Pomocí "tlačítka režimu" zvolte požadovaný režim. Existují tři režimy - "Normal", "Soft" a "Pulse" - můžete stisknout tlačítko "Mode" pro přepínání mezi režimy během provozu.


A. Normální: Pro normální čištění zubu.

B. Měkký: pro citlivé zuby a pro začátečníky, kteří potřebují pouze jemnou práci.

C. Pulzující: Masírovat dásně pro zlepšení krevního oběhu a zpevnění zubů.



NAPOMENA: Ako prvi put koristite ovaj ispirać, birajte mekani način rada nedelju dana, a kada se prilagodite, možete koristiti drugi režim koji vam se sviđa. **POZNÁMKA:** Pokud používáte tento přístroj poprvé, vyberte režim Měkký na týden a po zvyknutí můžete použít jiný režim, který se Vám líbí.

1. Držte sprchu ve svslé poloze a vložte trysku do úst směrem na zuby a dásně a ústa mějte stále pootevřená, aby voda mohla odtékat do umyvadla.

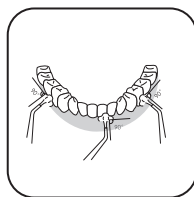


1. Zapněte jednotku a věnujte pozornost dalšímu:


- A. Proud vody se bude pohybovat přímo na zuby nebo dásně.
B. Pomalu pohybujte trysku podél zubů a vyčistěte je.
Nepoužívejte přímý proud vody na periodontální kapsy.

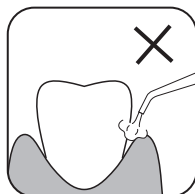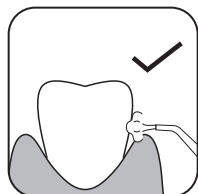

2. Po ukončení provozu vypněte spotřebič stisknutím spínače.
Po 2 minutách provozu zařízení se automaticky vypne.
Chcete-li pokračovat v činnosti, stiskněte opět přepínač.
3. Po dokončení práce můžete odstranit zbývající vodu podle následujících pokynů:

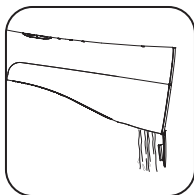

- A. Stiskněte spínač a jednotka začne pracovat, aby automaticky odstranila zbývající vodu

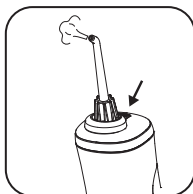

- B. Opětovným stisknutím spínače vypněte trysku a zavřete dvířka nádrže.
C. Otřete přístroj suchou tkaninou.



POZNÁMKA: Přístroj nesmí obsahovat zbytky vody, aby se zabránilo bakteriální infekci. Proto, pokud přístroj nebudete používat delší dobu, vysušte ho a uskladněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Očistěte přístroj čistou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem, ale nikdy nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředek, protože by poškodil přístroj a nepoužívejte vodu při teplotách vyšších než 50 ° C.

1. Vyčistěte tělo přístroje

- A. Tělo přístroje vyčistěte suchým nebo vlhkým hadříkem.
- B. Neponorujte přístroj do vody k čištění.

2. Vyčistěte nádrž na vodu

- A. Potřete vodní nádrž suchým nebo mokrým hadříkem nebo odpojte a opláchněte vodou.
- B. Vyprázdněte vodní nádrž úplně, pokud je nepoužíváte delší dobu.

3. Vyčistěte trysku

- A. Trysku otřete suchou nebo vlhkou utěrkou nebo odpojte a opláchněte vodou
- B. Neohýbejte ani netahejte trysku.

C. Vyměňte trysku každých 6 měsíců, abyste dosáhli optimálních výsledků.

4. Vyčistěte nabíječku

Osušte kovovou část konektoru suchým hadříkem každých 6 měsíců, aby nedošlo k akumulaci prachu, který může vést ke špatnému kontaktu.

REŠENÍ PROBLÉMŮ		
Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Přístroj se používá poprvé nebo nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nabíjete přístroj déle než 24 hodin.
Tlak vody je nízký.	Něco je zablokováno v trysce. Tryska je deformována.	Vyměňte trysku
Přístroj funguje jen krátce po plném dobití.	Filtr je zacpaný.	Vyčistěte filtr
	Vypršela životnost baterie.	Obraťte se na servisní oddělení
	Baterie není dobře naplněna.	Nabíjete baterii déle než 24 hodin před zahájením práce.
Při nabíjení indikátor nabíjení se nerozsvítí.	Zásuvka není dobře připojena.	Připojte zdroj napájení dobře.
	Poškození elektrického obvodu	Obraťte se na servisní oddělení

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU


Přístroj má recyklovatelnou baterii. Po uplynutí doby používání myčky vyjměte a poté jej recyklujte nebo likvidujte podle místních předpisů o likvidaci odpadu. Obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady, pokud máte jakékoliv dotazy.

ODDĚLTE VYMĚNOU BATERII

Nerozebirejte přístroj, pokud by neměl být zlikvidován, z důvodu poškození. Před vyjmutím baterie vypněte přístroj.


1. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je opotřebená. Chcete-li baterii vybit, stisknutím spínače aktivujte přístroj a nechte ho fungovat, dokud se automaticky nezastaví. Opakujte to několikrát, dokud nebude baterie prázdná.

2. Vyjměte nádržku na vodu a potom odšroubujte dva šrouby na spodním krytu pomocí šroubováku Phillips.

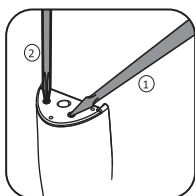


3. Vyšroubujte dva šrouby na horním krytu pomocí šroubováku Phillips, poté odpojte horní kryt a vyjměte jádro jednotky.

4. Odšroubujte šrouby na jádře zařízení pomocí šroubováku Phillips

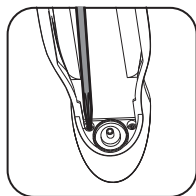


5. Uvolněte zástrčku baterie nůžkami a vyjměte baterii. partea centrală.

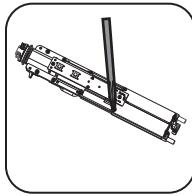

6. Baterii řádně recyklujte nebo likvidujte. obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady pro recyklaci ostatních součástí přístroje.

POZNÁMKA: Nevystavujte baterii zkratování a po vyjmutí akumulátoru nikdy neaktivujte přístroj.

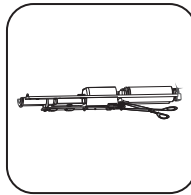

EKOLOGICKÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU



Můžete pomoci chránit životní prostředí!
Nezapomeňte dodržovat místní předpisy:
odevzdání nefunkčního elektrického
zařízení do příslušného střediska pro
zneškodnění odpadů.