


Stolní ústní sprcha

Návod k použití

WT 6000
Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

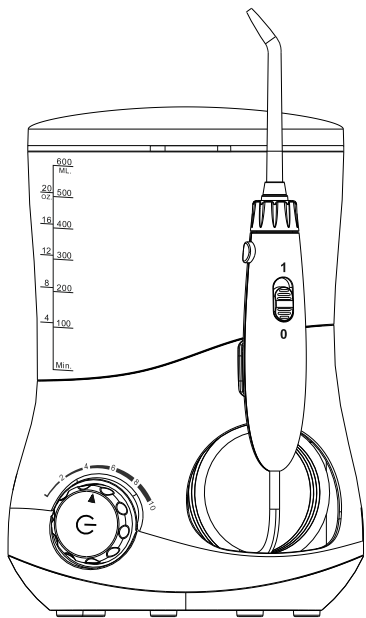

CZ

Součásti a příslušenství: Ústní sprcha (1 ks), napáječ (1 ks), standardní tryska (3 ks), čistící jazyka (1 ks), návod k použití (1 ks)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně a také nezranit sebe ani jiné osoby.

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nesmějí používat malé děti. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Dojde-li k poškození šňůry nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte.
- Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Zařízení se nesmí dostat do vody ani do jiné tekutiny.
- Zařízení nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla či vany.
- Přístroj nepoužívejte ve vaně.
- Spadne-li zařízení do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.


UPOZORNĚNÍ

- Děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zařízení používat pouze pod dohledem.
- Se zařízením si nesmějí hrát děti.
- Zařízení se smí používat pouze s napáječem dodaným v jeho příslušenství.
- Chraňte zařízení před horkými předměty.
- Používejte výhradně nástavce doporučené výrobcem.
- Zařízení nepoužívejte bez trysky.
- Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě jí může spolknout a hrozí uvíznutí v krku.
- Proudem vody nemířte na jazyk, do uší, nosu ani na jiná citlivá místa.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.
- Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Některé ústní vody mohou poškodit zařízení, a zejména zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vodu.
- Zařízení nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní, a v takových případech je třeba jeho užívání konzultovat s lékařem.
- Trysku přístroje nepřikládejte příliš blízko k zubům a dásním, mohlo by dojít k poškození dásní.
- Zařízení je určeno k použití v interiéru.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou.

TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

Ústní sprcha

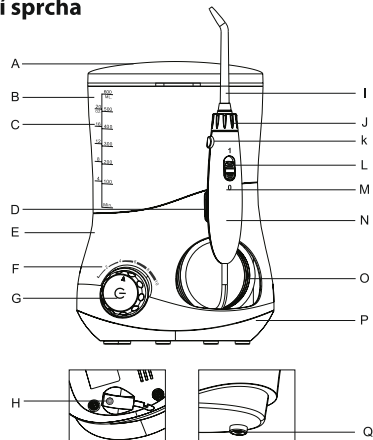

- A: Víko s poudrem na trysku
- B: Nádržka na vodu
- C: Značka plnění
- D: Úchyt aplikátoru
- E: Těleso zařízení
- F: Symbol regulace tlaku
- G: Hlavní ovladač (stiskem zapíná a vypíná) (otáčením reguluje tlak)
- H: Přípojka napájení
- I: Tryska

- J: Spojka trysky
- K: Uvolňovací tlačítko
- L: Funkční spínač
- M: Symbol vypínače
- N: Aplikátor
- O: Hadička
- P: Podstavec
- Q: Ventil zásobníku

Příslušenství



Mění se každých 6 měsíců


Mění se každé 3 měsíce

ZPŮSOB POUŽITÍ


ZAČÍNÁME

Postavte zařízení na rovnou podložku bez ostrých předmětů a zkontrolujte, zda je jeho šňůra suchá a nepoškozená. K napájení přístroje slouží síťový napáječ (vstup: 100–240 V, výstup 50/60 Hz 12 V, 1,5 A).


1. Zapojte konektor napáječe do přípojky na spodku podstavce. Síťovou zástrčku napáječe zapojte do sítě podle obr. 1.
2. Sundejte víko s poudrem.
3. Vyndejte zásobník a naplňte jej vodou o teplotě do 40 °C, bez jakékoliv soli, zubní pasty či jiných chemických prostředků. Nasadte a zatlačte zásobník do hlavní jednotky (obr. 2-1 a 2-2).

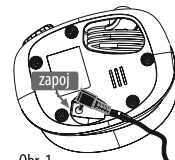

Obr. 1

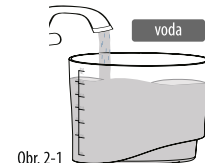

Obr. 2-1

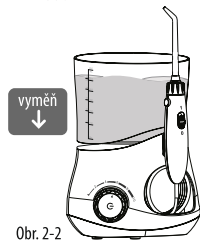


Obr. 2-2


Nasazení a vysazení aplikátoru

Nasazení trysky

Nasadte trysku na střed spojky do rukojeti aplikátoru. Při správném sesazení je doseknutí slyšitelné. Pro ověření pevného zamknutí zkuste trysku vytáhnout (obr. 3)

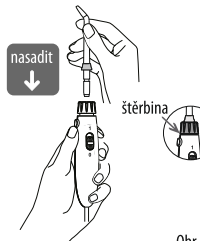

Obr. 3

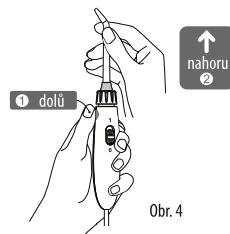

Obr. 4

Vysazení trysky




Stiskněte uvolňovací tlačítko na konci rukojeti a druhou rukou trysku opatrně vytáhněte (obr. 4).

Použití ústní sprchy




Poznámka:

Zařízení nezapínejte, dokud není tryska v ústech. Při použití si zpočátku nastavte nižší tlak a pak jej podle potřeby postupně zvyšujte.

- Uchopte aplikátor za rukojeť, namířte trysku do umyvadla a stiskem hlavního ovladače aplikátor zapněte (obr. 6).
- Otáčením hlavního ovladače upravte tlak vody a piepnutím funkčního spínače do polohy 0 zastavte proud vody (obr. 7-1 a 7-2).

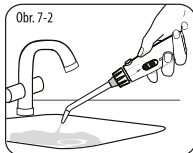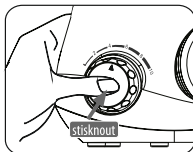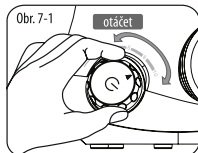

- Otáčením spojky trysky lze upravit směrování trysky.
- Nakloňte se nad umyvadlo, namířte trysku do úst a přesunem funkčního spínače do polohy 1 zapněte proud vody a přivírete ústa, aby voda nestříkala ven (obr. 8).
- Tryskou mířte kolmo na zuby a dásně (obr. 9).
- Pomalou přesouvejte proud vody po zubech. Proudění se krátce zastaví po 30 sekundách a připomene vám potřebu přesouvat proud po všech částech chrupu. Po jedné minutě se zastaví znovu jako upozornění na uplynutí doporučené doby použití. Přístroj pak poběží do uplynutí dvou minut nebo do vypnutí (obr. 10).

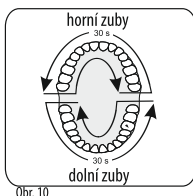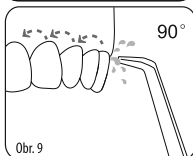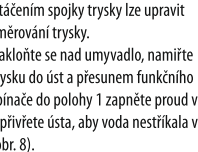



Možnosti ukončení

Ostříkávání může skončit:

- Automatickým vypnutím po **dvou minutách** chodu.
- Vypnutím pomocí hlavního ovladače.
- Vytažením šňůry ze sítě v případě nouze.

Po použití


- Vyndejte zásobník ze zařízení a vylejte zbytek vody.
- Přesuňte funkční spínač do polohy 1, vypusťte vodu ze zařízení a přepněte spínač zpět do polohy 0.
- Vypněte zařízení a otřete jej utěrkou do sucha (obr. 11).
- Stiskněte uvolňovací tlačítko, vysadte trysku a uložte ji do pouzdra na trysky (obr. 12).
- Odpojte napáječ.

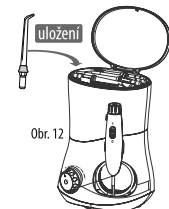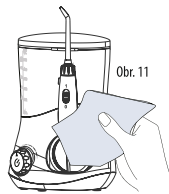

DOPORUČENÍ

Čistič jazyka

Při čištění jazyka zlehka přiložte čistič v ose jazyka asi uprostřed ústní dutiny. Začněte s malým tlakem vody a zvyšujte jej postupně, podle potřeby (obr. 13).

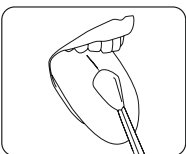


Ortodontická tryska

(samostatně prodávané příslušenství)

Ortodontická tryska je určena speciálně pro uživatele rovnátek. Umožňuje čistit rovnátka a místa, která jsou kvůli rovnátkům těžko přístupná.



- Tryskou mířte kolmo na zuby v linii kraje dásně a začínejte od poslední stoličky (zezadu).
- Pomalou pohybujte tryskou podél linie dásně s pozastavením na čištění kartáčkem mezi zuby a kolem rovnátka.
- Stejným způsobem očistěte přední i zadní stranu všech ostatních zubů (obr. 14).

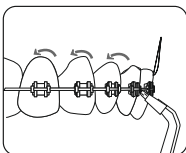

Tryska na periodontální kapsy (samostatně prodávané příslušenství)

Tryska na periodontální kapsy je určena k čištění periodontálních kapes. Při čištění těchto kapes je NUTNÉ nastavit na přístroji nejnižší tlak.

- Namířte měkkou špičku na zub v úhlu 45 stupňů, zvolna ji přiložte k okrajům dásně a vsuňte do kapsy (obr. 15).
- Zapněte přístroj a pohybem pod linií dásně dokončete ošetření (obr. 16).

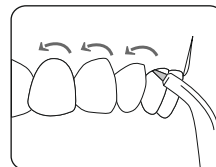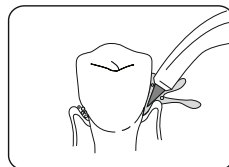

Poznámka:

Trysku je NUTNÉ používat s nastavením nejnižšího tlaku, protože špička se lahko poškodí.

ÚDRŽBA

K čištění zařízení používejte vodu nebo neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte žíravé a abrazivní prostředky (například ocet či odvípňovače). Mohou zařízení poškodit. K mytí používejte vodu do teploty 40 °C. Chraňte zařízení před horkými předměty a přímým slunečním světlem.

Hlavní jednotka

- Vyndejte zásobník a vylejte ze zařízení zbytek vody.
- Měkkou utěrkou s tekutým mýdlovým prostředkem zařízení omyjte a suchou utěrkou vytřete do sucha.
- Hlavní jednotka se nesmí umývat ponořená.

Rukojeť aplikátoru

- Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
- Hadičku neohýbejte, netahejte a nekruťte s ní.

Zásobník na vodu

- Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
- Zásobník před uložením přístroje dobře upevněte.

Trysky

- Trysky omyjte vodou a měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Trysky ukládejte do pouzdra.
- Standardní trysku a čistič jazyka vyměňte za nové po každých 6 měsících, ostatní aplikační nástavce měňte každé 3 měsíce.

Napáječ

Každých 6 měsíců otřete kovové části konektorů suchou utěrkou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Motor neběží.	Zkontrolujte správné zapojení vstupu a výstupu napáječe. Zkontrolujte, zda funguje výstup a zda je zařízení zapnuté.
Tlak vody je velmi nízký.	Tryska je zanesená.	Očistěte nebo vyměňte trysku.
	Tryska je zdeformovaná. Je zanesený ventil zásobníku.	Vyměňte trysku. Vycištěte ventil a naplňte zásobník čistou vodou.
Nestříká voda.	Zásobník je prázdný.	Naplňte zásobník.
	Tlak vody je pod mezi nejnižšího nastavení. Ventil zásobníku je zavřený.	Upravte tlak regulátorem. Dotlačte zásobník do správné polohy, proveďte montáž ventilu.
Zásobník teče.	Ventil je nefunkční. Ventil není správně nainstalován.	Vyměňte ventil zásobníku. Opravte instalaci ventilu.
Na trysce na periodontální kapsy se tvoří kapky.	Tryska je opotřebená.	Vyměňte trysku.

LIKVIDACE

Zařízení se smí rozebírat pouze pro účely likvidace. Rozebíráním se přístroj zničí. Před rozebíráním musí být zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.

Kontakty:

Distributor pro ČR a SR:
Best Brands Company, s.r.o.
Karlova 344, Velim 281 01
info@bbcomp.cz
www.doctor-mayer.cz
nebo www.bbcomp.cz

