

vitalpeak



ENG | Instruction manual
FR | Manuel d'utilisation

IT | Manuale di istruzioni
ES | Manual de instrucciones

ENG Instruction manual

VITALPEAK BS 100

Baby scale


Thank you for purchasing the VITALPEAK product.

Safety when working with the device and use

- Read carefully the enclosed safety instructions.
- For proper handling of the product, read the latest version of the manual, which can be downloaded at: www.vitalpeak.eu.
- The device is intended for use in a domestic or private environment only, not in a commercial or medical field.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper or incorrect use.

Before use:

1. Open the battery compartment cover on the bottom of the device.
2. Insert four 1.5 V AAA batteries and replace the cover.

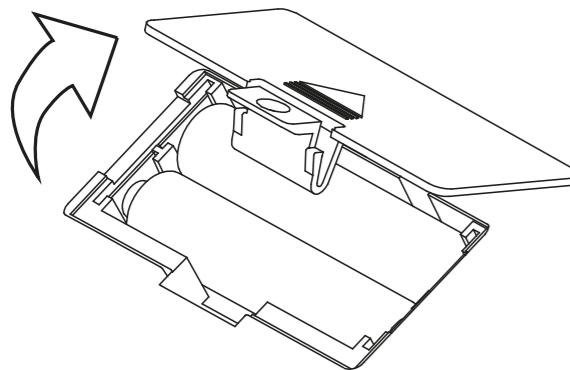

Using the device:

1. Always keep the scale on a firm, level surface, otherwise the weighing may be inaccurate.
2. To turn on the scale, briefly press the On / Off button on the device.
3. Press and hold the user button to select a user (switch between the users by a short press of the user button) the selected user is then confirmed by another long press of the user button. The user number is in the upper left corner of the LCD display next to "code".
4. Remove the silicone plug and insert the top board into the slot under the plug. Raise the measuring handle to activate the measuring mode. Leave the measuring board fully inserted. The display should show the value 46 cm or 18.1 in. If not, briefly press the On / Off button to reset the values. Then fully extend the measuring board.
5. Carefully place the baby on the scale. The head should touch the top board. Keep sliding in the measuring board until the feet touch the measuring handle.
6. Hold down the HOLD / UNIT button to freeze the values. The values will flash twice to confirm that they have been written to memory. Previous data will be displayed as a difference from the currently measured value. The up arrow on the right side of the display indicates a higher current measured value compared to the stored one, the down arrow indicates a lower current measured value compared to the stored one. Warning! When in Visitor mode the values will not be saved or compared. Briefly press HOLD / UNIT to freeze the values on the display.
7. The maximum number of values per user is 15. If this number of measurements is exceeded, the previous measurements will be gradually overwritten.
8. For the TARE (import) function, place an object on the scale that you do not want to include in the resulting weight and press the On / Off button. The scale resets and you can continue weighing.
9. Hold down the UNIT / HOLD button on the scale to change weighing units while the units are being changed.
10. Switching off the scale - hold down the On / Off button for a longer time. Otherwise, the scale switches itself off automatically one minute after the last interaction.


Error indication on the scale's display

Err – Overload The maximum allowable value of 25 kg / 55 lb has been exceeded.
Lo – Low batteries Replace batteries.

Specifications:

Units: kg / lb, cm / in
Power: 4x 1.5 V AAA batteries (not included)
Automatic shut-off: 2 minutes
Maximum load: 25 kg / 55 lb
Weighing deviation: ≤ 5 g, ≤ 0.01 lb
Height measuring range: 46–80 cm / 18.1–31.5 in
Measuring deviation: ≤ 1 mm, ≤ 0.1 in
Memory: 8 users, 15 values for each user
Visitor mode: Memory position 0 - measurements are not saved

LCD display description


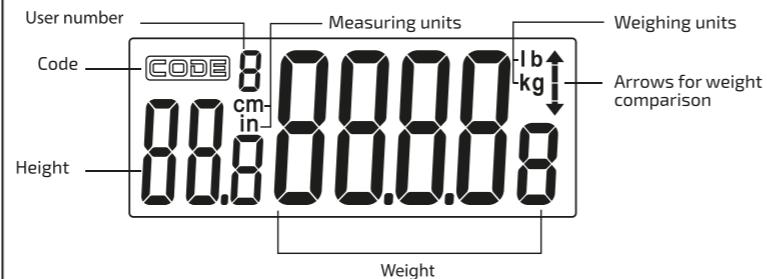


Buttons description

ZERO Button for switching On / Off and resetting the scale (TARE)

HOLD UNIT Button for recording, freezing and comparing the stored weight (press briefly) / changing the weighing unit (hold)

User button - Brief press displays the measurement history, scrolling through the individual values is done by a brief press. A long press on the button starts the changing user mode. Brief presses then switch between users. Confirm the selected user by press and hold.

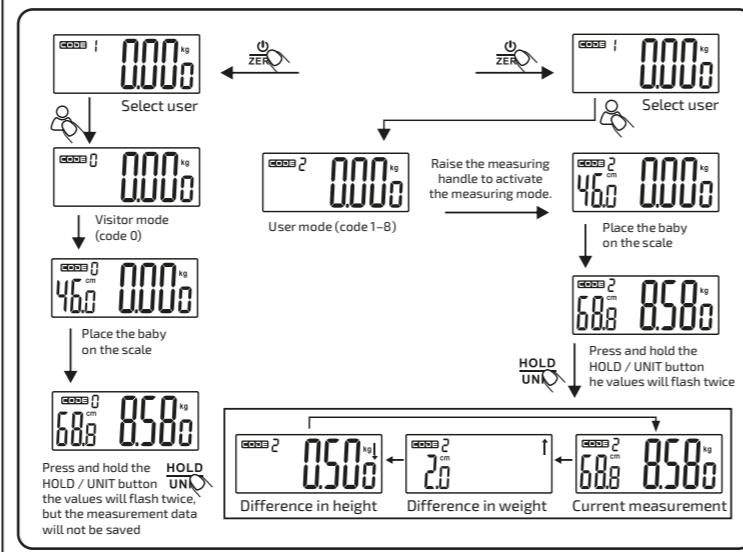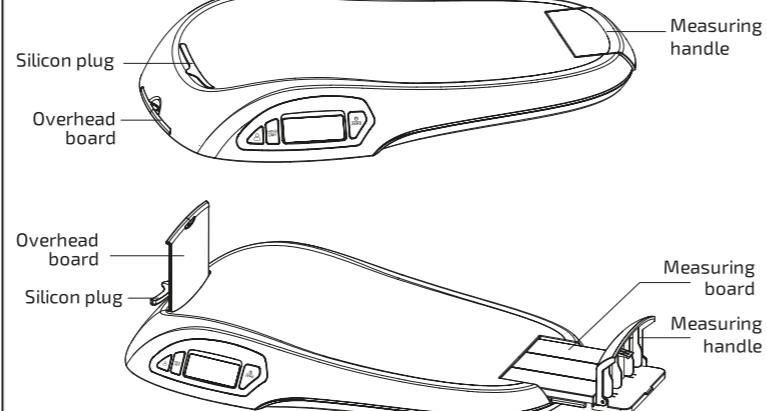

FR

Manuel d'utilisation

VITALPEAK BS 100

Pèse-bébé


Nous vous remercions de l'achat d'un produit VITALPEAK.

Sécurité de l'équipement et utilisation

- Lisez attentivement les avertissements de sécurité fournis.
- Pour un usage correct du produit, veuillez lire la version la plus récente du manuel, téléchargeable à l'adresse : www.vitalpeak.eu
- L'appareil est destiné à un usage uniquement domestique, et non commercial ou médical.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de dommages causés par un usage non prévu et non professionnel.

Avant l'utilisation:

1. Ouvrez le cache de protection du compartiment à piles dans la partie inférieure de l'appareil.
2. Insérez quatre piles AAA 1,5 V et refermez le cache.

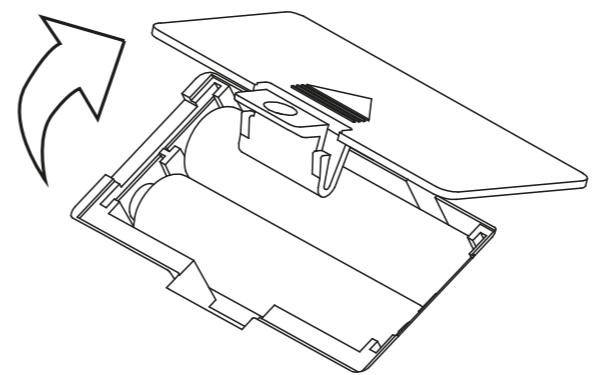

Utilisation de l'appareil:

1. Placez toujours la balance sur une surface ferme et stable afin de ne pas affecter la précision du pesage.
2. Pour la mise en marche du pèse-bébé, pressez brièvement la touche marche/arrêt.
3. Pressez longuement la touche de sélection de l'utilisateur (passez ensuite entre les différents utilisateurs par une brève pression de la touche d'utilisateur, validez ensuite l'utilisateur sélectionné en appuyant à nouveau longuement sur la touche de l'utilisateur. Le numéro de l'utilisateur est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD à côté de la mention « code »).
4. Retirez la séparation en silicone et insérez la plaque supérieure dans la fente située sous la séparation. Levez la poignée de mesure afin d'activer le mode de mesure. Laissez la plaque de mesure entièrement insérée. L'écran devrait alors afficher une valeur de 46 cm ou 18.1 in. Si ce n'est pas le cas, pressez brièvement la touche marche/arrêt afin de réinitialiser les valeurs. Sortez alors complètement la plaque de mesure.
5. Placez prudemment l'enfant sur la balance. La tête devrait être en contact avec la plaque supérieure. Faites rentrer la plaque de mesure jusqu'à ce que les pieds touchent la poignée de mesure.
6. Appuyez de manière prolongée sur la touche HOLD/UNIT afin de verrouiller les valeurs définitives. Les valeurs clignotent deux fois en confirmation de leur mise en mémoire. Les données précédentes seront affichées sous forme de différence avec la valeur alors mesurée. Une flèche vers le haut située sur le côté droit de l'écran indique une valeur actuelle supérieure à la valeur en mémoire, une flèche vers le bas signale une valeur inférieure à la valeur en mémoire. Attention ! En mode visiteur, les valeurs ne seront ni mises en mémoire, ni comparées. Pressez brièvement HOLD/UNIT afin d'annuler le verrouillage des valeurs sur l'écran.
7. Le nombre de valeurs maximal pour un utilisateur est de 15. Lorsque ce nombre est dépassé, les valeurs les plus anciennes seront successivement remplacées.
8. Pour la fonction TARA (pesage répétitif), placez sur la balance un objet que vous ne souhaitez pas comptabiliser dans le poids final et pressez la touche marche/arrêt. La balance est remise à zéro et vous pouvez continuer la pesée.
9. Pour un changement d'unités, pressez de manière prolongée la touche UNIT/HOLD jusqu'au changement d'unités, ceci balance allumée.
10. Arrêt de la balance - pressez de manière prolongée la touche marche/arrêt. La balance s'arrête sinon automatiquement après une minute de non-activité.


Signification des erreurs sur l'écran de la balance

Err – Surcharge. Dépassement de la valeur maximale autorisée de 25 kg / 55 lb.
Lo – Piles usagées. Remplacez les piles.

Paramètres:

Unités : kg / lb, cm / in
Alimentation : 4x piles 1,5 V AAA (non fournies)
Arrêt automatique : 2 minutes
Charge maximale : 25 kg / 55 lb
Tolérance de pesage : ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Plage de mesure de taille : 46–80 cm / 18,1–31,5 in
Tolérance de mesure : ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Mémoire : 8 utilisateurs, 15 données pour chacun
Mode visiteur : Position mémoire 0 - pas de mise en mémoire

>Description de l'écran LCD


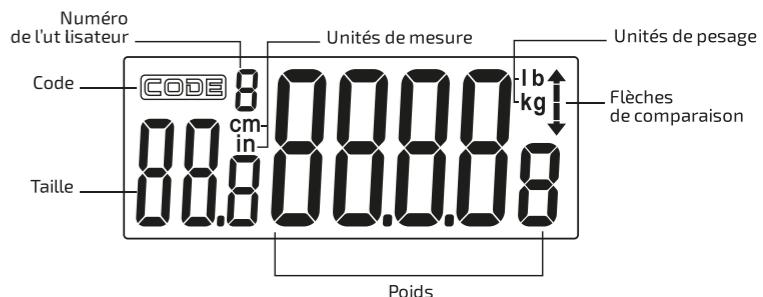


Descriptif des touches

ZERO Touche marche/arrêt et de remise à zéro (TARA)

HOLD UNIT Unités d'enregistrement, de verrouillage et de comparaison du poids mesuré (pressez brièvement) / changement d'unités de pesage (maintenez appuyé)

User button Touche utilisateur - Une brève pression permet d'afficher l'historique des mesures, pressez brièvement afin de faire défiler les différentes valeurs. Un appui prolongé sur la touche déclenche le mode de changement d'utilisateur. Des appuis brefs entraînent ensuite le passage entre les différents utilisateurs. Confirmez l'utilisateur sélectionné d'un appui prolongé.

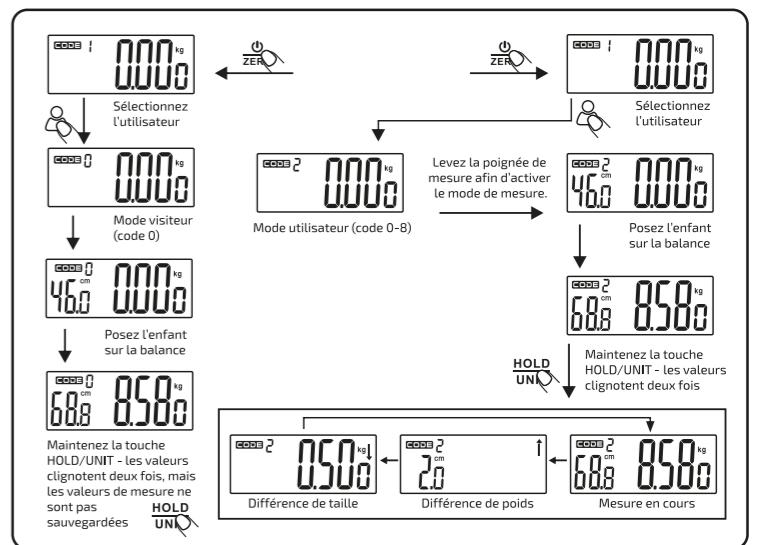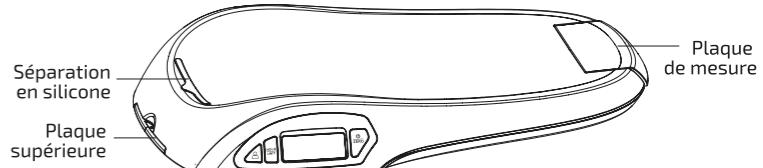

VITALPEAK BS 100

Bilancia per neonati


Grazie per aver acquistato il prodotto VITALPEAK.

Sicurezza mentre si lavora con il dispositivo e utilizzo

- Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza allegate.
- Per una corretta gestione del prodotto, leggere la versione più recente del manuale, che può essere scaricata all'indirizzo: www.vitalpeak.eu
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in un ambiente domestico o privato, non in ambito commerciale o medico.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'uso improprio o non corretto.

Prima dell'uso:

- Aprire il coperchio del vano batteria nella parte inferiore del dispositivo.
- Inserire quattro batterie AAA da 1,5 V e rimettere il coperchio.

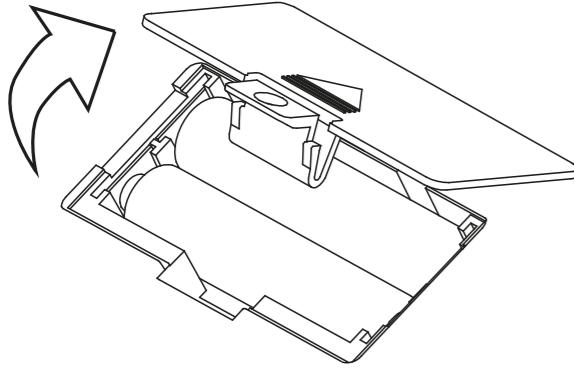**Utilizzo del dispositivo:**

- Tenere sempre la bilancia su una superficie stabile e piana, altrimenti il peso potrebbe essere impreciso.
- Per accendere la bilancia, premere brevemente il pulsante On / Off sul dispositivo.
- Tenere premuto il pulsante utente per selezionare un utente (passare da un utente all'altro premendo brevemente il pulsante utente) l'utente selezionato viene quindi confermato da un'altra pressione prolungata del pulsante utente. Il numero utente si trova nell'angolo in alto a sinistra del display LCD accanto a „codice“.
- Rimuovere la spina in silicone e inserire la tavola superiore nello slot sotto la spina. Sollevare la maniglia di misurazione per attivare la modalità misurazione. Lasciare la tavola di misurazione completamente inserita. Sul display dovrebbe essere visualizzato il valore 46 cm o 18,1 pollici. In caso contrario, premere brevemente il pulsante On / Off per reimpostare i valori. Quindi estendere completamente la tavola di misurazione.
- Posare con attenzione il bambino sulla bilancia. La testa deve toccare la parte superiore della tavola. Continuare a far scorrere la tavola di misurazione fino a quando i piedi toccano la maniglia di misurazione.
- Tenere premuto il pulsante HOLD / UNIT per congelare i valori. I valori lampeggiano due volte per confermare che sono stati scritti in memoria. I dati precedenti verranno visualizzati come differenza dal valore attualmente misurato. La freccia verso l'alto a destra del display indica un valore attuale misurato maggiore rispetto a quello memorizzato, la freccia verso il basso indica un valore attuale misurato inferiore rispetto a quello memorizzato. Avvertenza! Quando si utilizza la modalità Visitor i valori non vengono memorizzati o confrontati. Premere brevemente HOLD / UNIT per congelare i valori sul display.
- Il numero massimo di valori per utente è 15. Se questo numero di misurazioni viene superato, le misurazioni precedenti verranno gradualmente sovrascritte.
- Per la funzione TARA (importazione), posizionare sulla bilancia un oggetto che non si desidera includere nel peso risultante e premere il pulsante On / Off. La bilancia si azzerà e si può continuare a pesare.
- Tenere premuto il pulsante UNIT / HOLD sulla bilancia per modificare le unità di misura del peso mentre le unità vengono modificate.
- Spegnimento della bilancia: tenere premuto più a lungo il tasto On / Off. Altrimenti, la bilancia si spegne automaticamente un minuto dopo l'ultima interazione.

Indicazioni di errore sul display delle bilance

Err - Sovraccarico È stato superato il valore massimo consentito di 25 kg / 55 lb.

Lo - Batterie scariche Sostituire le batterie.

Specifiche:

Units: kg / lb, cm / in

Potenza: 4 Batterie AAA da 1,5 V (non incluse)

Speggnimento automatico: 2 minuti

Portata massima: 25 kg / 55 lb

Deviazione del peso: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb

Intervallo di misura dell'altezza: 46–80 cm / 18,1–31,5 in

Deviazione della misura: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in

Memoria: 8 utenti, 15 valori per ciascun utente




Modalità Visitor: Posizione di memoria 0 - le misure non vengono salvate

Descrizione del display LCD**Descrizione dei pulsanti**

ZERO Pulsante per accendere / spegnere e azzerare la bilancia (TARE)

HOLD UNIT Pulsante per registrare, congelare e confrontare il peso memorizzato (pressione breve) / cambiare unità di misura (pressione lunga)

Pulsante utente: con una breve pressione si visualizza la cronologia delle misurazioni, lo scorrimento dei singoli valori avviene con una pressione breve. Una lunga pressione sul pulsante avvia la modifica della modalità utente. Con pressioni brevi si passa da un utente all'altro. Confermare l'utente selezionato con una pressione lunga.

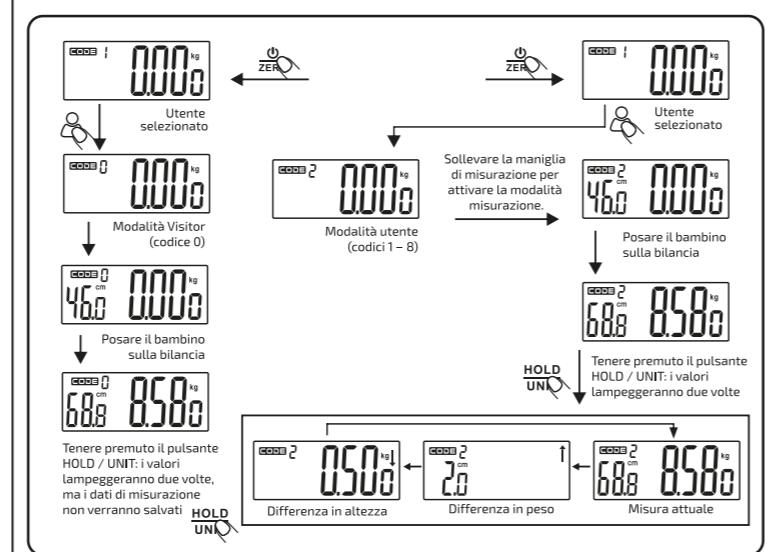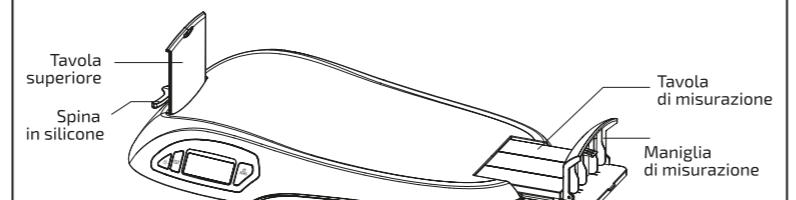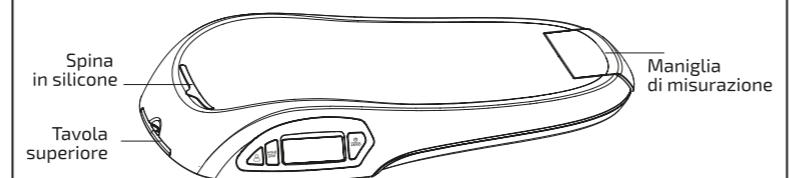**VITALPEAK BS 100**

Balanza para bebés


Gracias por comprar el producto VITALPEAK.

Seguridad al trabajar con el dispositivo y uso

- Lea detenidamente las instrucciones de seguridad adjuntas.
- Para una manipulación apropiada del producto, lea la última versión del manual, que se puede descargar en: www.vitalpeak.eu
- El dispositivo está diseñado solo para uso en entornos domésticos o privados, no para fines comerciales ni medicinales.
- El fabricante no es responsable por daños causados por el uso inapropiado o incorrecto.

Antes del uso:

- Abra la cubierta del compartimento de la batería en la parte inferior del dispositivo.
- Coloque cuatro baterías tipo AAA de 1.5 y vuelva a colocar la cubierta.

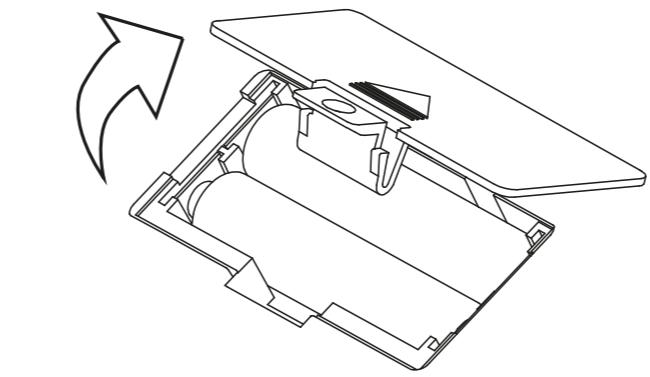**Cómo usar el dispositivo:**

- Siempre mantenga la balanza sobre una superficie firme y nivelada, de lo contrario, el pesaje podría no ser exacto.
- Presione brevemente el botón de encendido y apagado (on/off) del dispositivo para encenderlo.
- Presione y mantenga presionado el botón de usuario para seleccionar un usuario (cambie entre usuarios presionando brevemente el botón de usuario); luego se confirma el usuario seleccionado con otra presión prolongada del mismo botón. El número de usuario se encuentra en la esquina superior izquierda del visor del lado de „código“.
- Retire el tapón de silicona e inserte la placa superior en la ranura debajo del tapón. Levante el mango de medición para activar el modo medición. Deje la placa de medición totalmente colocada. El visor debería mostrar el valor de 46 cm o 18.1 in. Si no lo hace, presione brevemente el botón de encendido y apagado para reiniciar los valores. Luego, extienda completamente la placa de medición.
- Coloque al bebé con cuidado sobre la balanza. La cabeza deberá tocar la placa superior. Continúe deslizando la placa de medición hasta que los pies toquen el mango de medición.
- Mantenga presionado el botón HOLD/UNIT (mantener/unidad) para que los valores queden fijos. Los valores parpadearán dos veces para confirmar que se han grabado en la memoria. Se mostrarán los datos anteriores como una diferencia del valor medido actual. La flecha hacia arriba a la derecha del visor indica un valor medido actual más alto en comparación con el valor que se guardó en la memoria y la flecha hacia abajo indica un valor medido actual más bajo en comparación con el valor guardado. ¡Advertencia! Los valores no se guardarán ni compararán cuando esté en modo „Visitor“ (Visitante). Presione brevemente HOLD/UNIT para mantener los valores fijos en el visor.
- La cantidad máxima de valores por usuario es 15. Si se supera esta cantidad de mediciones, se sobreescibirán gradualmente las mediciones anteriores.
- Para la función TARE (tara [importar]), coloque un objeto sobre la balanza que no deseas incluir en el peso resultante y presione el botón de encendido y apagado (on/off). La balanza se reinicia y puede continuar con el pesaje.
- Mantenga presionado el botón UNIT/HOLD de la balanza para cambiar las unidades de pesaje mientras se cambian las unidades.
- Apagado de la balanza: mantenga presionado el botón de encendido y apagado (on/off) durante más tiempo. De lo contrario, la balanza se apagará automáticamente un minuto después de la última interacción.

Indicación de error en el visor de la balanza

Err: Sobrecarga, se superó el valor máximo permitido de 25 kg/55 lb.

Lo: Baterías descargadas, reemplácelas.

Especificaciones:

Unidades: kg/lb, cm/in

Alimentación: 4 baterías de 1,5 V tipo AAA (no incluidas)

Apagado automático: 2 minutos

Carga máxima: 25 kg / 55 lb

Desviación de peso: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb

Rango de medición de estatura: 46 y 80 cm/18,1 y 31,5 in

Desviación de medición: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in

Memoria: 8 usuarios, 15 valores para cada usuario




Modo visitante: Posición de memoria 0: las mediciones no se guardan

Descripción del visor de LCD**Descripción de los botones**

ZERO Botón para encender y apagar On/Off y reiniciar la balanza (TARE)

HOLD UNIT Botón para registrar, mantener fijo y comparar el peso guardado (presionar brevemente)/cambiar la unidad de pesaje (mantener)

Botón de usuario: una presión breve muestra el registro de mediciones, el desplazamiento a través de los valores individuales se realiza con una presión breve. El modo de cambio de usuario se inicia con una presión prolongada del botón. Las presiones breves cambian entre los usuarios. Confirme el usuario seleccionado manteniendo la presión.

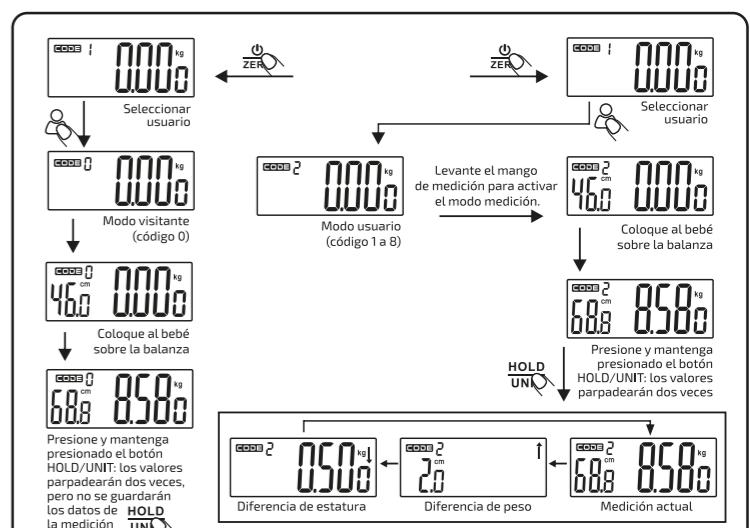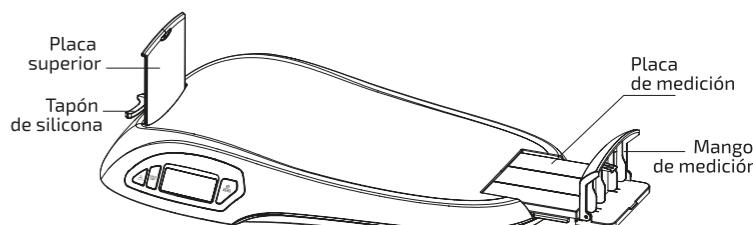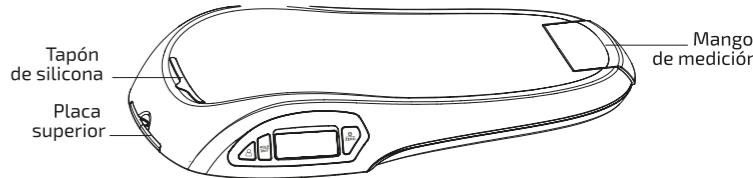



DE | Gebrauchsanleitung
CZ | Návod k použití

SK | Návod na použitie
PL | Instrukcja obsługi

DE Gebrauchsanleitung

VITALPEAK BS 100

Säuglingswaage


Wir bedanken uns für den Kauf des Produktes VITALPEAK.

Sicherheit bei der Arbeit mit dem Gerät und Verwendung

- Lesen Sie sorgfältig die beigelegten Sicherheitshinweise.
- Lesen Sie zur ordnungsgemäßen Handhabung des Produkts die neueste Version des Handbuchs, die unter folgender Adresse heruntergeladen werden kann: www.vitalpeak.eu
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in einer häuslichen oder privaten Umgebung vorgesehen. Der Gebrauch in kommerziellen oder ärztlichen Bereichen ist ausgeschlossen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung zurückzuführen sind.

Vor der Verwendung:

- Öffnen Sie den Schutzdeckel des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie vier 1,5 V AAA Batterien hinein und schließen Sie den Schutzdeckel wieder.

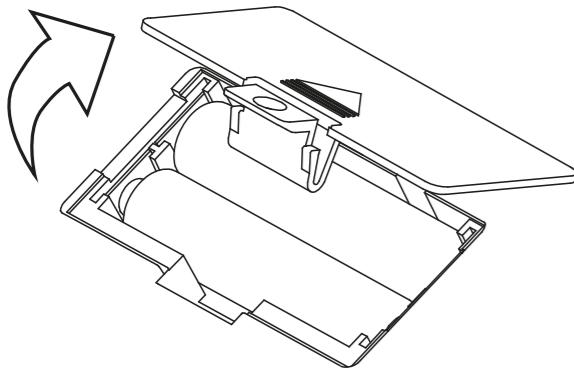

Verwendung des Geräts:

- Platzieren Sie die Waage immer auf einer festen, ebenen Oberfläche, da sonst das Wiegen ungenau sein kann.
- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Gerät, um die Waage einzuschalten.
- Halten Sie die Benutzertaste gedrückt, um einen Benutzer auszuwählen. Wechseln Sie zwischen einzelnen Benutzer durch kurzes Drücken der Benutzertaste und bestätigen Sie den ausgewählten Benutzer durch erneutes langes Drücken der Benutzertaste. Die Benutzernummer befindet sich in der oberen linken Ecke des LCD-Displays neben „Code“.
- Entfernen Sie den Silikonstopfen und setzen Sie die obere Platte ein. Heben Sie den Messgriff an, um den Messmodus zu aktivieren. Lassen Sie die Messplatte vollständig eingeschoben. Das Display sollte 46 cm oder 18,1 in anzeigen. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um die Werte zurückzusetzen. Ziehen Sie dann die Messplatte vollständig heraus.
- Legen Sie das Baby vorsichtig auf die Waage. Der Kopf sollte die obere Platte berühren. Schieben Sie die Messplatte hinein, bis die Füße den Messgriff berühren.
- Halten Sie die Taste HOLD/UNIT gedrückt, um die Werte einzufrieren. Die Werte blinken zweimal, um zu bestätigen, dass sie gespeichert wurden. Die vorherigen Daten werden als Differenz zum aktuell gemessenen Wert angezeigt. Der Aufwärtspfeil auf der rechten Seite des Displays zeigt einen höheren aktuell gemessenen Wert im Vergleich zum gespeicherten Wert an, der Abwärtspfeil zeigt einen niedrigeren aktuell gemessenen Wert im Vergleich zum gespeicherten Wert an. Achtung! Im Besuchermodus werden Werte nicht gespeichert oder verglichen. Drücken Sie kurz HOLD/UNIT, um die Werte auf dem Display einzufrieren.
- Die maximale Anzahl von Werten pro Benutzer beträgt 15. Wenn diese Anzahl von Messungen überschritten wird, werden die vorherigen Messungen allmählich überschrieben.
- Legen Sie für die TARA-Funktion (Nachwiegen) einen Gegenstand auf die Waage, das Sie nicht in das resultierende Gewicht einrechnen möchten, und drücken Sie die

- Ein-/Aus-Taste. Die Waage wird zurückgesetzt und Sie können mit dem Wiegen fortfahren.
- Um die Einheiten zu wechseln, halten Sie die Taste UNIT/HOLD auf der eingeschalteten Waage länger gedrückt, bis sich die Einheiten ändern.
- Waage ausschalten - halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger gedrückt. Eventuell schaltet sich die Waage eine Minute nach der letzten Interaktion automatisch aus.

Fehleranzeige auf dem Display

Fehleranzeige auf dem Display Der maximale zulässige Wert 25kg / 55 lb wurde überschritten.

Lo - Leere Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Spezifikation:

Einheiten: kg / lb, cm / in

Versorgung: 4x 1,5 V AAA Batterie (nicht Bestandteil der Verpackung)

Automatisches Abschalten: 2 Minuten

Maximale Belastung: 25 kg / 55 lb

Abweichung beim Wiegen: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb

Bereich der Größenmessung: 46–80 cm / 18,1–31,5 in

Abweichung beim Messen: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in

Speicher: 8 Benutzer, 15 Positionen für jeden Benutzer

Besuchermodus: Speicherposition 0 – Messwerte werden nicht gespeichert



Beschreibung des LCD-Displays



Beschreibung der Tasten

- ZERO** Taste zum Ein-/Ausschalten und Zurücksetzen der Waage (TARA)
- HOLD UNIT** Taste zum Aufzeichnen, Einfrieren und Vergleichen des gespeicherten Gewichts (kurz drücken) / Wechseln der Wiegeeinheit (halten)

- Benutzertaste** - Kurzes Drücken zeigt den Messverlauf an. Das Scrollen durch die einzelnen Werte erfolgt durch kurzes Drücken. Durch langes Halten der Taste wird der Benutzerwechselmodus aktiviert. Durch kurzes Drücken wird dann zwischen den Benutzern gewechselt. Bestätigen Sie den ausgewählten Benutzer durch langes Drücken.

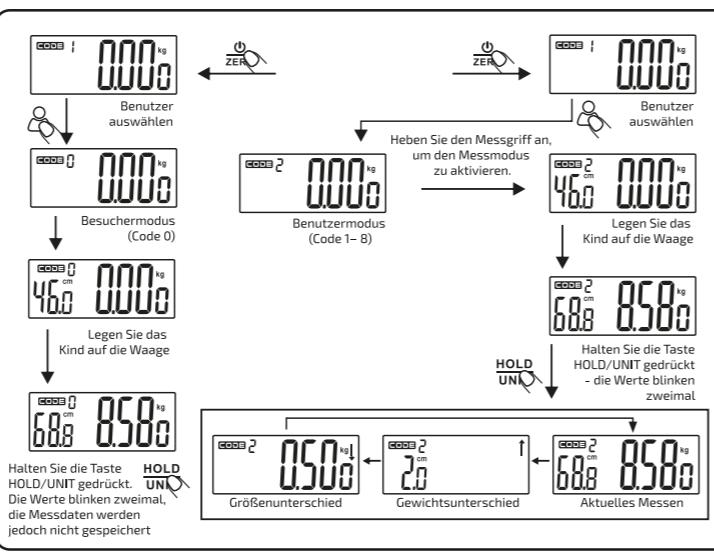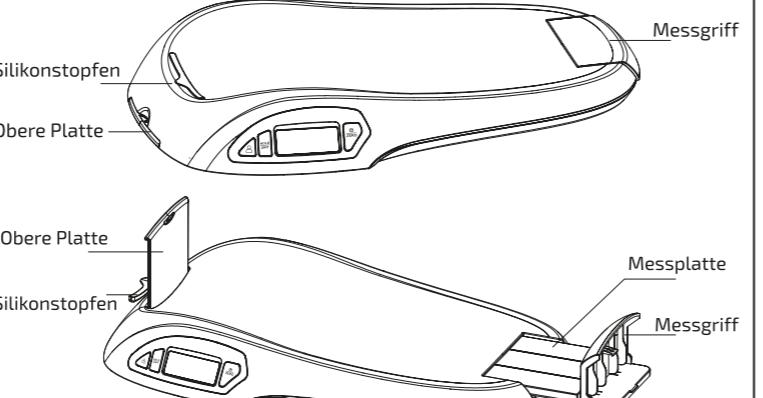

CZ

Návod k použití

VITALPEAK BS 100

Kojenecká váha


Děkujeme Vám za pořízení produktu VITALPEAK

Bezpečnost při práci se zařízením a použití

- Pozorně si přečtěte příbalené bezpečnostní upozornění.
- Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, který je ke stažení na stránce: www.vitalpeak.eu
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím či soukromém prostředí, nikoli v komerční či lékařské oblasti.
- Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Před použitím:

- Otevřete ochranný kryt prostoru pro baterie na spodní části zařízení.
- Vložte čtyři 1,5V AAA baterie a kryt opět zavřete.

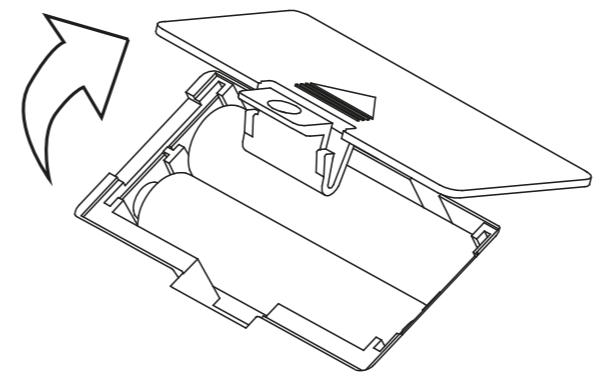

Použití zařízení:

- Váhu mějte vždy na pevném rovném podkladu, jinak může být vážení nepřesné.
- Pro zapnutí váhy krátce zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení.
- Dlouze podržte tlačítko uživatele pro vybrání uživatele (mezi uživateli se následně přepíná krátkým stiskem tlačítka uživatele), potvrzení vybraného uživatele se poté uskuteční dalším dlouhým stiskem tlačítka uživatele. Číslo uživatele je v levém horním rohu LCD displeje vedle nápisu „code“.
- Vyjměte silikonovou zálepku a vložte horní desku do slotu pod zálepku. Zvedněte měřící rukojet pro aktivaci režimu měření. Měřicí desku nechte plně zasunutou. Displej by měl ukazovat hodnotu 46 cm nebo 18,1 in. Pokud ne, zmáčkněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí pro reset hodnot. Naplně poté vysuňte měřicí desku.
- Opatrně vložte dítě na váhu. Hlavu by se měla dotýkat měřicí desky. Zasunujte měřicí desku dokud se nebudou chodidla dotýkat měřicí rukojeti.
- Podržte déle tlačítko HOLD/UNIT pro zamrazení hodnot. Hodnoty dvakrát problíknou pro potvrzení toho, že byly zapsány do paměti. Předchozí data budou zobrazována ve formě rozdílu oproti v současnosti změněné hodnotě. Šipka vzhůru na pravé straně displeje signalizuje vyšší současnou naměřenou hodnotu oproti uložené, šipka směrem dolů signalizuje nižší současnou hodnotu oproti uložené. Pozor! V režimu návštěvníka se hodnoty nebudou ukládat ani porovnávat. Krátké zmáčkněte HOLD/UNIT pro zrušení zamrazení hodnot na displeji.
- Maximální počet hodnot na jednoho uživatele je 15. V případě překonání tohoto počtu měření budou postupně přepisována předchozí měření.
- Pro funkci TARA (dovážení) položte na váhu předmět, který do výsledné váhy nechcete započítat a zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Váha se vynuluje a můžete pokračovat ve vážení.
- Pro změnu jednotek podržte na zapnuté váze delší dobu tlačítko UNIT/HOLD dokud nedojde ke změně jednotek.
10. Vypnutí váhy - podržte delší dobu tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Případně se váha vypne automaticky po jedné minutě od poslední interakce.

Signalizace chyby na displeji váhy

Err - Přetížení. Byla překročena maximální povolená hodnota 25kg / 55 lb.

Lo - Vybité baterie. Nahradte baterie novými.

Specifikace:

Jednotky: kg / lb, cm / in

Napájení: 4x 1,5 V AAA baterie (není v balení)

Automatické vypnutí: 2 minuty

Maximální zatížení: 25 kg / 55 lb

Odchylka vážení: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb


Rozsah měření výšky: 46–80 cm / 18,1 – 31,5 in

Odchylka měření: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in

Paměť: 8 uživatelů, 15 pozic pro každého uživatele

Režim návštěvníka: Paměťová pozice 0 - neukládají se měření

Popis LCD displeje


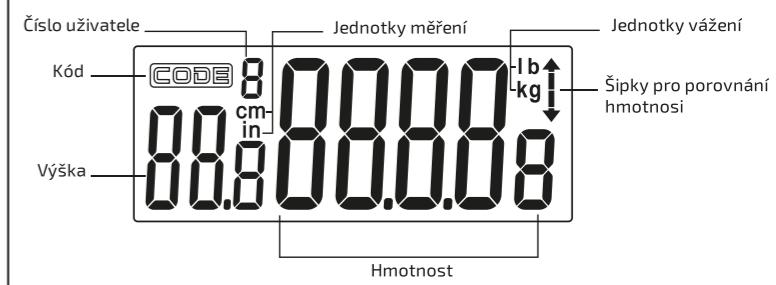


Popis tlačítek

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a vynulování váhy (TARA)

Tlačítko pro zaznamenání, zamrazení a porovnání uložené hodnoty (krátce zmáčknout) / změnu jednotky vážení (podržet)

Tlačítko uživatele - Krátký stisk zobrazí historii měření, procházení jednotlivých hodnot probíhá krátkým stiskem. Dlouhé podržení tlačítka spustí režim změny uživatele. Krátkými stisky následně probíhá přepínání mezi uživateli. Potvrzení vybraného uživatele potvrďte dlouhým stlačením.

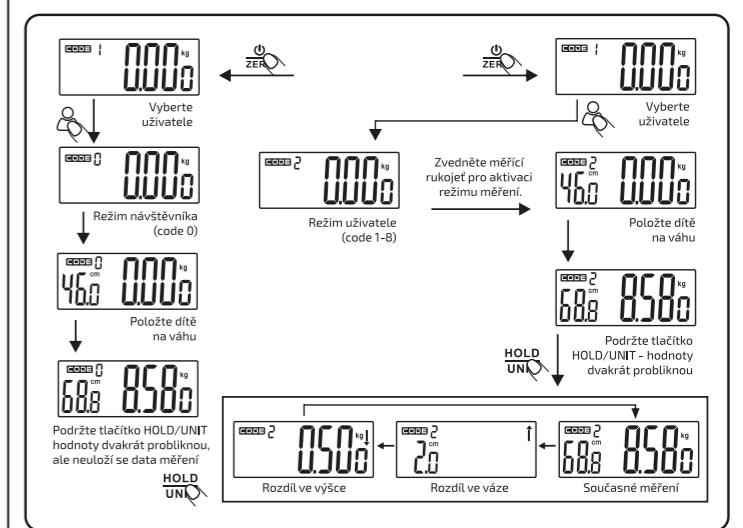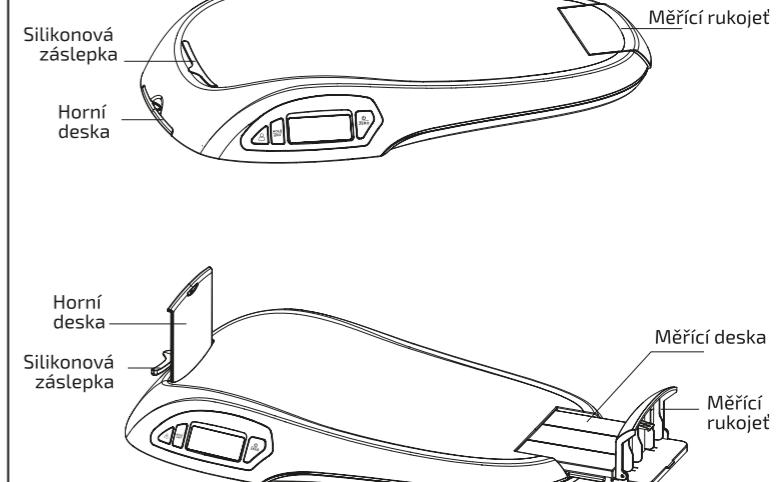

VITALPEAK BS 100

Dojčenská váha


Dakujeme vám za kúpu produktu VITALPEAK.

Bezpečnosť pri práci so zariadením a použití

- Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné upozornenie.
- Pre správne zaobchádzanie s produkтом čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je na stiahnutie na stránke: www.vitalpeak.eu
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom či súkromnom prostredí, nie v komerčnej či lekárskej oblasti.
- Výrobca neručí za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.

Pred použitím:


- Otvorte ochranný kryt priestoru na batérie na spodnej časti zariadenia.
- Vložte štyri 1,5 V AAA batérie a kryt opäť zavrite.

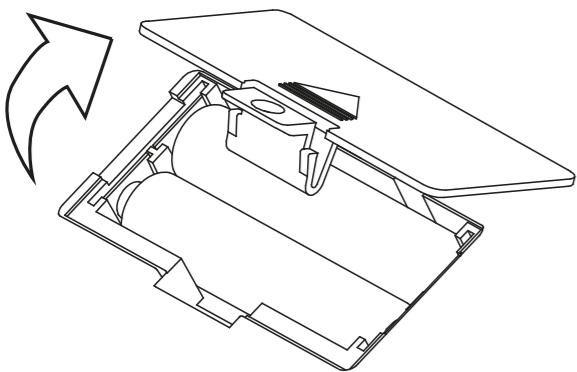**Použitie zariadenia:**

- Váhu majte vždy na pevnom rovnom podklade, inak môže byť vázenie nepresné.
- Na zapnutie váhy krátko stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie zariadenia.
- Dlhé podržte tlačidlo používateľa na vybranie používateľa (medzi používateľmi sa následne prepína krátkym stlačením tlačidla používateľa), potvrdenie vybraného používateľa sa potom uskutoční ďalším dlhým stlačením tlačidla používateľa. Číslo používateľa je v ľavom hornom rohu LCD displeja vedľa nápisu „code“.
- Vyberte silikónový zálepku a vložte hornú dosku do slotu pod zálepku. Zdvhnite meraciu rukováť na aktiváciu režimu merania. Meraciu dosku nechajte plne zasunutú. Displej by mal ukazovať hodnotu 46 cm alebo 18,1 in. Ak nie, stlačte krátko tlačidlo zapnutia/vypnutia pre reset hodnôt. Napäno potom vysuňte meraciu dosku.
- Opatrne vložte dieťa na váhu. Hlava by sa mala dotýkať hornej dosky. Zasúvajte meraciu dosku, kým sa nebudú chodiť dotýkať meracej rukováti.
- Podržte dlhšie tlačidlo HOLD/UNIT na zamrazenie hodnôt. Hodnoty dvakrát preblíknú na potvrdenie toho, že boli zapisané do pamäte. Predchádzajúce dátu sa budú zobrazovať vo forme rozdielu oproti súčasnému nameranému hodnotu oproti uloženej. Šípka hore na pravej strane displeja signalizuje viacšiu súčasnému nameranému hodnotu oproti uloženej. Pozor! V režime návštěvníka sa hodnoty nebudú ukladať ani porovnávať. Krátko stlačte HOLD/UNIT na zrušenie zamrazenia hodnôt na displeji.
- Maximálny počet hodnôt na jedného používateľa je 15. V prípade prekonania tohto počtu merania sa budú postupne prepisovať predchádzajúce merania.
- Pre funkciu TARA (dováženie) položte na váhu predmet, ktorý do výslednej váhy nechcete započítať a stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie. Váha sa vynuluje a môžete pokračovať vo vážení.
- Na zmene jednotiek podržte na zapnutej váhe dlhší čas tlačidlo UNIT/HOLD, kym nedôjde k zmene jednotiek.
- Vypnutie váhy – podržte dlhší čas tlačidlo na zapnutie/vypnutie. Prípadne sa váha vypne sama automaticky po jednej minúte od poslednej interakcie.

Signálizácia chyby na displeji váhyErr – Preťaženie. Bola prekročená maximálna povolená hodnota 25 kg/55 lb.
Lo – Vybité batérie. Nahradte batérie novými.**Špecifikácie:**




Jednotky: kg/lb, cm/in
Napájanie: 4x 1,5 V AAA batéria (nie je v balení)
Automatické vypnutie: 2 minúty
Maximálne zataženie: 25 kg/55 lb
Odcihlyka váženia: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Rozsah merania výšky: 46 – 80 cm / 18,1 – 31,5 in
Odcihlyka merania: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Pamäť: 8 používateľov, 15 pozícii pre každého používateľa
Režim návštěvníka: Pamäťová pozícia 0 – neukladajú sa merania

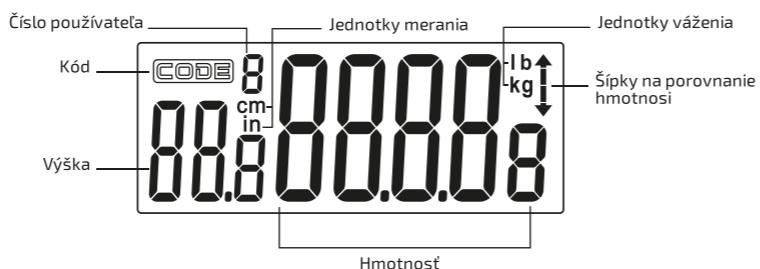Popis LCD displeja**Popis tlačidiel**

ZERO Tlačidlo na zapnutie/vypnutie a vynulovanie váhy (TARA)

HOLD UNIT Tlačidlo na zaznamenanie, zamrazenie a porovnanie uloženej hmotnosti (krátko stlačiť) / zmenu jednotky váženia (podržať)

Tlačidlo používateľa – Krátké stlačenie zobrazí historiu merania, prechádzanie jednotlivých hodnôt prebieha krátkym stlačením. Dlhé podržanie tlačidla spustí režim zmeny používateľa. Krátkymi stlačeniami následne prebieha prepínanie medzi používateľmi. Potvrdenie vybraného používateľa potvrdte dlhým stlačením.

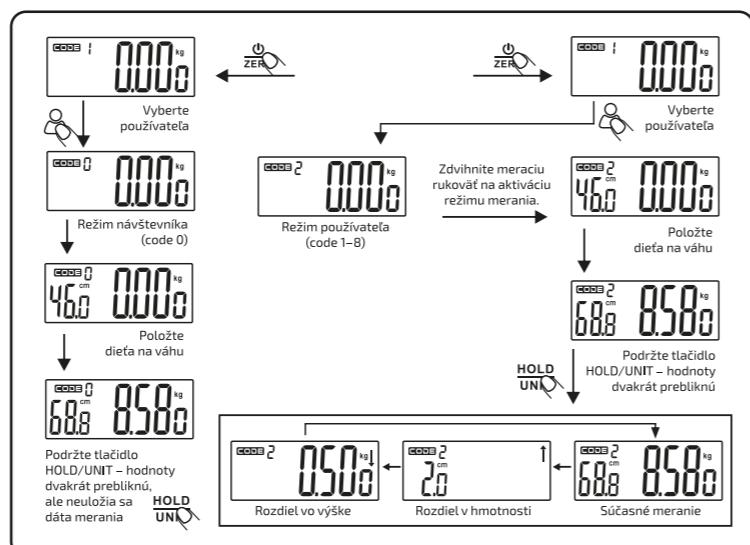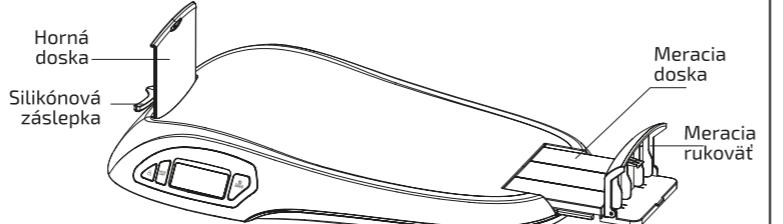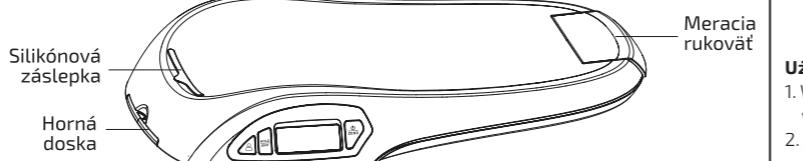**VITALPEAK BS 100**

Waga dla niemowląt


Dziękujemy za zakup produktu VITALPEAK.

Korzystanie z urządzenia oraz bezpieczeństwo podczas pracy

- Uważnie przeczytaj załączoną instrukcję bezpieczeństwa.
- W celu prawidłowego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, którą można pobrać ze strony: www.vitalpeak.eu
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego, a nie do celów komercyjnych czy medycznych.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niefachowym lub niewłaściwym użytkowaniem.

Przed użyciem:


- Otwórz pokrywę baterii na spodzie urządzenia.
- Włożyć cztery baterie 1,5 V AAA i ponownie zamknij pokrywę.

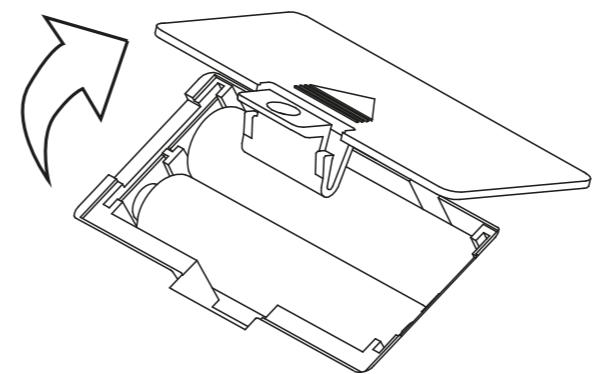**Użytkowanie urządzenia:**

- Wagi należy zawsze umieszczać na stabilnej, równej powierzchni, w przeciwnym razie ważenie może być niedokładne.
- Aby włączyć wagę, należy krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania na urządzeniu.
- Przytrzymaj przycisk użytkownika, aby wybrać użytkownika (użytkownika można przełączyć przez krótkie naciśnięcie przycisku użytkownika, następnie wybrany użytkownik jest potwierdzany przez kolejne długie naciśnięcie przycisku użytkownika. Numer użytkownika znajduje się w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD obok komunikatu „code“).
- Zdejmij silikonową zaślepkę i włożyć górną płytę w szczelinę pod zaślepką. Podnieś uchwyt pomiarowy, aby aktywować tryb pomiaru. Pozostaw płytę pomiarową całkowicie wsuniętą. Wyświetlacz powinien pokazywać 46 cm lub 18,1 in. Jeżeli nie, naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby zresetować wartości. Następnie całkowicie wysuń płytę pomiarową.
- Ostrożnie położyć dziecko na wadze. Główka powinna dotykać górnej płyty. Wsuń płytę pomiarową tak, aby nogi dziecka dotykały uchwytu pomiarowego.
- Przytrzymaj przycisk HOLD/UNIT, aby zamrozić wartości. Wartości migną dwukrotnie, aby potwierdzić, że zostały zapisane w pamięci. Poprzednie dane zostaną wyświetlone jako różnica w stosunku do aktualnie zmierzonej wartości. Strzałka w górze po prawej stronie wyświetlacza wskazuje wyższą bieżącą zmierzoną wartość w porównaniu do wartości zapisanej, strzałka w dół wskazuje niższą bieżącą zmierzoną wartość w porównaniu do wartości zapisanej. Uwaga! W trybie gości wartości nie będą zapisywane ani porównywane. Naciśnij krótko przycisk HOLD/UNIT, aby anulować zamrożone wartości na wyświetlaczu.
- Maksymalna liczba wartości dla jednego użytkownika wynosi 15. W przypadku przekroczenia tej liczby pomiarów poprzednie pomiarów będą stopniowo nadpisywane.
- W przypadku funkcji TARA (doważanie) umieść na wadze obiekt, którego waga nie chcesz uwzględniać w pomiarze i naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Waga zostanie zresetowana, po czym można kontynuować ważenie.
- Aby zmienić jednostki, przytrzymaj przycisk UNIT/HOLD, kiedy waga jest włączona.
- Wyłączanie wagi – dłużej niż 2 sekundy przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. Waga także wyłącza się automatycznie po minucie od ostatniej interakcji.

Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu wagiErr – Prętowanie. Przekroczono maksymalną dopuszczalną wartość 25 kg / 55 lb.
Lo – Rozładowane baterie. Wymień baterie na nowe.**Dane techniczne:**




Jednostki: kg / lb, cm / in
Zasilanie: 4x bateria 1,5 V AAA (baterie nie znajdują się w zestawie)
Automatyczne wyłączanie: 2 minuty
Maksymalne obciążenie: 25 kg / 55 lb
Odcihlyka váženia: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Zakres pomiaru wysokości: 46–80 cm / 18,1–31,5 in
Błąd pomiaru: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Pamięć: 8 użytkowników, 15 pozycji dla każdego użytkownika
Tryb gościa: Pozycja pamięci 0 – pomiary nie są zapisywane

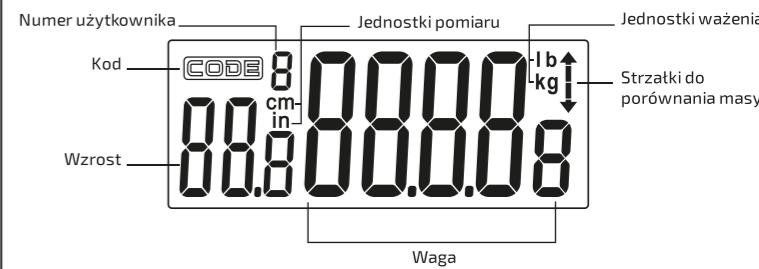Opis ekranu LCD**Opis przycisków**

ZERO Przycisk włączania/wyłączania i resetowania wagi (TARE)

HOLD UNIT Przycisk zapisywania, zamrażania i porównywania zapisanej masy (krótkie naciśnięcie) / zmiany jednostki ważania (przytrzymywanie)

Przycisk użytkownika - Krótkie naciśnięcie wyświetla historię pomiarów, przewijanie poszczególnych wartości następuje przez krótkie naciśnięcie. Długie przytrzymanie przycisku uruchamia tryb zmiany użytkownika. Krótkie naciśnięcie następuje następnie umożliwia przełączanie między użytkownikami. Zatwierdź wybranego użytkownika przez długie naciśnięcie.

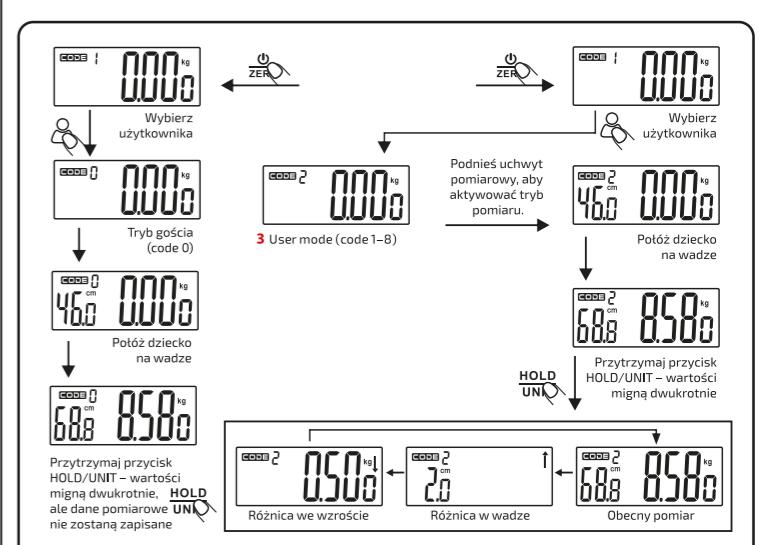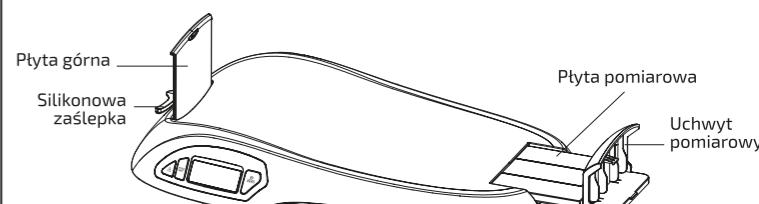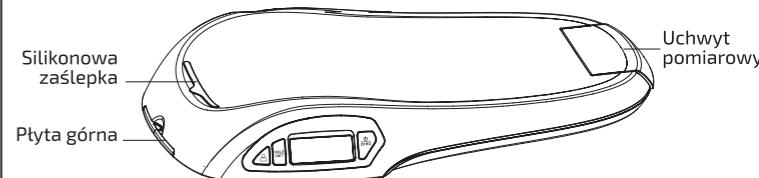



HU | Használati útmutató
RO | Manual de instrucțiuni

HR | Upute za korištenje
SL | Navodila za uporabo

HU Használati útmutató

VITALPEAK BS 100

Csecsemő mérleg


Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a VITALPEAK márka termékét!

A készülék biztonságos használata és kezelése

- Figyelmesen olvassa el a csatolt biztonsági figyelmeztetéseket.
- A termék rendeltetésszerű használatához olvassa el a használati útmutató legfrissebb változatát, az útmutatót a www.vitalpeak.eu honlapról töltelheti le.
- A készüléket kizártlag csak háztartásban, magán jellegű célokra szabad használni, kereskedelmi vagy orvosi célokra nem.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy szakszerűtlen használatból eredő károkért és sérülésekért.

Használat előtt:

- Nyissa ki az elemtárt fedelét a mérleg alján.
- Tegyen be 4 darab 1,5 V-os AAA ceruzaelemet és a fedelel zárja vissza.

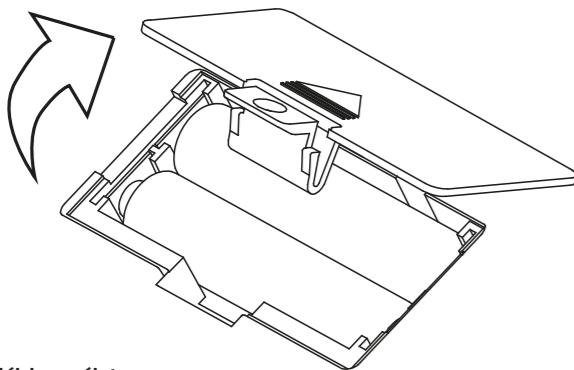

A készülék használata


- A mérleget szírálfelületre helyezze le, ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- A mérleg bekapcsolásához röviden nyomja meg a be/kí kapcsoló gombot.
- A felhasználó gomb hosszú megnyomásával válasszon felhasználót (felhasználó között) a felhasználó gomb rövid nyomogatásával lehet lépegetni, a kiválasztott felhasználó aktiválásához a felhasználó gombot hosszan nyomja meg. A felhasználó kódja az LCD kijelző bal felső sarkában a „code” felirat mellett látható.
- Húzza ki a szilikon dugót és dugja be a felső lapot a nyílásba. A mérő lapot hajtsa fel a mérés aktiválásához. A mérő lapot ne húzza ki. A kijelzőn 46 cm (18,1 hüvelyk) értéket lehet látni. Amennyiben nem, akkor a készülék újrarendításához nyomja meg röviden a be/kí kapcsoló gombot. A mérő lapot teljesen húzza ki.
- A csecsemőt óvatosan helyezze a mérlegre. A baba feje érjen hozzá a felső laphoz. A mérő lapot annyira tolja be, hogy a lap a baba talphoz érjen hozzá.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a HOLD/UNIT gombot a mérő értékek megörzéséhez. A mérő értékek késztér felvilágnak, ami azt jelzi, hogy az értékeket a készülék elmentette a memóriába. A készülék a mérő értékeket összehasonlíta a korábban mérő értékkal, és a különbséget jeleníti meg. A kijelző jobb oldalán található felfelé mutató nyíl azt jelzi ki, hogy a most mérő érték nagyobb az előző mérő értéknél (a lefelé mutató nyíl a mérő érték csökkenésére utal). Figyelem! Vendég felhasználó üzemmodban a készülék nem menti el a mérő értéket (és nem hasonlíta össze korábbi mérésekkel).
- A mérő érték kijelzőről való törléséhez röviden nyomja meg a HOLD/UNIT gombot.
- Egy felhasználó esetében a készülék max. 15 értéket tud tárolni. Újabb mérő értéket törlik a legrégebben eltárolt adatokat.
- TÁRA funkció üzemmodban tegye a mérlegre azt a tárgyat, aminek a súlyát nem kívánja beleszámolni a mérődő tárgy súlyából, majd nyomja meg a be/kí kapcsoló gombot. A mérleg lenullázódik, majd tegye a mérlegre a mérődő tárgyat.
- A használandó mérőélegység kiválasztásához addig tartsa benyomva az UNIT/HOLD gombot, amíg a mérőélegység meg nem változik.
- A mérleg kikapcsolása: hosszan nyomja meg a be/kí kapcsoló gombot. A mérleg akkor is kikapcsol, ha két percig nem nyom meg egy gombot sem.

Hibájelzések a kijelzőn

Err – mérleg túlerhelése. A mérlegben tüllépte a maximálisan megengedett súlyt 25 kg (55 lb). LO – az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.



Specificáció:
Mérőegységek: kg / lb, cm / in
Tápellátás: 4 db 1,5 V-os AAA elem (nem tartozék)
Automatikus kikapcsolás: 2 perc
Maximális terhelhetőség: 25 kg / 55 lb
Súlymérői hiba: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Magasság mérési tartomány: 46–80 cm (18,1–31,5 hüvelyk)
Mérési hiba: ≤ 1 mm (≤ 0,1 in)
Memória: 8 felhasználó, 15 érték tárolása minden felhasználónál
Vendég üzemmód: 0 – nem mentőnek el a mérő értékek

Az LED kijelző részei

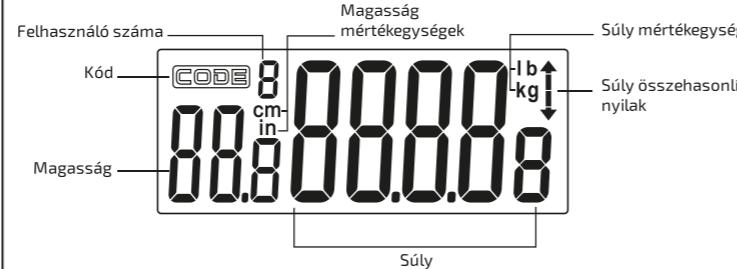

A nyomógombok

- ZERO** Be/kí kapcsoló gomb, és tára üzemmódban nullázás gomb
- HOLD** Mérő értékek megjegyzése, elmentése és összehasonlítása (rövid megnyomás).
UNIT mérőegység megváltoztatása (hosszú megnyomás)
- Felhasználó gomb:** korábbi mérési eredmények megjelenítése (rövid megnyomás), lapozás a mérő értékek között (rövid megnyomás). Hosszú megnyomás: felhasználó kiválasztása üzemmód. Rövid nyomogatás: lapozás a felhasználók között. Hosszú megnyomás: a kijelölt felhasználó aktiválása.

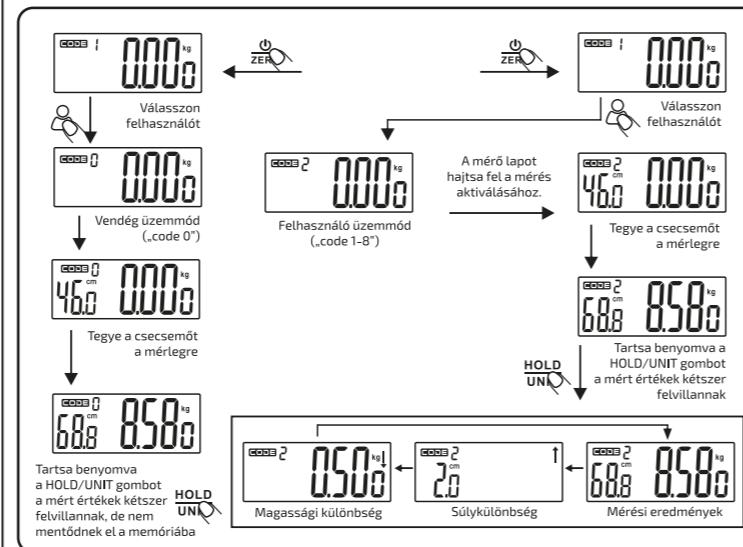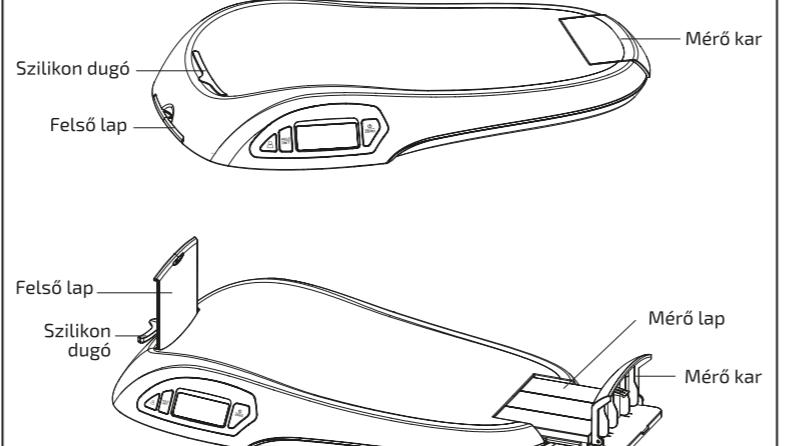

RO

Manual de instrucțiuni

VITALPEAK BS 100

Cântar pentru bebeluși


Vă mulțumim că ati achiziționat produsul VITALPEAK.

Siguranță în timpul utilizării dispozitivului

- Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță incluse.
- Pentru manipularea corectă a produsului, citiți cea mai recentă versiune a manualului, pe care o puteți descărca de la: www.vitalpeak.eu
- Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic sau personal, nu pentru utilizări comerciale ori medicale.
- Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea cauzată de utilizarea incorectă.

Înainte de utilizare:

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din partea inferioară a dispozitivului.
- Introduceți patru baterii AAA de 1,5 V și montați la loc capacul.

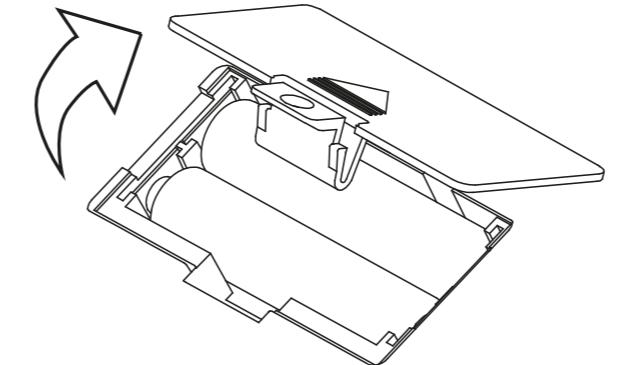

Utilizarea dispozitivului:

- Păstrați întotdeauna cântarul pe o suprafață fermă și plană, în caz contrar cântărirea poate fi inexactă.
- Pentru a porni cântarul, apăsați scurt butonul On / Off (Pornire/Oprire) de pe dispozitiv.
- Apăsați și ținăți apăsat butonul Utilizator pentru a selecta un utilizator (comutări între utilizatori printr-o scurtă apăsare pe butonul Utilizator), utilizatorul selectat este apoi confirmat printr-o altă apăsare lungă pe butonul Utilizator. Numărul utilizatorului se află în colțul din stânga sus al afișajului LCD lângă „cod”.
- Scoateți dopul din silicon și introduceți placa superioară în fanta de sub dop. Ridicați mânerul de măsurare pentru a activa modul de măsurare. Lăsați placa de măsurare în poziție complet introdusă. Afișajul ar trebui să afișeze valoarea de 46 cm sau 18,1 in. În caz contrar apăsați scurt butonul On / Off (Pornire/Oprire) pentru a reseta valorile. Apoi extindeți complet placa de măsurare.
- Așezați cu atenție bebelușul pe cântar. Capul bebelușului trebuie să atingă placa superioară. Continuați să glisați spre interior placa de măsurare până când picioarele bebelușului ating mânerul de măsurare.
- Ținăți apăsat butonul HOLD / UNIT pentru a „îngheta” valorile. Valorile vor fi fixe în memorie. Datele anterioare vor fi afișate ca diferență față de valoarea măsurată curent. Săgeata în sus din partea dreaptă a afișajului indică o valoare măsurată curent mai mare decât cea stocată, săgeata în jos indică o valoare măsurată curent mai mică decât cea stocată. Avertizare! În modul Vizitator, valoarea nu vor fi salvate sau comparate. Apăsați scurt butonul HOLD / UNIT pentru a „îngheta” valorile de pe afișaj.
- Numărul maxim valori pentru fiecare utilizator este 15. Dacă acest număr de măsurători este depășit, măsurătorile anterioare vor fi suprascrise succesiv.
- Pentru funcția TARE (import) (Tare (import)), așezați pe cântar un obiect pe care nu doriți să îl includăți în rezultatul final și apăsați butonul On / Off (Pornire/Oprire). Cântarul se resetează și puteți continua să cântăriți.
- Ținăți apăsat butonul UNIT / HOLD de pe cântar pentru a schimba unitatea de măsurare pentru cântărire în timp ce unitatea se schimbă.
- Oprirea cântarului - ținăți apăsat butonul On / Off (Pornire/Oprire) pentru un timp mai îndelungat. În caz contrar, cântarul se oprește automat la un minut după ultima interacțiune.

Indicații de eroare pe afișajul cântarului


Err – Overload (Eroare – Încărcare excesivă) A fost depășită valoarea maximă de 25 kg / 55 lb și încărcări permise.

Lo – Low batteries (Scăzut – Încărcare redusă a bateriilor) Înlătuiți baterile.

Specificații:

Unități de măsurare: kg / lb, cm / in
Alimentare: 4 baterii AAA de 1,5 V (nu sunt incluse)
Oprire automată: 2 minute
Încărcare maximă: 25 kg / 55 lb
Abatere de greutate: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Interval de măsurare: 46–80 cm / 18,1–31,5 in
Abatere de măsurare: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Memorie: 8 utilizatori, 15 valori pentru fiecare utilizator
Modul Vizitator: Poziția 0 în memorie - măsurătorile nu sunt salvate

Descrierea afișajului LCD


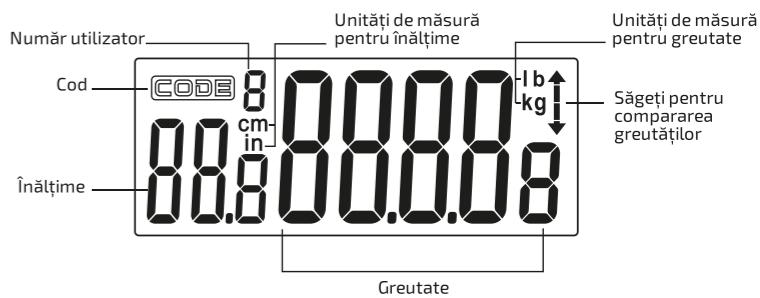


Descrierea butoanelor

ZERO Buton pentru pornire/oprire (On / Off) și pentru resetarea cântarului (TARE)

HOLD UNIT Buton pentru HOLD (înregistrarea și „înghetarea” greutății instantane pe afișaj și compararea acesteia cu greutatea stocată (apăsați scurt) / schimbarea unității de măsurare (ținăți apăsat)

User Buton Utilizator - Apăsarea scurtă afișează istoricul măsurătorilor, parcurgerea prin derulare a valoarelor individuale se face printr-o apăsare scurtă. O apăsare lungă pe buton inițiază schimbarea modului Utilizator. Apoi, apăsările scurte comută între utilizatori. Confirmați utilizatorul selectat apăsând și ținând apăsat butonul.

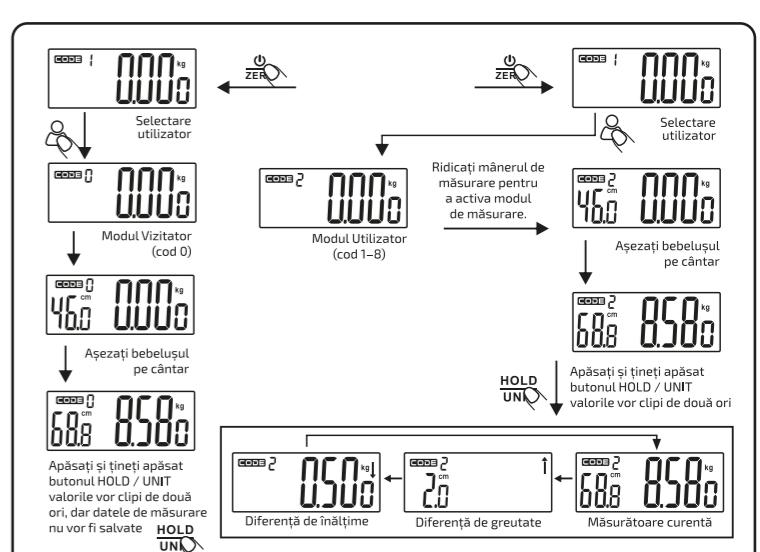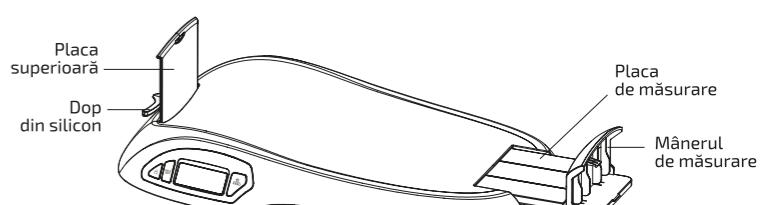

VITALPEAK BS 100

Vaga za bebe


Zahvaljujemo na kupnji proizvoda VITALPEAK.

Sigurnost pričekom rada s uređajem i uporabe

- Pozorno pročitajte ova sigurnosna upozorenja.
- Za pravilno rukovanje proizvodom pročitajte najnoviju verziju priročnika koja se može preuzeti na: www.vitalpeak.eu
- Uredaj je namenjen uporabi samo u kućanstvu ili privatnom okruženju, a ne u komercijalnom ili medicinskom okruženju.
- Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nestručnom ili nepravilnom uporabom.

Prije upotrebe:

- Otvorite zaštitni poklopac odjeljka za baterije na donjem dijelu uređaja.
- Umetnite četiri 1,5 V AAA baterije i ponovno zatvorite poklopac.

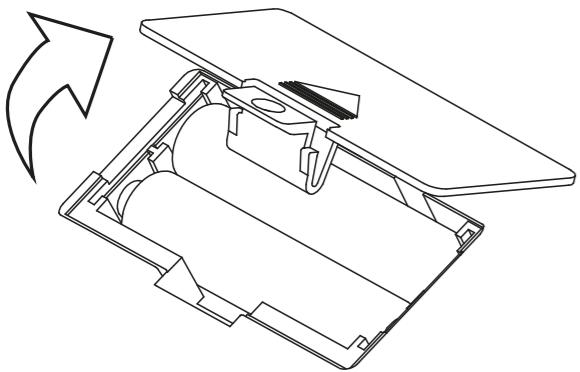**Korištenje uređaja:**

- Vagu uvijek držite na čvrstoj, ravnoj površini, inače vaganje može biti netočno.
- Da biste uključili vagu, kratko pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje na uređaju.
- Držite pritisnutu tipku za odabir korisnika (korisnik se zatim prebacuje kratkim pritiskom korisničke tipke, a odabran korisnik potvrđuje se još jednim dugim pritiskom iste tipke). Broj korisnika nalazi se u gornjem lijevom kutu LCD zaslona pored natpisa „code“.
- Uklonite silikonski slijepi čep i umetnite gornju ploču u utor ispod slijepog čepa. Podignite mjeru ručku da biste aktivirali način mjeranja. Umetnite mjeru ploču u potpunosti. Zaslon bi trebao prikazivati vrijednost 46 cm ili 18,1 inča. Ako to nije slučaj, kratko pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje da biste resetirali vrijednost. Zatim mjeru ploču izvucite u potpunosti.
- Pažljivo stavite bebu na vagu. Glava bi trebala dodirivati gornju ploču. Gurnite mjeru ploču dok noge ne dodirnu mjeru ručku.
- Držite duže tipku HOLD / UNIT kako biste zamrznuli prikazane vrijednosti. Kao potvrda da su zapisane u memoriju vrijednosti će treptnuti dva puta. Prethodni podaci prikazat će se kao razlika od trenutno izmjerene vrijednosti. Strelica prema gore na desnoj strani zaslona označava veću trenutnu izmjerenu vrijednost u odnosu na snimljenu, strelica prema dolje pokazuje nižu izmjerenu trenutnu vrijednost u odnosu na pothranjenu. Pozor! U načinu rada posjetitelja vrijednosti se neće spremiti niti usporediti. Kratko pritisnite HOLD / UNIT da prekinete zamrzavanje vrijednosti na zaslonu.
- Maksimalni broj vrijednosti po korisniku je 15. Ako se premaši ovaj broj mjerena, prethodna mjerena postupno će se prebrisati.
- Za funkciju TARE (tariranje) stavite predmet na vagu koji ne želite uključiti u rezultat vaganja i pritisnite gumb za uključivanje / isključivanje. Vaga će se tarirati i možete nastaviti vagati.
- Da biste promjenili jedinice, kad je vaga uključena dugi držite tipku UNIT / HOLD na vagi dok je jedinica ne promjeni.
- Isključivanje vage - držite tipku za uključivanje / isključivanje dulje vrijeme. Osim toga, vaga se automatski isključuje jednu minutu nakon posljednje akcije.

Simbol greške na zaslonu vage

Greška - preopterećenje. Prekoračena je maksimalna dopuštena vrijednost od 25 kg / 55 lb.
Lo - prazne baterije baterije. Zamjenite baterije novima.

Specifikacije:




Jedinice: kg / lb, cm / in
Napajanje: 4 x 1,5 V AAA baterije (nisu sadržane u pakiranju)
Automatsko isključenje: 2 minute
Maksimalno opterećenje: 25 kg / 55 lb
Odstupanje vaganja: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Raspot mjerjenja visine: 46–80 cm / 18,1–31,5 in
Odstupanje mjerjenja: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Memorija: 8 korisnika, 15 mesta za svakog korisnika
Način posjetitelja: Položaj memorije 0 – mjerena vrijednost nije spremljena

Opis LCD zaslona**Opis gumba**

TIPKA ZA UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE (TARE)

GUMB ZA SNIMANJE, ZAMRZAVANJE I USPOREDBU SNIMLJENE VRIJEDNOSTI (KRATKO PRITISNITE) / PROMJENU MJERNE JEDINICE VAGANJA (ZADRŽATI)

KORISNIČKI GUMB - KRATKI PRITISK Prikazuje povijest mjerena, pomicanje kroz pojedinačne vrijednosti vrši se kratkim pritiskom. Dugim pritiskom na gumb pokreće se način promjene korisnika. Nakon toga kratkim pritiscima se prebacuje između korisnika. Dugim pritiskom potvrdite odabranog korisnika.

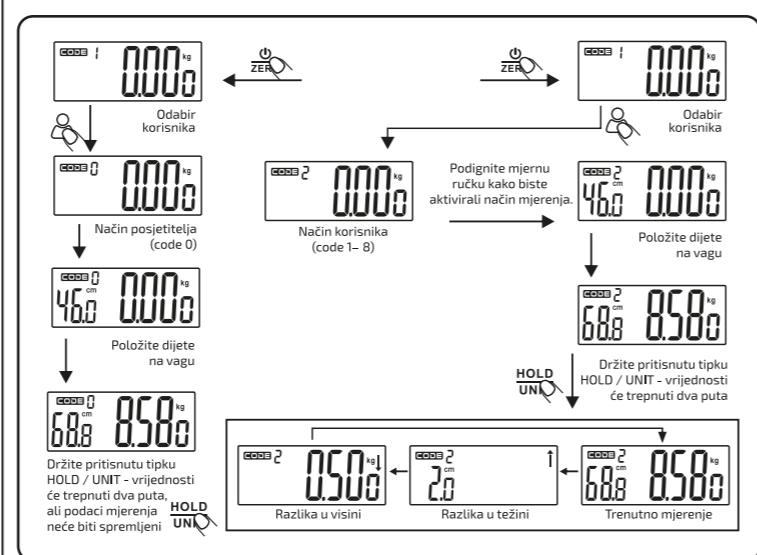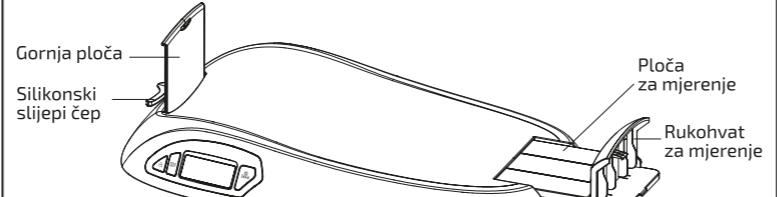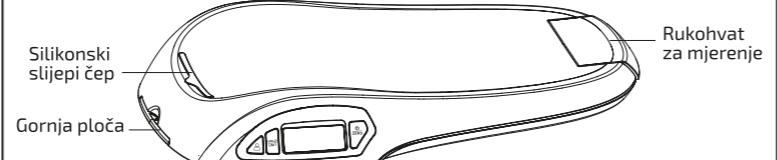**VITALPEAK BS 100**

Otroška tehnicka


Zahvaljujemo se Vam za nakup izdelka VITALPEAK.

Varnost pri delu z aparatom in uporabi

- Pozorno preberite priložene varnostne ukrepe.
- Za pravilno ravnjanje z izdelkom preberite najnovejšo različico priročnika, ki je za prenos na voljo na: www.vitalpeak.eu
- Aparat je namenjen samo za uporabo v domačem oziroma zasebnem okolju, v nobenem primeru ni namenjen za komercialne ali medicinske namene.
- Proizvajalec ne jamči za škode, nastale zaradi nestrokovne ali neprimerne uporabe.

Pred uporabo:

- Odprite zaštitni pokrov prostora za baterije na spodnjem delu naprave.
- Vstavite štiri baterije AAA 1,5 V in pokrov ponovno zaprite.

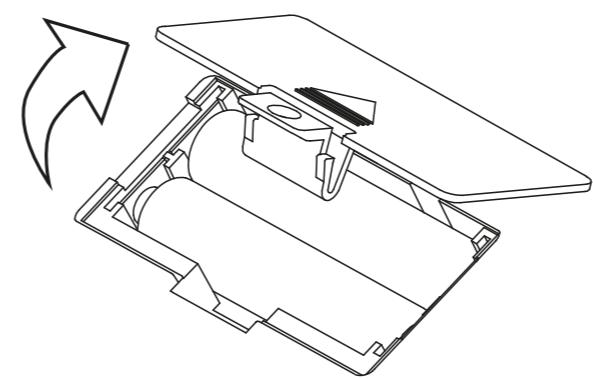**Uporaba aparata:**


- Tehnicu imejte vedno na trdni ravni podlagi, sicer je lahko tehtanje nenatančno.
- Za vklop tehnike na kratko pritisnite na gumb za vklop/izklop naprave.
- Pridržite gumb uporabnika za izbiro uporabnika (med uporabniki nato preklaplja s kratkim pritiskom na gumb uporabnika, potrditev izbrane uporabnika izvedete z dolgim pritiskom na gumb uporabnika. Številka uporabnika je v levem zgornjem kotu zaslona LCD poleg napisa »code«).
- Odstranite silikonski čep in vstavite zgornjo pločo v režo pod čepom. Dvignite merilno ročaj za aktiviranje načina merjenja. Merilno ploščo pustite povsem vstavljen. Zaslon bi moral prikazovati vrednost 46 cm ali 18,1 in. Če teh vrednosti ne kaže, na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop za ponastavitev vrednosti. Nato povsem izvlecite merilno ploščo.
- Previdno položite otroka na tehnico. Glava se mora dotikati zgornje plošče. Vstavljajte merilno ploščo, dokler se stopala ne dotikajo merilnega ročaja.
- Pridržite gumb HOLD/UNIT za zadržanje vrednosti. Vrednosti bodo dvakrat zautripiate za potrditev, da so se vpisale v spomin. Prejšnji podatki bodo prikazani v obliki razlike v primerjavi z zdaj izmerjenimi vrednostmi. Puščica navzgor na desni strani zaslona označuje višjo zdajšnjo izmerjeno vrednost v primerjavi s shranjeno, puščica navzdol označuje nižjo zdajšnjo vrednost v primerjavi s shranjeno. Pozor! V načinu obiskovalca se vrednosti ne bodo shranjevale ali primerjale. Na kratko pritisnite na gumb HOLD/UNIT za preklic zadrževanja vrednosti na zaslonu.
- Največje število vrednosti za enega uporabnika je 15. Če presežete to število meritev, se bodo postopoma prepisovale starejše meritev.
- Za funkcijo TARA (odstevrek) na tehnico položite predmet, ki ga v poznejšem tehtanje ne želite všeti, in pritisnite na gumb za vklop/izklop. Tehnica se ponastavi in lahko nadaljuje s tehtanjem.
- Za spremembo enot na vklapljeni tehnici pridržite gumb UNIT/HOLD, dokler se enote ne spremeni.
- Izklop tehnice – pridržite gumb za vklop/izklop. Tehnica se samodejno izklopí po eni minuti od zadnje interakcije.

Oznake napak na zaslonu tehnice

Err – Preobremenitev. Prekoračena najvišja dovoljena vrednost 25 kg/55 lb.
Lo – Prazne baterije. Zamenjajte baterije z novimi.

Specifikacija:




Enote: kg/lb, cm/in
Napajanje: 4x 1,5 V AAA baterije (niso priložene)
Samodejni izklop: 2 minute
Maksimalna obremenitev: 25 kg/55 lb
Odstopanje tehtanja: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb
Razpon merjenja visine: 46–80 cm/18,1–31,5 in
Odstopanje mjerjenja: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in
Spomin: 8 uporabnikov, 15 mest za vsakega uporabnika
Način obiskovalca: Spominsko mesto 0 – meritve se ne shranjujejo

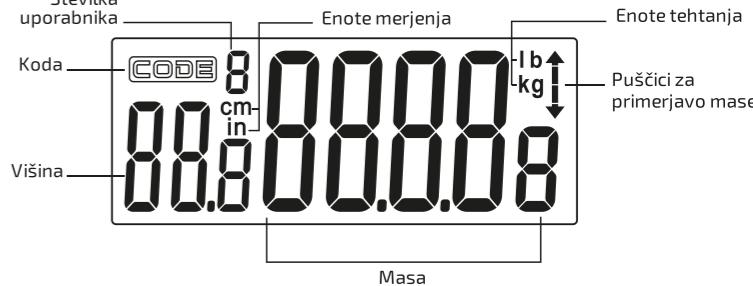Opis zaslona LCD**Opis gumbov**

GUMB ZA VKLOP/IZKLOP TER PONASTAVITEV TEHTNICE (TARA)

GUMB ZA ZAPIS, ZADRŽANJE IN PRIMERJAVA SHRANEJENE MASE (KRATEK PRITISK)/SPREMENIMO ENOTE TEHTANJA (PRIDRŽANJE)

GUMB UPORABNIKA – KRATEK PRITISK PRIKAŽE ZGODOVINO MERJENJA, PREHAJANJE PO POSAMEZNIH ENOTAH POTEKA S KRATKIM PRITISKOM. PRIDRŽANJE GUMBA SPROŽI MENJAVA UPORABNIKA. S KRATKIM PRITISKI NATO PREKLPLJATE MED UPORABNIKI. Izbranega uporabnika potrdite z dolgim pritiskom.

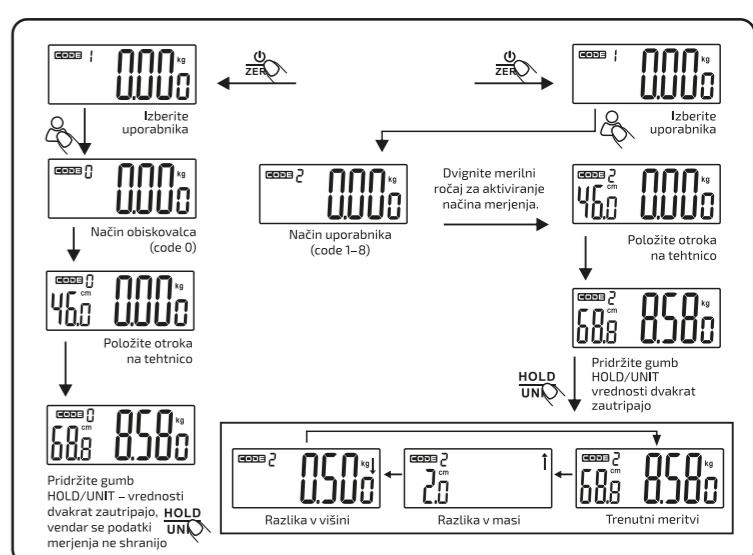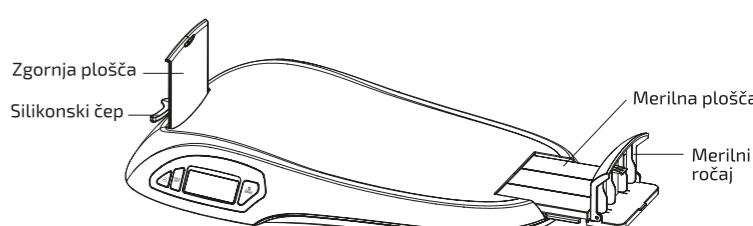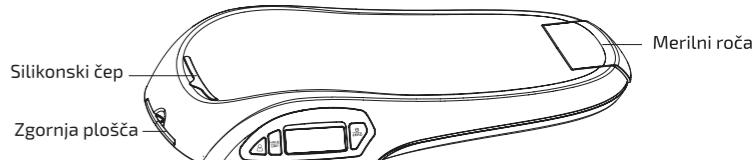



LT | Instrukcijų vadovas

LV | Lietošanas instrukcija

BG | Ръководство за експлоатация

ET | Kasutusjuhend

LT

Instrukcijų vadovas

VITALPEAK BS 100

Svarstyklės kūdikiams


Dėkojame, kad įsigijote VITALPEAK gaminį.

Saugia dirbant ir naudojant prietaisą

- Atidžiai perskaitykite pridėtās saugos instrukcijas.
- Norėdami tinkamai naudotis gaminiu, perskaitykite naujausią vadovo versiją, kurią galite atsišiušti adresu: www.vitalpeak.info
- Prietaisais skirtas naudoti tik būtinėje arba privačioje aplinkoje, bet ne komercijos arba medicinos srityje.
- Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo arba neteisingo naudojimo.

Prieš naudojimą:

- Atidarykite maitinimo elementų skyrelį dangtelį, esantį apatinėje prietaiso dalyje.
- Istatykite keturis 1,5 V AAA maitinimo elementus ir atgal uždekitė dangtelį.

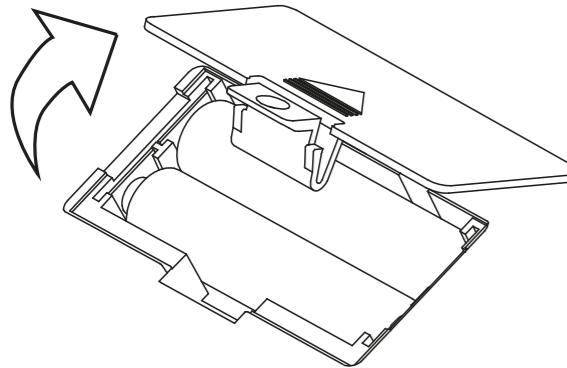

Irenginio naudojimas:

- Svarstyklės visuomet laikykite ant tviro ir stabilaus paviršiaus, nes priešingu atveju svorio rodmenys bus netikslūs.
- Norėdami įjungti svarstyklės, spustelėkite įjungimo/įšjungimo mygtuką ant prietaiso.
- Norėdami pasirinkti naudotoją, spauskite ir laikykite nuspauđę naudotojo mygtuką (atskirus naudotojus perjunkite trumpo naudotojo mygtuko spustelėjimui). Tada pasirinktas naudotojas patvirtinamas dar vienu išgū naudotojo mygtuko spustelėjimu. Naudotojo numeris rodomas viršutiniame kairiajame LCD ekrano kampe šalia „kodo“.
- Išimkite silikoninį kaištį ir įstatykite viršutinę plokštę į kiaurympę po kaiščiu. Kad suaktyvintume matavimo režimą, kilstelėkite matavimo rankenelę. Palikite matavimo plokštę visiškai išstumtą. Ekrane turi būti rodoma 46 cm arba 18.1 col. reikšmė. Jei ne, spustelėkite įjungimo/įšjungimo mygtuką, kad atstatytumėte reikšmes. Po to visiškai išstraukite matavimo plokštę.
- Atsargiai užkelkite kūdikį ant svarstyklės. Galva turi liestis prie viršutinės plokštės. Slinkite matavimo plokštės blokį kol pėda palies matavimo rankenelę.
- Norėdami užfiksoti svorio reikšmę, palaiykite nuspauštą HOLD / UNIT mygtuką. Reikšmės du kart sumirkstės patvirtinimui, kad buvo įrašytos į atmintinę. Ankstesni duomenys bus rodomi kaip skirtumas nuo esamos išmatuotos reikšmės. Jų viršūnė nukreipta rodyklė, esanti dešinėje ekranio pusėje informuoja, kad dabartinė svorio reikšme padidėjo palyginus su atmintine įsaugota reikšme. Ją apaičiai nukreipta rodyklė informuoja, kad dabartinė svorio reikšmė sumažėjo palyginus su įsaugota reikšme. Ispėjimas! „Visitor“ (lankytocio) režime reikšmės nebūs įsaugotos arba palygintos. Spustelėkite HOLD / UNIT, kad užfiksotumėte reikšmes ekrane.
- Maksimalius reikšmių skaičius naudotojui yra 15. Jei šis viršijamas šis matavimų skaičius, ankstesni matavimai bus laipsniškai perrašomi.
- Naudojantis (importo) funkcija, uždėkite objektą ant svarstyklės, kurio svoris būtų išmatuotas iš viso svorio rezultato ir spauskite įjungimo/įšjungimo mygtuką.
- Norėdami pakeisti matavimo vienetą, palaiykite nuspauštą UNIT / HOLD mygtuką

ant svarstyklėlių.

- Norėdami įjungti svarstyklės - kažkiek ilgiau palaiykite nuspauštą įjungimo/įšjungimo mygtuką. Priešingu atveju svarstyklės įssijungs savaimė po vienos neveikos minutės.

Klaidos indikacija svarstyklėlių ekrane

Err - Perkrova. Viršytas maksimalus leistinas 25 kg / 55 lb svoris.
Lo - Senka maitinimo elementai. Pakelskite juos.

Techniniai parametrai:

Vienetai kg / lb, cm / col
Maitinimas: 4x 1,5 V AAA maitinimo elementai (i komplektą nejina)

Automatinis įjungimas: po 2 minučių

Maksimali apkrova: 25 kg / 55 lb

Svorio nuokrypis: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb

Ūgio matavimo diapazonas: 46–80 cm / 18,1–31,5 col.

Matavimo nuokrypis: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 col.

Atmintinė: 8 naudotojai, 15 reikšmių vienam naudotojui

Lankytojo režimas: Atmintinės režimas 0 - matavimai neišsaugomi

LCD ekrano aprašymas





Mygtukų aprašymas

ZERO Įjungimas / įjungimo (On/Off) mygtukas ir svarstyklėlių atstata (TARE)

HOLD UNIT Mygtukas įrašymui, užfiksavimui ir įrašyto svorio palyginimui (trumpas spustelėjimas) / svorio vieneto pakeitimui (palaikyti nuspauodus)

CODE Naudotojo mygtukas - trumpai spustelėjus rodoma matavimų istorija. Pavienes reikšmes galima slinkti trumpu mygtuko spustelėjimu. Ilgesniu mygtuko spustelėjimu pradedamas naudotojo režimo keitimas. Naudotojai perjungiami trumpai spustelėjant. Patvirtinkite naudotojų ilgesniu spustelėjimu.

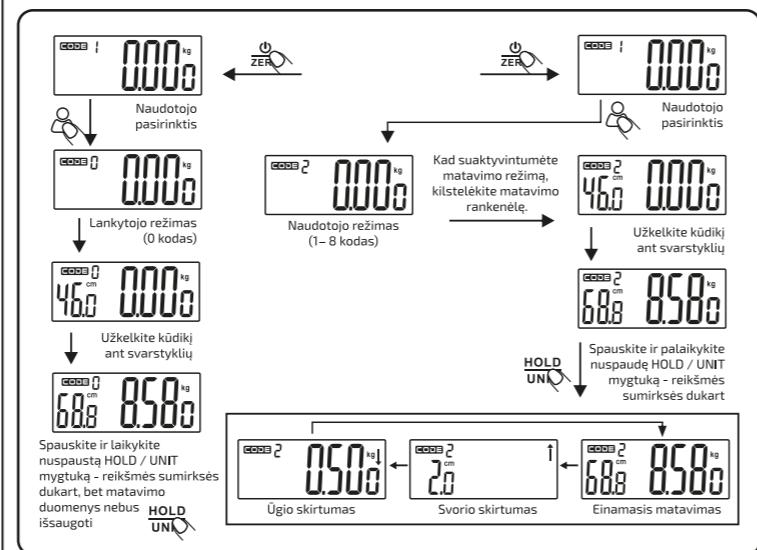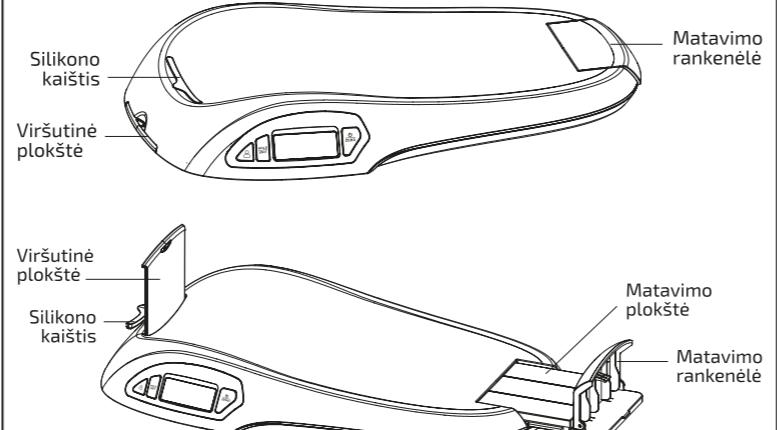

BG

Ръководство за експлоатация

VITALPEAK BS 100

Електронна бебешка везна


Благодарим Ви, че закупихте този продукт на VITALPEAK.

Указания за безопасност при работа с уреда

- Прочетете внимателно Указанията по безопасността.
- За правилна работа с уреда, прочетете последната версия на Ръководството, която може да бъде изтеглена от сайта www.vitalpeak.eu
- Уредът е пред назначен за ползване само в домашна среда за лична употреба, но не и за търговски или медицински цели.
- Производителят не е отговорен за увреждания, причинени от неправилна употреба на уреда.

Преди употреба:

- Отворете отсека за батерии в задната част на уреда.
- Поставете 4 батерии 1,5 V AAA и затворете капака на отсека.

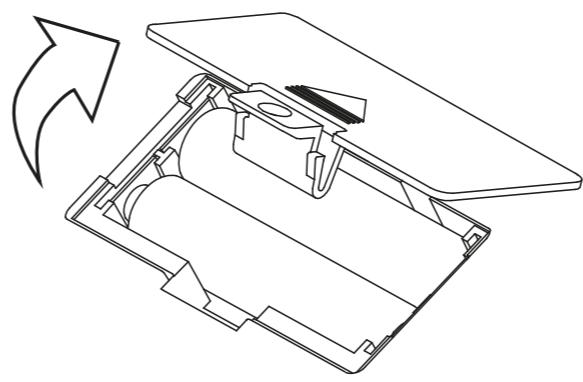

Ползване на устройството:

- Винаги поставяйте везната на твърда и стабилна хоризонтална повърхност; в противен случай измереното тегло може да е неточno.
- За да включите везната, натиснете за кратко бутона On / Off (Вкл / Изкл) на уреда.
- Натиснете и задръжте бутона със символно изображение на Потребител, за да изберете номера на потребителя (можете да превключвате този номер като натискате за кратко споменатия бутона за избор на потребител). След това потвърдете избрания номер потребител като натиснете продължително същия бутона. Номерът на потребителя е показан в горния ляв ъгъл на дисплея, вдясно от полето „CODE“.
- Изтеглете силиконовата вложка и въмкнете в слота под нея пластината за упор на главата на бебето. Вдигнете нагоре измервателната дръжка (пластина), за да активирате измервателният режим. Поставете измервателната пластина (за височина на бебето) изцяло въмкната (в уреда). Дисплеят трябва да показва стойност 46 см или 18.1 in. Ако не е така, натиснете за кратко бутона On / Off (Вкл / Изкл), за да възстановите изходните стойности. След това изтеглете напълно напълно измервателната пластина (за височина на бебето).
- Внимателно положете бебето върху везната. Главата му трябва да допира горната упорна пластина. Плъзнете към петите на бебето измервателната пластина, докато петите му докоснат измервателната дръжка (пластина).
- Натиснете бутона HOLD / UNIT, за да замразите стойностите. Стойностите ще примишнат двукратно, за да покажат, че са записани в паметта. Предишните данни ще покажат като разлика спрямо текущо измерената стойност. Стрелката нагоре в дясната част на дисплея показва по-висока текуща стойност в сравнение със запаметената, а стрелката надолу показва по-ниска текуща измерена стойност в сравнение със запаметената. Предупреждение! В режим Visitor (Посетител) стойностите няма да се запаметяват или сравняват. Натиснете за кратко бутона HOLD / UNIT, за да замразите стойностите на дисплея.
- Максималният брой стойности за един потребител е 15. Ако боят на измерванията превиши допустимия, предходните измервания ще бъдат последователно презаписвани.
- За функцията TARE (Тара), поставете обект върху везната, чиято тежест не искате да се включи в претегляната стойност и натиснете бутона On / Off (Вкл / Изкл). Везната се нулира (връща в изходно състояние) и можете да продължите да претегляте.
- Натиснете и задръжте бутона UNIT / HOLD на везната докато мерната единица за тегло се сменят.
- Изключване на везната - натиснете продължително бутона On/Off (Вкл / Изкл). По друг начин везната ще се изключи автоматично една минута след последната операция с нея.
- Натиснете и задръжте бутона HOLD / UNIT / Задръжте бутона за изключване на везната (показано във височина на бебето на везната).

Индикация за грешка на дисплея на везната

Err - Overload (Грешка - Претоварване) Превишена е максималната допустима стойност за претегляне, равна на 25 kg / 55 lb.
Lo - Low (Нисък / задържане) Източени батерии - заменете ги с нови

Спецификации:

Мерни единици: kg / lb, cm / in
Мощност: 4 батерии 1,5 V AAA (не са включени в комплекта)

Автоматично изключване: 2 минути

Максимално натоварване по тегло: 25 kg / 55 lb

Отклонение на измереното тегло: ≤ 5 g, ≤ 0,01 lb

Диапазон за измерване на височина: 46–80 cm / 18,1–31,5 in

Отклонение на измерената стойност: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 in

Памет: 8 потребители, по 15 стойности за всеки потребител

Режим на посетител: Позиция на паметта 0 - измерванията не се запаметяват

Описание на LCD дисплея





Описание на бутоните

ZERO Бутона за превключване On/Off (Вкл/Изкл) и за нулиране на везната (TARE)

HOLD UNIT Бутона за запис, замразяване и сравняване на запаметеното тегло (натиснете за кратко) / смяна на мерната единица за тегло (HOLD)

CODE Бутона за потребителя - кратко натискане показва историята на измерванията; с кратко натискане се преминава през отделните стойности. Продължително натискане на бутона предизвиква смяна на режима на потребителя. Кратки натисканятия след това превключват потребителите. Потвърдете избрания потребител с натискане и задържане.

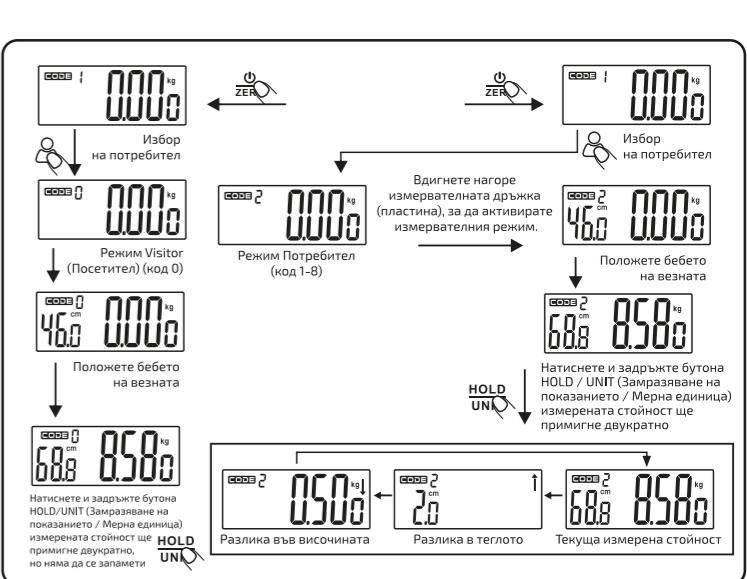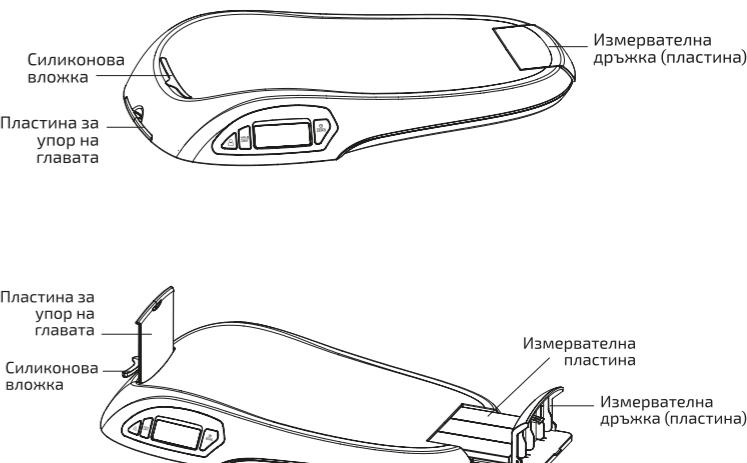

LV

Lietošanas instrukcija

VITALPEAK BS 100

Zīdaiņu svari


Pateicamies par VITALPEAK produkta iegādi!

Drošība, darbojoties ar ierīci, un tās lietošana

- Uzmanīgi izlasiet pievienotos drošības norādījumus.
- Lai atbilstoši apieštu ar ierīci, izlasiet jaunāko lietošanas instrukcijas versiju, ko var lejupielādēt no: www.vitalpeak.info.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecībā vai privātām vajadzībām, ne komercālai vai medicīniskai izmantošanai.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies neatbilstošas vai nepareizas lietošanas dēļ.

Pirms lietošanas:

- Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu ierīces apakšā.
- Ievietojiet četrus 1,5 V AAA baterijas un uzlieciet atpakaļ vāciņu.

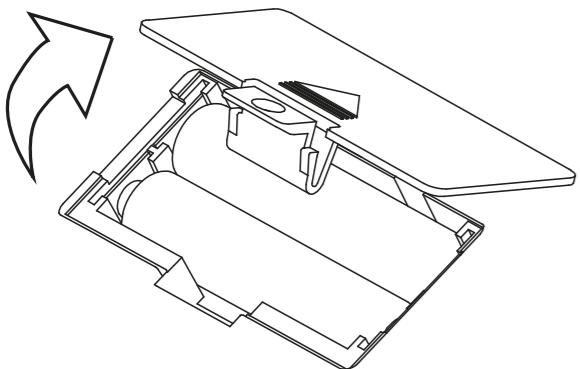**Ierīces lietošana:**

- Vienmēr turiet svarus uz stingras, līdzīnas virsmas, pretējā gadījumā svēršana var būt neprecīza.
- Lai ieslēgtu svarus, viegli nospiediet leslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ierīces.
- Nospiediet un turiet nospiestu lietotāja pogu, lai izvēlētos lietotāju (pārslēdzieti starp lietotājiem, viegli nospiežot lietotāja pogu), pēc tam izvēlētās lietotās tiek apstiprināts, vēlreiz nospiežot lietotāja pogu. Lietotāja numurs atrodas šķidro kristālu displeja augšējā kreisajā stūri, blakus "kodam".
- Noņemiet silikona aizbāzni un ievietojiet augšējo paliktni gropē zem aizbāzna. Paceliet mērišanas rokturi, lai aktivizētu mērišanas režīmu. Atstājet mērišanas paliktni pilnībā ievietotu. displejam būt jārāda 46 cm vai 18,1 collas. Ja tā nav, viegli nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu, lai atiestatītu vērtības. Tad pilnībā izlaideit mērišanas paliktni.
- Uzmanīgi uzlieciet zīdaini uz svariem. Galvai jāpieskaras augšējam paliktnim. Turpiniet slīdināt būt iekšā mērišanas paliktni, līdz kājas pieskaras mērišanas rokturim.
- Turiet nospiestu HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu, lai noplīksnētu vērtības. Vērtības mirgos divreiz, lai apstiprinātu, ka tās ir saglabātas atmīnā. Iepriekšējie dati tiek atstāti kā atšķirība no pašlaik nosvertās vērtības. Augšupvērsta bultīņa displeja labajā pusē norāda uz augstāku pašlaik nosvertā vērtību salīdzinājumā ar saglabāto, lejupvērsta bultīņa norāda uz zemāku pašreizējo vērtību, salīdzinot ar saglabāto. Bridinājums! Viesa režīmā vērtības netiks saglabātas un salīdzinātas. Viegli nospiediet HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu, lai novilkstu vērtības displejā.
- Maksimālais vērtību skaits vienam lietotājam ir 15. Ja tiek pārsniegts šo mēriju skaits, iepriekšējie mēriju tiek pakāpeniski pārrakti.
- TARAS (importēt) funkcijai novietojiet uz svariem priekšmetu, kuru nevēlaties iekļaut gala svarā un nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu. Svari atiestatās un jūs varat turpināt svēršanu.
- Turiet nospiestu HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu uz svariem, lai mainītu mērvienības, kamēr tās var nomainīt.
- Svari izslēgšana – turiet nospiestu leslēgt/izslēgt pogu ilgāku laiku. Pretējā gadījumā svari paši automātiski izslēgšies vienas minūtes laikā pēc jebkādas pēdējās mijiedarbības.

Klūdas norādes svaru displejā

Err – Pārslodze. Ir pārsniegts maksimālais pieļaujamais svars 25 kg / 55 mārciņas. Lo – Zems bateriju uzlādes līmenis. Nomainiet baterijas.

Specifikācijas:

Mērvienības: kg / mārciņas, cm / collas

Jauda: 4x 1,5 V AAA baterijas (nav iekļauti)

Automātiska izslēgšanās: 2 minūtes

Maksimālā noslodze: 25 kg / 55 mārciņas

Svara novirze: ≤ 5 g, ≤ 0,01 mārciņa

Garuma mērišanas diapazons: 46–80 cm / 18,1–31,5 collas



Garuma novirze: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 colla

Atmiņa: 8 lietotāji, 15 vērtības katram

Viesa režīms: Atmiņas pozīcija 0 – mēriju nav saglabāti

Šķidro kristālu displeja apraksts**Pogu apraksts****ZERO** Poga ieslēgšanai/izslēgšanai un svaru atiestatīšanai (TARA)**HOLD UNIT** Poga saglabāšanai, noplīksnēšanai un saglabātā svara salīdzināšanai (viegli nospieši)/mērvienības mainījai (turēt nospieštu)

Ierīces lietošana:
1. Vienmēr turiet svarus uz stingras, līdzīnas virsmas, pretējā gadījumā svēršana var būt neprecīza.
2. Lai ieslēgtu svarus, viegli nospiediet leslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ierīces.
3. Nospiediet un turiet nospiestu lietotāja pogu, lai izvēlētos lietotāju (pārslēdzieti starp lietotājiem, viegli nospiežot lietotāja pogu), pēc tam izvēlētās lietotās tiek apstiprināts, vēlreiz nospiežot lietotāja pogu. Lietotāja numurs atrodas šķidro kristālu displeja augšējā kreisajā stūri, blakus "kodam".
4. Noņemiet silikona aizbāzni un ievietojiet augšējo paliktni gropē zem aizbāzna. Paceliet mērišanas rokturi, lai aktivizētu mērišanas režīmu. Atstājet mērišanas paliktni pilnībā ievietotu. displejam būt jārāda 46 cm vai 18,1 collas. Ja tā nav, viegli nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu, lai atiestatītu vērtības. Tad pilnībā izlaideit mērišanas paliktni.
5. Uzmanīgi uzlieciet zīdaini uz svariem. Galvai jāpieskaras augšējam paliktnim. Turpiniet slīdināt būt iekšā mērišanas paliktni, līdz kājas pieskaras mērišanas rokturim.
6. Turiet nospiestu HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu, lai noplīksnētu vērtības. Vērtības mirgos divreiz, lai apstiprinātu, ka tās ir saglabātas atmīnā. Iepriekšējie dati tiek atstāti kā atšķirība no pašlaik nosvertās vērtības. Augšupvērsta bultīņa displeja labajā pusē norāda uz augstāku pašlaik nosvertā vērtību salīdzinājumā ar saglabāto, lejupvērsta bultīņa norāda uz zemāku pašreizējo vērtību, salīdzinot ar saglabāto. Bridinājums! Viesa režīmā vērtības netiks saglabātas un salīdzinātas. Viegli nospiediet HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu, lai novilkstu vērtības displejā.
7. Maksimālais vērtību skaits vienam lietotājam ir 15. Ja tiek pārsniegts šo mēriju skaits, iepriekšējie mēriju tiek pakāpeniski pārrakti.
8. TARAS (importēt) funkcijai novietojiet uz svariem priekšmetu, kuru nevēlaties iekļaut gala svarā un nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu. Svari atiestatās un jūs varat turpināt svēršanu.
9. Turiet nospiestu HOLD / UNIT (Turēt/mērvienība) pogu uz svariem, lai mainītu mērvienības, kamēr tās var nomainīt.
10. Svari izslēgšana – turiet nospiestu leslēgt/izslēgt pogu ilgāku laiku. Pretējā gadījumā svari paši automātiski izslēgšies vienas minūtes laikā pēc jebkādas pēdējās mijiedarbības.

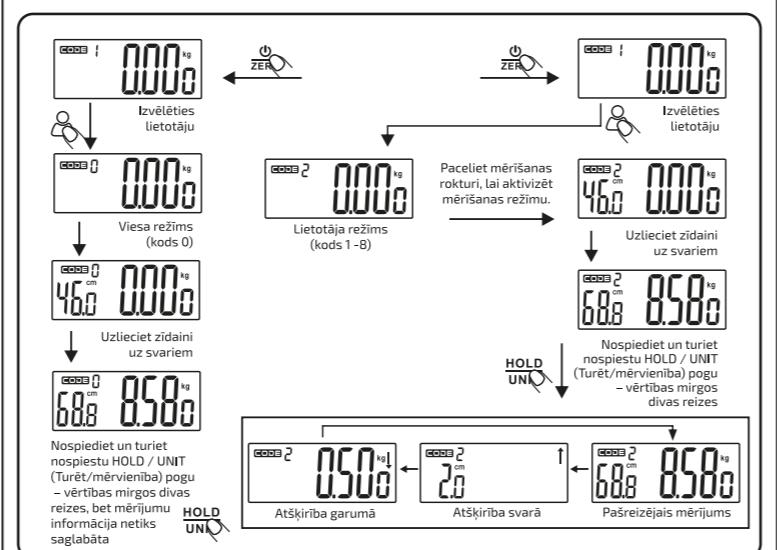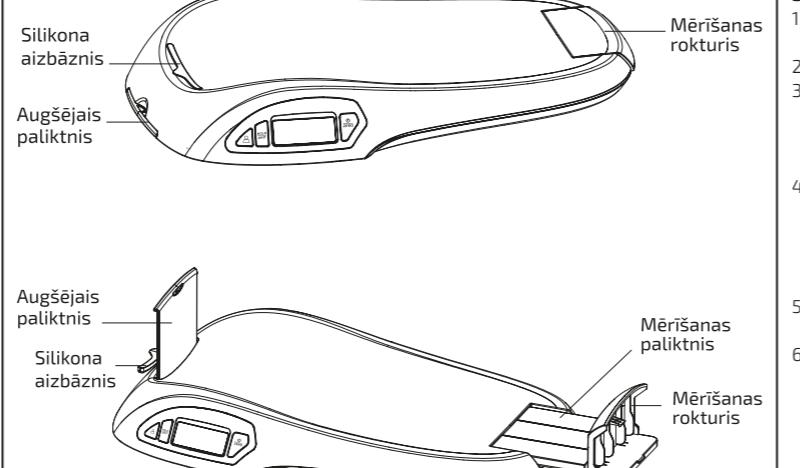

LV

ET

Kasutusjuhend

VITALPEAK BS 100

Imikukaal


Suur tānu VITALPEAK toote ostu eest.

Ohutusjuhised seadmega töötamisel ja kasutamisel

- Tutvuge põhjalikult kaasasolevate ohutusjuhistega.
- Toote nõuetekohaselt käsitsemiseks luguge kasutusjuhendi uusimat versiooni, mille saab alla laadida aadressilt www.vitalpeak.eu
- Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises, mitte komerts- või meditsiiniseärgil.
- Tootja ei vastuta ebaõige või vale kasutamise tagajärvel tekkinud kahjude eest.

Enne kasutamist:

- Avage seadme alumises osas olev patareipesa kate.
- Sisestage neljä 1,5 V AAA patareid ja sulgege patareipesa kate.

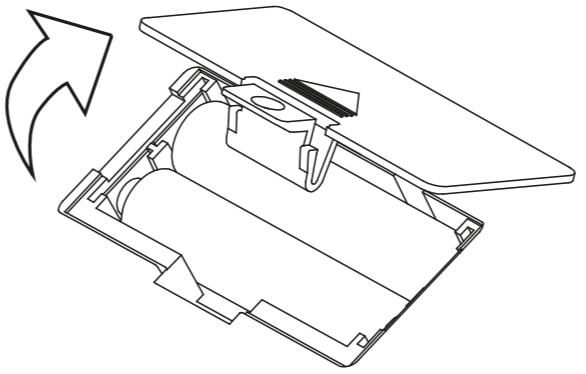**Seadme kasutamine:**

- Hoidke kaalusid alati kindlal, tasasel pinnal, vastasel juhul võib kaalumine olla ebabāpne.
- Kaalu sisse lülitamiseks vajutage lühiajaliselt seadme On/Off nuppu.
- Kasutaja valimiseks vajutage ja hoidke kasutaja nuppu allavajutatud asendis (lülitage kasutaja vahel kasutajanupule lühiajalise vajutamisega) ja seejärel kinnitage valitud kasutaja kasutajanupu pikaajalise vajutamisega. Kasutajanumber asub LCD-ekraani vasakus ülemises nurgas, „koodi“ kõrval.
- Eemaldage silikoontork ja sisestage pealmine plaat pistikу all olevasse pilusse. Mõõtmissezīmi aktiveerimiseks tõstke üles mõõtmishoo. Jätke mõõtmisplaat täielikult sisestatud. Eksaan peab näitama väärust 46 cm või 18,1 tolli. Kui ei, siis vajutage väärustute lähetamiseks lühiajaliselt On/Off nuppu. Seejärel tõmmake mõõtmisplaat täielikult välja.
- Asetage imik ettevaatlikult kaalule. Pea peab puudutada pealmist plati. Libistage mõõtmisplati, kuni jalg puudutab mõõtmishooa.
- Väärtuste hangumiseks vajutage HOLD/UNIT nuppu. Väärtused vilguvad kaks korda, et kinnitata, et nad on mällu salvestatud. Eelned andmed kuvatakse kui erinevus jooksust mõõdetud väärtusest. Eksaani paremal pool oleb ülespoole suunatud nool näitab vörreldes salvestatuga suuremat jooksut väärtust, allapoole suunatud nool näitab vörreldes salvestatuga väiksemat jooksut väärtust. Hoiatus! Küllalise režiimis väärtust ei salvestata ega vörrelda. Kuvaril väärtuste hangumiseks vajutage lühiajaliselt HOLD/UNIT nuppu.
- Maksimaalne väärtustuse arv kasutaja kohta on 15. Selle mõõtmiste arvu ületamisel kirjutatakse eelmised mõõtmisväärtused jätk-järgult üle.
- FunktionsõTI TARE (import) jaoks asetage kaalule objekt, mida te ei soovi lisada lõppkaalule ja vajutage nuppu On/Off. Kaal lähetatakse ja te saate kaalumist jätkata.
- Kaaluuhiikute vahetamiseks hoidke mõõtühikute vahetamise ajal mõõtühikupu nuppu UNIT/HOLD allavajutatud asendis.
- Kaalu väljalülitamini – hoidke On/Off nuppu pikema aja jooksul allavajutatud asendis. Vastasel juhul lülitub kaal automaatselt välja pärast 2-minutiilist ooteaega.


Veateade kaalu ekraanil

Err – Ülekorimus. Maksimaalne lubatud kaalumisväärthus 35 kg/55 naela on ületatud. Lo – Patareid on tühjenemas. Asendage patareid.

Spetsifikatsioonid:

- Ühikud: kg/naelad, cm/tollid
Võimsus: 4 x 1,5 V AAA patareid (ei ole lisatud)
Automaatne väljalülitamine: 2 minutit
Maksimaalne koormus: 25 kg/55 naela
Kaalumisviga: ≤ 5 g, ≤ 0,01 naela
Pikkuse mõõtmisvahemik: 46–80 cm / 18,1–31,5 tolli
Mõõtmisviga: ≤ 1 mm, ≤ 0,1 tolli
Mälu: 8 kasutajat, 15 väärustust igale kasutajale
Küllalise režiimi: Mälu asend - mõõtmisi ei salvestata

LCD-kuvari kirjeldus

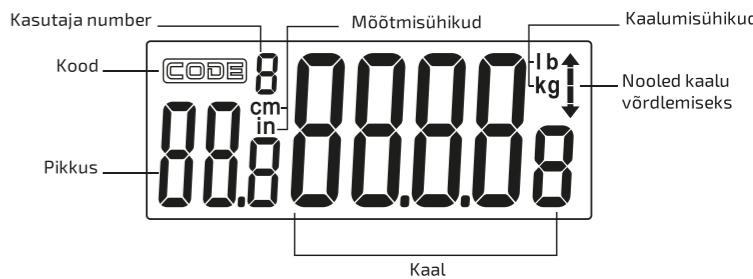**Nuppude kirjeldus****ZERO** On/Off (sisse/välja lülitamise) nupp ja kaalu lähtestamise (TARE) nupp.**HOLD UNIT** Kaalu näidi salvestamise, hangumise ja vördlemise (lühiajaline vajutamine) /kaalumisühiku muutmise nupp (allavajutatud asendis hoidmine)

Kasutaja nupp - Lühiajalisel vajutamisel kuvatakse mõõtmisajalugu, eraldi väärtuse vahel sirvimiseks vajutage lühiajaliselt. Nupu pikaajaline vajutamine käivitab kasutaja vahetuse režiimi. Järgnev lühiajaline vajutus lülitab kasutajate vahel. Valitud kasutajate kinnitamiseks vajutage ja hoidke all.

