

beurer HK 54

CZ



CZ **Výhřevná poduška na ramena
a šíji**
Návod k použití

Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty.....	5
1.1 Popis zařízení	3	4.5 Funkce automatického vypnutí	5
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí	6
Uschovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba	6
3. Použití v souladu s určením	4	6. Uložení.....	7
4. Obsluha	5	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	7
4.2 Uvedení do provozu	5	9. Technické údaje	7
4.3 Zapnutí	5		

Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		




UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.

1. Obsah balení

- 1 Výchřevná poduška
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčka

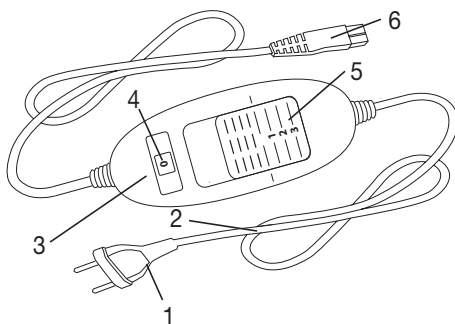

2. Důležité pokyny

Uchovejte pro pozdější použití



VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto výchřevnou podušku nesmějí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, kteří neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto výchřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto výchřevnou podušku nesmí používat děti (3–8 roky), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlízející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s výchřevnou poduškou bezpečně zacházet.
- Tuto výchřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání výchřevné podušky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s výchřevnou poduškou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato výchřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Do podušky nempichujte žádné špendlíky!

- Nepoužívejte podušku, jestliže je složená.
- Nepoužívejte podušku, jste-li mokří.
- Tuto vyhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické vyhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.
Před použitím této vyhřevné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekroutěte s nimi nebo je nelámejte.
- Tuto vyhřevnou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
Pokud se takové známky objeví, vyhřevná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- Pokud je síťový přívodní kabel této vyhřevné podušky poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- V době, kdy je vyhřevná poduška zapnutá, se na ni nesmí pokládat – žádné předměty (např. kufr nebo koš na prádlo), – žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, vyhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání vyhřevné podušky zahřívají. Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na vyhřevné podušce, je-li zapnutá.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Tato vyhřevná poduška je určena pro zahřátí lidského těla.

Zvláštní tvar této vyhřevné podušky byl vyvinut speciálně pro použití v oblasti ramen a šíje. Umístěte vyhřevnou podušku na ramena a oba konce spojte na prsou k sobě. Magnetický uzávěr drží podušku zapnutou. Pokud si přejete, aby poduška přiléhala těsněji k tělu, použijte druky. Pro otevření jedno-duše konce podušky roztáhněte a rozepteňte druky.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnost



POZOR

Výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí výhřevné podušky po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne výhřevnou podušku, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně.

Respektujte prosím, že po závadě již výhřevnou podušku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.


4.2 Uvedení do provozu



POZOR

Ujistěte se, že se výhřevná poduška při používání neshrnula a nevytvořily se záhyby.

- Nejdříve propojte vypínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

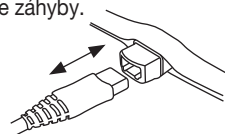

4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, výhřevná poduška se zapne. V zapnutém stavu jsou teplotní stupně (4) osvětlené.

4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2: střední teplota

Stupeň 3: maximální teplota



UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí výhřevné podušky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.



UPOZORNĚNÍ

Tato výhřevná poduška je vybavena rychlou ohřívací jednotkou, která umožňuje rychlejší zahřátí podušky během prvních 10 minut.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

4.5 Funkce automatického vypnutí

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí výhřevné podušky zastaví. Ukazatel teplotních stupňů začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci výhřevné podušky, nastavte nejdříve posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně (5) na stupeň „0“ (VYPNUTO). Asi po 5 sekundách můžete podušku opět zapnout.



4.6 Vypnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“, výhřevná poduška se vypne. Teplotní stupně již nesvítlí.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebudete výhřevnou podušku používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výhřevné podušky.

5. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výhřevné podušky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače použijte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.



POZOR

- Respektujte, že se výhřevná poduška nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce. Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku velmi zatěžuje. Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.

Ohledně vyprání rozprostřete ještě vlhkou výhřevnou podušku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



POZOR

- K připevnění výhřevné podušky nepoužívejte žádné kuličky na prádlo apod. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Vypínač propojte s vyhřívanou poduškou do postele teprve tehdy, když zásuvková spojka i vyhřívaná podložka do postele jsou zcela suché. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.



VAROVÁNÍ

- V žádném případě nezapínejte výhřevnou podušku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu.



POZOR

Výhřevnou podušku nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

7. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Teplotní stupně nesvítí, zatímco - je vypínač řádně propojen s výhřevnou poduškou - je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou - je posuvný spínač nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3	Bezpečnostní systém výhřevnou podušku nezvratně vypnul.	Zašlete výhřevnou podušku a vypínač do servisu.

9. Technické údaje

Viz typový štítek na vyhřívané podušce.

